

マイクロモーター ストロング 207

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観写真は下記の通り



ハンドピース (H400)	
ハンドピース (107)	
E タイプモーター	
ハンドピース (AT-II)	

2. 包装

ハンドピースセット：1 セット / 包

（コントローラー、ハンドピース（107）又は（H400）、フットペダル、電源コード、ミニレンチ 2 個、ハンドピーススタンド）

E タイプセット：1 セット / 包

（コントローラー、E タイプモーター、ハンドピース（AT-II）フットペダル、電源コード、ミニレンチ、スプレーノズル、ハンドピーススタンド）

3. 仕様

コントローラー


入力電圧	AC100V 50/60Hz
サイズ	W130 mm×D150 mm×H84 mm
重量	1.7Kg
最大回転数	35,000rpm

【使用目的又は効果】

本品は歯科で用いる歯科用バー、リーマー等の回転器具を接続するためのチャックを備えた 1 つのハンドピースからなる歯科用器具である。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

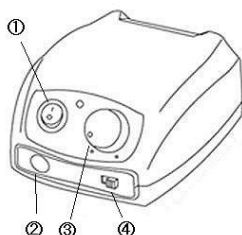

- ① 電源オンオフ切替スイッチ
- ② ハンドピース接続部
- ③ スピード調節ダイヤル
- ④ 正回転・逆回転ボタン

1. 使用前に取扱説明書をよく読むこと。

2. フットペダルを使用しない場合

- 1) チャックを開きハンドピース先端にバーを差し込んだ後、チャックを締めてバーを固定させる。（カチッと音がするまで必ず締めること）
- 2) ハンドピースコードを本体前面に接続する。（②）
- 3) 背面の切替スイッチをハンドモードに設定する。（※フットモードになっていると回転しないので注意する）
- 4) 正回転もしくは逆回転に設定する。（④）
- 5) スピード調節ダイヤルがゼロになっているのを確認してから本体前面の電源スイッチを入れる。（①）
- 6) スピード調節ダイヤル（③）を右に回し、口腔外で補綴物等を研削する。

3. フットペダルを使用する場合

- 1) チャックを開きハンドピース先端にバーを差し込んだ後、チャックを締めてバーを固定させる。（カチッと音がするまで必ず締めること）
- 2) ハンドピースコードを本体前面（②）、フットペダルコードを本体背面に接続する。
- 3) フットモードを選択し、正回転か逆回転に設定する。（④）
- 4) スピード調節ダイヤルがゼロになっているのを確認してから本体前面の電源スイッチを入れる。（①）
- 5) フットペダルを踏み込み、ハンドピースを作動させ、踏み込み加減でスピードを調整する。
- 6) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。（途中でハンドモードに切り替えたい場合は、ハンドモードを選択し、フットペダルを使用しない場合の使用手順で使用する。）

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
- ・ハンドピースを落としたりしないこと。万が一落としてしまった場合は、必ず使用前に再度、先端が曲がったり、過度の熱を帯びないか、テストすること。
- ・回転が確実にとまってから、終了すること。
- ・アダプターは専用のものを使用すること。
- ・フットペダルによるスピード増減には注意すること。

【使用上の注意】

使用前には必ず始業点検をすること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 水のかからない場所に設置すること。
- 2) 気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Saeshin Precision Co., Ltd.
（セシン プレシジョン社）

製造国：大韓民国