

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード：16350000

C i 樹脂コート印象用トレー

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り


上顎/下顎



使用部位	型	A×B (mm)
上顎用	S	72×50
	M	74×56
	L	82×60
下顎用	S	71×49
	M	73×56
	L	78×61

片顎用 左右ペアセット

前歯用 上下ペアセット

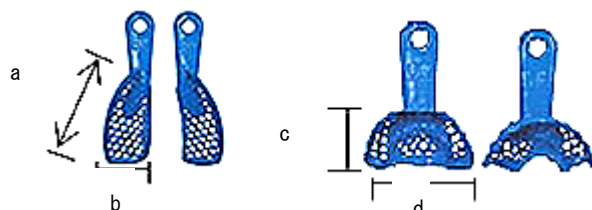

使用部位	a×b (mm)
片顎用左右ペアセット	63×24

使用部位		c×d (mm)
前歯用上下ペアセット	上顎	31×57
	下顎	30×60

2. 原材料

スチール等

3. 包装

上顎/下顎：1 個 / 包

ペアセット：2 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品に印象材を盛り、口腔内に入れ圧接させ、印象を採得するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用部位に合わせた適切なサイズを選択する。
2. 本品に印象材を盛り圧接する。
3. 硬化後、口腔内から取り外す。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 化学製品と一緒に保管しないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。
4. 水分が付着したまま長時間放置するとシミ等の原因となるため、十分乾燥させてから保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌上の注意

[洗浄]

- ・洗浄を行う際は、樹脂に影響を及ぼさない方法で行うこと。
- ・薬液消毒を行う際は、薬剤の使用書に記載された方法で行うこと。
- ・薬剤によっては、樹脂に影響を及ぼすものもあるため注意すること。
- ・オートクレーブ滅菌不可。
- ・血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・洗浄後は、十分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800