

ローター 4

【禁忌・禁止】

1. 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 器具の形態変更や改造などはしない事。

*【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

下記の通り



本体



ハンドピース

〔付属品〕電源アダプター、フットペダル

【使用目的又は効果】

本品は歯科技工で用いる歯科技工用バー等の回転器具を接続するためのチャックを備えた 1 つのハンドピースからなる歯科用器具である。

*【使用方法】

使用前の準備

- 1) チャックを開きハンドピース先端にバーを差し込んだ後、チャックを締めてバーを固定させる。(カチッと音がするまで必ず締めること。)
- 2) ハンドピースをコントロールユニットに接続する。(図 1-⑤)
- 3) スピード調節ダイヤル(図 1-②)を最低速度に設定する。
- 4) 必ず電源スイッチ(図 1-④)がオフになっていることを確認した後、電源コードをソケットに差し込む。

フットペダルを使用しない場合

- 1) 電源スイッチ(図 1-④)をオンにする。
- 2) フット/ハンドスイッチ(図 2-⑥)を H にする。
- 3) 正逆回転選択スイッチ(図 1-③)を押し、回転方向を選択する。回転方向を変える場合はモーターを停止させること。
- 4) スピード調節ダイヤル(図 1-②)を希望の速度に設定する。
- 5) 試運転してバーに振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

フットペダルを使用する場合


- 1) フットペダルのコードを本体に差し込む。(図 2-⑦)
- 2) 電源スイッチ(図 1-④)をオンにする。
- 3) フット/ハンドスイッチ(図 2-⑥)を F にする。
- 4) 正逆回転選択スイッチ(図 1-③)を押し、回転方向を選択する。回転方向を帰る場合は、モーターを停止させること。
- 5) フットペダルを踏み込み、スピード調節ダイヤル(図 1-②)を回してスピード調整を行う。(最高回転数(35,000rpm))。試運転してバーに振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

《図 1》



- 図 1-① パイロットランプ
図 1-② スピード調節ダイヤル
図 1-③ 正逆回転選択スイッチ
図 1-④ 電源スイッチ
図 1-⑤ ハンドピース接続口

《図 2》

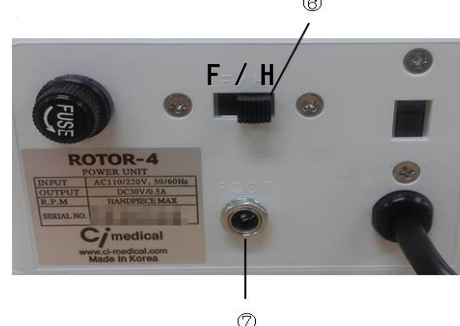

- 図 2-⑥ フット/ハンドスイッチ
図 2-⑦ フットペダル差込口

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
- ・ハンドピースを落としたりしないこと。万が一落としてしまった場合は、必ず使用前に再度、先端が曲がったり、過度の熱を帯びないか、テストすること。
- ・回転が確実にとまってから、終了すること。
- ・アダプターは専用のものを使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用前には必ず始業点検をすること。
- 2) 本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。
- 3) 歯科の従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 水のかからない場所に設置すること。
- 2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Saeyang Microtech Co., Ltd. (セーアン社)

製造国：大韓民国