

再使用禁止

トランスフォームトレー

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り


有歯顎用



上顎用



下顎用

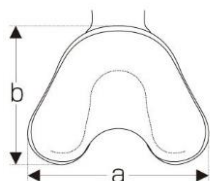

使用部位	サイズ	横幅 (a)	縦幅 (b)
上顎	S	66mm	49mm
	M	71mm	56mm
	L	79mm	60mm
下顎	S	66mm	50mm
	M	70mm	54mm
	L	74mm	60mm

無歯顎用



上顎



下顎

使用部位	サイズ	横幅 (a)	縦幅 (b)
上顎	S	65mm	49mm
	M	71mm	54mm
	L	76mm	59mm
下顎	S	64mm	53mm
	M	72mm	57mm
	L	76mm	60mm

2. 原材料
コーポリマー
3. 包装
12 個 / 袋

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
- 2) トレーを口腔内に合わせ、変形が必要な部位を特定する。
- 3) その部位を 70℃のお湯に約 20 秒間つける。
- 4) 素材が柔らかくなったら希望の形に変形させ、硬くなるまで約 10 秒間維持する。（冷やしたり、冷水につけたりすることも可能。）
- 5) 希望の形状になるまでこの作業を繰り返す。
- 6) 印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
- 7) 印象材の硬化後、トレーを口腔内から取り出し、歯科用石こうを用いて印象から模型を作製する。

【使用上の注意】

- 1) 小児、又は嘔吐しやすい患者は使用中に窒息する恐れがあるので、使用する際は十分に注意すること。
- 2) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 3) 本品の使用はディスポーザルとし、再使用を禁止する。
- 4) オートクレーブ滅菌不可。
- 5) 薬剤消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：ASTEK INNOVATIONS LIMITED

（アステック イノベーションズ リミテッド社）

製造国：イギリス