

ラボタービン 300W

【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 構成

コントロールユニット、ハンドピース、フットスイッチ、チューブコネクタ

3. 仕様

最高回転数・・・320,000 rpm
適正空気圧・・・2.5～3.0 bar

4. 包装

コントロールユニット、ハンドピース、
フットスイッチ、チューブコネクタ / 箱

【使用目的又は効果】


本品は歯科技工で用いる歯科技工用バー等の回転器具を接続するためのチャックを備えた1つのハンドピースからなる歯科技工用器具である。

【使用方法等】

〔使用方法〕



詳細については取扱説明書を参照すること。

- 1) ハンドピースチューブ①とハンドピース②を接続する。
- 2) コンプレッサのチューブをコントロールユニット側面の接続部に差し込む。(適合チューブ径：Φ6mm)

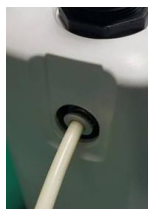


- 3) フットスイッチ③の青いラベルの付いたチューブを、コントロールユニット背部の“blue label”と表示された接続部に挿入する。もう一方のチューブを“no label”と表示された接続部に挿入する。
- 4) 空気圧調節ノブ④を引いて回し、圧力ゲージ⑤が 2.5～3.0bar を示すよう調節する。調節が完了したら、ノブを押してロックする。
- 5) 注水タンク⑥に水を注ぐ。
- 6) FG 用バーを平らな面に押し当て、ハンドピース先端に挿入する。
- 7) フットスイッチを踏み、操作を開始する。

- 8) 注水量を増やす場合は水量調節ノブ⑦を、チップエアア量を増やす場合は、チップエアア量調節ノブ⑧を反時計回りに回す。
- 9) ハンドルを下図のように回し、バーを取り外す。

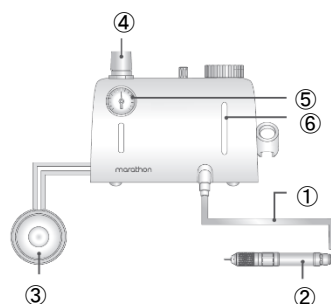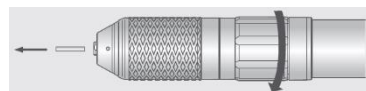

〔コントロールユニット上部〕

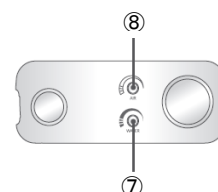

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 空気圧は 2.5～3.0bar で使用すること。
- ・ 無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
- ・ ハンドピースを落としたりしないこと。万が一落としてしまった場合は、必ず使用前に再度、先端が曲がったり、過度の熱を帯びたりしていないか、テストすること。
- ・ パーメーカーが指定する許容回転速度を守ること。
- ・ ハンドピース回転中はハンドルを回さないこと。
- ・ 必ずフットスイッチが停止の状態にあることを確認してから、電源を入れること。
- ・ 回転が確実にとまってから、終了すること。

【使用上の注意】

- 1) ハンドピースへは絶対に注油しないこと。
- 2) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 3) 切削時は防護眼鏡等を使用すること。
- 4) 使用前に予め回転させ、軸ブレ、振動、異音、発熱等がないか点検を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 水のかからない場所に設置すること。
- 2) 気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Saeyang Microtech Co., Ltd.
(セーヤン マイクロテック社)

製造国：大韓民国