


ボルテックス

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記のとおり

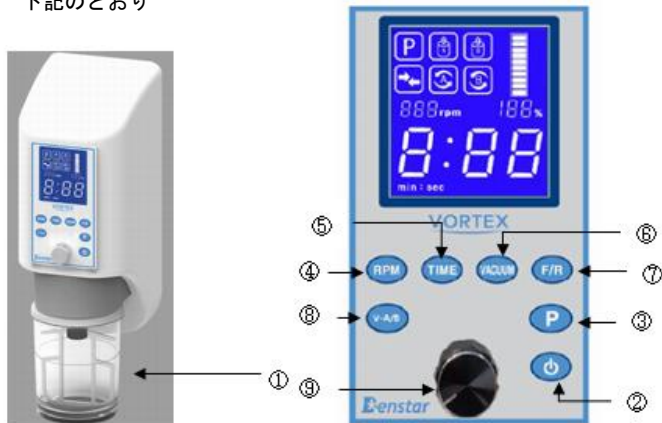

①	攪拌ボール	⑥	バキューム設定ボタン
②	電源オン/オフボタン	⑦	正/逆回転設定ボタン
③	プログラム設定/保存ボタン	⑧	プレバキューム/ホールドバキューム設定ボタン
④	回転数設定ボタン	⑨	メインダイヤル
⑤	時間設定ボタン		

- 仕様
電気定格
電源電圧: AC100~240V
周波数: 50/60Hz
回転速度: 100rpm~500rpm
真空度: 930mbar
- 包装
本体、攪拌ボール(大・小)、攪拌ハネ(大・小)、電源コード、アレンレンチ、ベースカバー、壁掛け用ブラケット
オプション: スタンド(別売り)

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用石膏、埋没材の練和または混和に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 電源コードを接続する。
- 電源オン/オフボタン②を押す。
- 攪拌ボール①(以下、ボール)に石膏または埋没材を入れ、メーカーの使用説明書に従い、水(液)を適量加える。
- 素材に合ったモードを設定する。モードの設定は、取扱説明書に従って行うこと。
- 材料の入ったボールにハネ付の蓋を取付け、本体に装着する。ボールに必ず手を添え、落下を防ぐこと。
- ボールを数秒間本体に装着すると、バキュームが作動する。バキュームが作動するまで、ボールに手を添えておくこと。バキュームが40%を超えると、メインモーターが作動する。
- 終了後、電源オン/オフボタン②を押し、オフにする。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用前には、必ず取扱説明書をよく読むこと。

- メインダイヤルを押し、バキュームが停止したことを確認後、必ずボールに手を添えてからボールを取外すこと。
- バキュームの値が充分でないと、攪拌ボールの落下につながるので注意すること。
- バキュームポンプやフィルターに練和物が入り、バキューム管が詰まる恐れがあるので、攪拌ボールの最大量を示すラインを超える練和物を入れないこと。
- バキュームキャスティング内には指を入れないこと。
- 攪拌ハネが回転しない際は、業者に問合せること。
- モーターに負荷がかかるので、長時間に及ぶ連続使用は控えること。

【使用上の注意】

- 水のかからない場所に設置すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- スイッチの接触状況、ダイヤル設定、メーター類等の点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
- 機器の以上の無いことを絶えず監視すること。
- 異常が発見された場合には、機器の作動を止める等、適切な措置を講ずること。
- 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
- 定められた手順に従って操作すること。
- コード類の取り外しの際は、引き抜くなど無理な力をかけないこと。
- 機器は次回の使用に支障の無いよう必ず清浄にしておくこと。
- 故障した際は、修理は専門家に任せること。
- 機器及び部品は、必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する際は、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【保管方法及び有効期間】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Denstar Co., Ltd.
(デンスター 社)
製造国: 大韓民国