

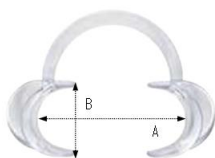
BND リトラクター

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

以下の通り

【オーラルリトラクター】

形状	タイプ	サイズ (mm)
	オーラル L	A : 94.8 B : 46.5
	オーラル M	A : 79.4 B : 40
	オーラル S	A : 67.7 B : 34.1

【リップリトラクター】

形状	タイプ	サイズ (mm)
	チャイルド	112.5
	アダルト	118.8

【チークリトラクター】

形状	タイプ	サイズ (mm)
	チーク	109.1

【前歯部用リトラクター】

形状	タイプ	サイズ (mm)
	前歯部用	76.9

2. 原材料

ポリカーボネート

3. 包装

各 1 個 / 包

各 2 個 / 包（前歯部用のみ）

【使用目的又は効果】

本品を口角に引掛け、患者の口腔内の視野を確保する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みか確認する。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 121℃以下厳守。）
- 2) 開口した患者の口腔内に挿入し、視野を保持する。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行わないこと。
- 3) 洗浄・消毒について

【洗浄】

- ・使用後は歯科用洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

【滅菌】

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ滅菌可、乾燥工程を含む 121℃以下厳守】

※乾燥工程に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ・薬液消毒を行う際は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、本品素材に影響を及ぼすことがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、シミ等の原因となる事がある。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 3) 紫外線保管庫での保管は避けること。（本品を劣化させる恐れがある。）

【保守・点検に係る事項】

使用前、使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Hangzhou Zhengxing Medical Apparatus Co., Ltd.

（ハンゾウ ジェンシング メディカル アパラス社）

製造国：中華人民共和国