

再使用禁止

ルアーロックディスポシリンジ

1mL ホワイト、1.2mL、3mL、6mL 100 本 / 包

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
4. この製品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【形状、構造及び原理等】


1. 形状・構造
下記の通り



1mL クリア

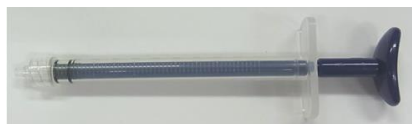

1mL ブルー

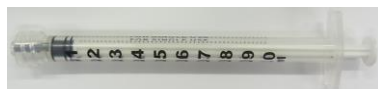

1mL ホワイト



1.2mL



3mL



6mL

2. 原材料

シリンジ、プランジャー：ポリプロピレン
プランジャー先端部：ニトリルブタジエンラバー
(1mL クリア、1mL ブルー)
天然ゴム
(1mL ホワイト、1.2mL、3mL、6mL)

3. 包装

1mL クリア、1mL ブルー 50 本 / 包

【使用目的又は効果】

適用する液体を噴出する手動式シリンジで、衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) プランジャーを押し、外筒内部から空気を完全に押し出す。
- 2) 別売の先端チップを外筒に確実に接合する。
- 3) プランジャーを引き、適用する液体を吸引する。
- 4) プランジャーを押し、適用部位に液体を排出させる。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 別売の先端チップを使用する際は、接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。過度な締め付けはしないこと。
- 2) 接合部に適用する液体等を付着させないこと。(接合部の緩み等を引き起こす可能性がある)
- 3) 内部に空気が入らないように注意して適用する液体を吸引し、軽くプランジャーを押し、液体の排出を確認してから使用すること。
- 4) 使用中は、強い圧が加わらないよう、ゆっくりプランジャーを押し、液体を排出させること。
- 5) 樹脂溶解性の強い有機溶剤（クロロホルム等）の使用は避けること。

【使用上の注意】

- 1) 包装が破損しているものや汚れているもの、製品に破損等異常が認められるものは使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) アルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃してから使用すること。
- 4) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び液体の漏れ等について、定期的に確認すること。
- 5) 適用する液体等を誤って漏出させ、適用部以外に付着させたり、目に入れないように注意すること。
- 6) オートクレーブ滅菌不可。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。（本品が劣化する恐れがあるため。）
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に関わる事項】

使用前に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないことを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800