


アルジネートシリンジ

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
[分解図]

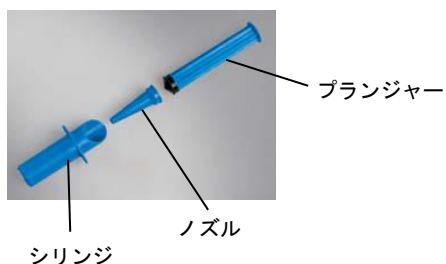

[組立図]



最大容量：15ml

2. 原材料
ノズル・シリンジ・プランジャー：ポリスルホン
プランジャー先端部：エチレンプロピレンエングム
3. 包装
1 本/包

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内に歯科用印象材料を注入するために用いる。

【使用方法等】

使用前の準備

- 1) ノズルをシリンジの傾斜した開口部より挿入する。
- 2) 固定タブの位置まで挿入した後、ノズルを時計回りに回転させ、ロックする。

使用方法

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかどうかを確認する。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程も含む 134℃以下厳守）
- 2) 練和したアルジネートをシリンジに充填し、アルジネートがノズルの先端に届くまで、プランジャーをシリンジ内に挿入する。
- 3) 適量のアルジネートを口腔内の患部に直接注入し、印象トレーを接着する。

【使用上の注意】

- 1) 器具の落下等、取り扱いの不注意は破損の原因になるので取り扱いに注意すること。
- 2) 使用後は分解し、残ったアルジネート素材はぬるま湯で歯ブラシなどを使用して洗浄すること。
- 3) 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- 4) 使用後は、速やかに残ったアルジネート素材と器具に付着した、血液、体液、組織片を除去し、感染防止の為に洗浄・消毒すること。その際、確実に、残ったアルジネート素材や血液、体液、組織片等が除去できたか、結合部や複雑な箇所を目視をし、残留物の付着がない事を確認すること。
- 5) 洗浄液、消毒剤、滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。また、洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。
- 6) オートクレーブ滅菌の滅菌温度は、乾燥工程も含む 134℃以下とする。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前に各部品に異常がないことを確認してから使用を開始すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Astek Innovations Ltd.

（アステックイノベーション社）

製造国：イギリス