


機械器具（65）歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用注入器具 JMDN コード：70718000

## アルジネートシリンジ

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造 [分解図]

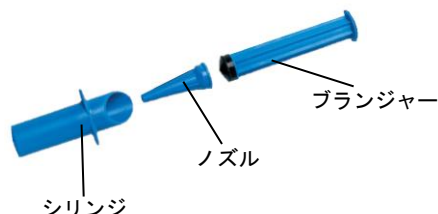

#### [組立図]



最大容量：15ml

#### 2. 原材料

ノズル・シリンジ・プランジャー：ポリスルホン  
プランジャー先端部：エチレンプロピレンエングム

#### 3. 包装

1 本/包

### 【使用目的又は効果】

本品は、口腔内に歯科用印象材料を注入するために用いる。

### 【使用方法等】

#### [使用前の準備]

1. ノズルをシリンジの傾斜した開口部より挿入する。
2. 固定タブの位置まで挿入した後、ノズルを時計回りに回転させ、ロックする。

#### [使用方法]

1. 使用前に本品が滅菌済みかどうかを確認する。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程も含む 134℃以下厳守)
2. 練和したアルジネートをシリンジに充填し、アルジネートがノズルの先端に届くまで、プランジャーをシリンジ内に挿入する。
3. 適量のアルジネートを口腔内の患部に直接注入し、印象トレイを接着する。

### \*【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄、滅菌を行うこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。

#### 2. 洗浄、滅菌について

##### [洗浄]

使用後は速やかに残ったアルジネート素材と、器具に付着した血液、体液、組織片を除去すること。残ったアルジネート素材はぬるま湯で歯ブラシなどを使用して洗浄すること。その際、結合部や複雑な箇所に残留物がいないことを確認すること。

※洗浄後は腐食防止のため、直ちに乾燥すること。

##### [滅菌]

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程含む 134℃以下厳守】

##### [その他]

- ・洗浄、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- ・洗浄、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800