

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ JMDN コード：38759000

再使用禁止（先端チップ）


マイクロサクション

【禁忌・禁止】

- 1) 先端チップは再使用禁止。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

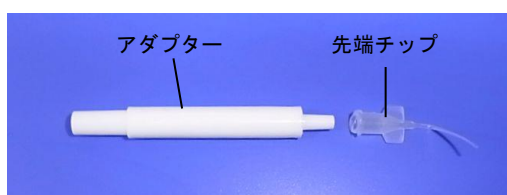

先端チップ全長：45mm
アダプター全長：75mm

2. 原材料

アダプター：ポリプロピレン
先端チップ：ポリプロピレン

3. 包装

アダプター5 本（付属品：先端チップ 100 個） / 包

【使用目的又は効果】

本品は非電動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること（アダプターはオートクレーブ滅菌可。オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 121℃厳守。先端チップはオートクレーブ滅菌不可）。
- 2) アダプターに先端チップをセットする。
- 3) アダプターのもう一方を非電動型吸引装置（別売）のチューブ先に装着し、吸引を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 洗浄・滅菌上の注意

[洗浄]

- ・使用後は歯科用洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

[滅菌]

- ・アダプターはオートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 121℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、変色の原因となることがある。
- 4) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
 - 5) 使用中に抜けないように、吸引装置にしっかりと差し込むこと。
 - 6) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd.
（セイルグローバル社）

製造国：大韓民国