

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN コード：16195000
（歯科用マトリックスリテイナ JMDN コード：33204000）

再使用禁止

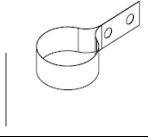
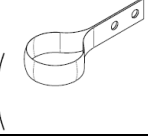
プロマトリックス

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

バンド タイプ	マトリックス バンドの形状	全体図
ストレート		
カーブ		
全長	67mm	
バンドの幅	6mm	

2. 原材料
ステンレススチール
ポリプロピレン
3. 包装
50 個 / 箱

【使用目的又は効果】

修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。
マトリックスリテイナ（本品を歯の周囲にぴったりと引き付ける
ことができる器具）により所定の位置に取り付ける。

【使用方法等】

- 1) 歯の周囲にバンドがより密着するよう、歯牙にセットする。
- 2) バンドを歯に装着し、ハンドルを時計回りに回してバンドを締め
める。
- 3) 充填終了後、ハンドルを反時計回りに回してバンドを緩め、取
り外す。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティ
ングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属である
が、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
- 4) 本品は Disposable 製品であり、再使用はしないこと。
- 5) 歯牙ないし、歯列の形態により、装着できない場合は無理に使用
しないこと。
- 6) バンドを締めすぎないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管する
こと。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆び
ている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食
等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：ASTEK INNOVATIONS LIMITED
（アステック イノベーションズ リミテッド社）
製造国：イギリス