

ダイヤモンドストリップス ED


【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

1) 穴ありタイプ

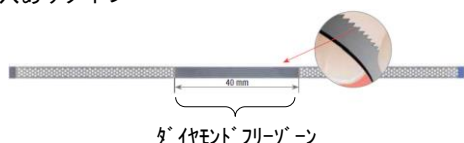

型番	カラー	タイプ	粒子	厚さ	幅
PXDS3	ブルー	ミディアム	45μm	0.13mm	3.75mm
PFXDS3	レッド	ファイン	30μm	0.10mm	
PCXDS3	イエロー	スーパーファイン	15μm	0.08mm	

2) プレーンタイプ



型番	カラー	タイプ	粒子	厚さ	幅
DS2	ブルー	ミディアム	45μm	0.13mm	2.5mm
FDS2	レッド	ファイン	30μm	0.10mm	
CDS2	イエロー	スーパーファイン	15μm	0.08mm	

3) ワイドタイプ



型番	カラー	タイプ	粒子	厚さ	幅
DS6	ブルー	ミディアム	45μm	0.13mm	6.0mm
FDS6	レッド	ファイン	30μm	0.10mm	
CDS6	イエロー	スーパーファイン	15μm	0.08mm	

2. 原材料

ステンレススチール、天然ダイヤモンド粒子

3. 包装

穴あり、プレーンタイプ：10 個 / ケース
ワイドタイプ：5 個 / ケース

【使用目的又は効果】

本品は、研削粒子が片面にコーティングされた歯科用ストリップで、歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用前に本品が滅菌済みであるか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。)
- 2) 用途に応じて適切な本品を選択する。
- 3) 本品の研削部を歯間に挿入し、コンタクト修正、セメント除去、仕上げ研磨を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具にして、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 5) 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※超音波洗浄を行う時は他のインスツルメントと一緒に洗浄しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[滅菌]

- ・オートクレーブ滅菌可。【オートクレーブ温度は乾燥工程を含む 134℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に従って使用すること。薬剤の種類によっては金属素材・ダイヤモンドコーティングに影響を及ぼすことがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前後は、破損、ヒビ、キズや大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Edenta Etablissement
(エデンタ エタプリスマン OR 社)
製造国：リヒテンシュタイン