


イーバイト 3S ブルーライト

【禁忌・禁止】

1. 光に対して過敏性反応を起こしたことのある人、あるいは光感作性のある薬を服用している人には使用しないこと。
2. 目を損傷する恐れがあるので、光源を直視しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

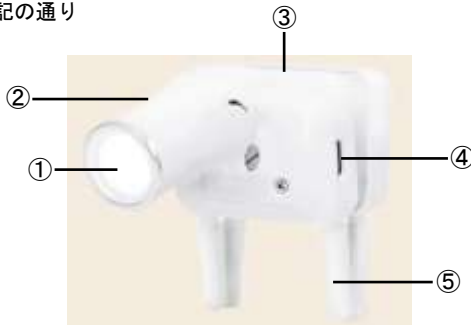

①	ヘッドライト
②	光量調節ボタン
③	電源ボタン 充電残量表示
④	外部コネクタジャック
⑤	取付け部

2. 仕様

寸法	41 mm×70 mm×54 mm	
重量	41g	
電圧	AC 100～240V	
周波数	50/60Hz	
光源	LED	
照度	弱	1,300Lx
	中	1,700Lx
	強	2,000Lx

3. 包装

セット / 箱

付属品：メガネストラップ、充電アダプター、USB コード

【使用目的又は効果】

本品は双眼ルーペ等のフレームに取付け、手術、診断、治療中に視野を直接照明するものである。

【使用方法等】

〔使用前の準備〕

- ・取扱説明書をよく読むこと。
- ・初めて使用する場合は、使用前に最低 1 時間の充電を行うこと。

〔使用方法〕

- 1) 本体を双眼ルーペまたは眼鏡のフレーム部に取り付ける。
- 2) 電源ボタンを押し、ヘッドランプを点灯させる。
- 3) ヘッドランプの角度を調整する。
- 4) 照度調整ボタンを長押しし、明るさの調整を行う。
- 5) 使用後、電源ボタンを押し消灯する。

※作業環境温度：0℃～35℃

【使用上の注意】

1. 目を損傷させる恐れがあるので、光源を直視しないこと。
2. 光に対して過敏性反応を起こしたことのある人、あるいは光感作性のある薬を服用している人には使用しないこと。
3. 直射日光、火気またはストーブの近くなど、高温になる場所での使用や放置はしないこと。
4. 水のかかるような場所に置かないこと。
5. バッテリーからの液漏れ、本体の部分的な変色、変形などの異常がみられる場合は使用を中止すること。
6. 本品の改造はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 水のかからない場所で保管すること。
 - 2) 気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所で保管すること。
- ※保管環境温度：-20℃～50℃

【保守・点検に係る事項】

- 1) 必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常に、かつ安全に作動することを確認すること。
- 3) 故障した場合は、直ちに製造販売元若しくは販売元へ連絡を行い修理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DENTOZONE CORPORATION

（デントゾーン コーポレーション）

製造国：大韓民国