


ダイヤル式トルクドライバー

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

1) ハンドドライバー

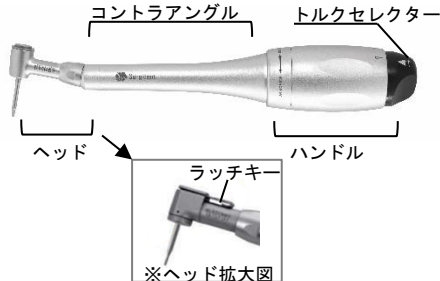

2) スクリュードライバー（ショート及びロング）



2. 原材料

ハンドドライバー：ステンレス鋼、アルミニウム
スクリュードライバー：ステンレス鋼

3. 包装

1 セット / 包

セット内容：

- ・ハンドドライバー 1 本
- ・スクリュードライバー（1.2-S、1.2-L）各 1 本

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前に必ず適切な滅菌を行うこと。ハンドドライバーヘッド、スクリュードライバーのみオートクレーブ滅菌可。滅菌条件は 132℃で 15 分、又は 121℃で 30 分。
2. ラッチキーを押し上げ使用するスクリュードライバーを装着し、ラッチキーを下げて固定する。スクリュードライバーを引っ張り、確実に固定されていることを確認する。
3. トルクセレクトターにより希望するトルク値に設定する。
4. 片手で本品を把持し、ハンドルを回す。設定したトルク値が得られるとカチッと音がする。

【使用方法に関する重要な基本的注意事項】

1. 使用する前に、設定したトルク値が術式にあっているものであるか確認すること。
2. 本品は未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前には必ず洗浄・滅菌すること。
3. 本品を使用している際には、常に患者の全身のおよび口腔内の状態を観察し、異常が認められた場合、直ちに使用をやめ、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。
4. 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。

【使用上の注意】

1. 他社製品と組み合わせて使用しないこと。
2. 使用前に必ず適切な洗浄を行い、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
3. 器具に対して、形状変更、打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるため、絶対に行わないこと。
4. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
5. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に、各構成品が接続されているか確認すること。
2. 注油は使用毎に滅菌に先立って行うこと。
3. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
4. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるため使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【スクリュードライバー・ハンドドライバーヘッドのみオートクレーブ可。132℃で 15 分もしくは 121℃で 30 分】

・本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SURGIDENT CO., LTD（サージデント社）

製造国：大韓民国