


ダイヤル式トルクドライバー

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

1) ハンドドライバー

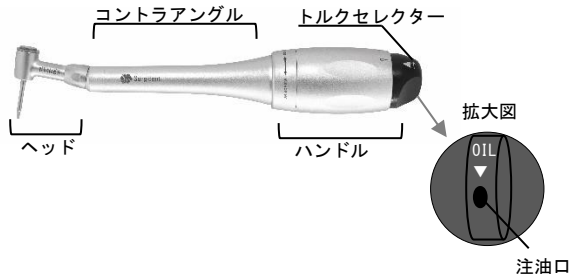

2) スクリュードライバー（ショート及びロング）



2. 原材料

ハンドドライバー：ステンレス鋼、アルミニウム
スクリュードライバー：ステンレス鋼

3. 包装

1 セット / 包

セット内容：

- ・ハンドドライバー 1 本
- ・スクリュードライバー（1.2-S、1.2-L）各 1 本

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる。

*【使用方法等】

1. 本品は未滅菌の為、使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って洗浄、注油、滅菌を行うこと。ハンドドライバーヘッド部、ならびにスクリュードライバーのみオートクレーブ滅菌可。
2. ヘッドにスクリュードライバーをゆるみのないよう取り付け。
3. トルクセレクターにより希望するトルク値を設定する。
4. 片手で本品を把持し、ハンドルを回す。設定したトルク値が得られるとカチッと音がする。
5. 使用後は【清掃・洗浄・注油・滅菌】に従って洗浄、滅菌を行う。

【使用方法に関する重要な基本的注意事項】

1. 使用前に、各構成品が接続されているか確認すること。
2. 使用する前に、設定したトルク値が術式にあっているものであるか確認すること。
3. 本品を使用している際には、常に患者の全身のおよび口腔内の状態を観察し、異常が認められた場合、直ちに使用をやめ、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。
4. 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。

*【使用上の注意】

1. 他社製品と組み合わせて使用しないこと。
2. 毎使用毎に必ず滅菌を行うこと。
3. 器具に対して、形状変更、打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるため、絶対に行わないこと。
4. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
5. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 使用前に毎回点検を行い、正しく機能することを確認すること。

【清掃・洗浄・注油・滅菌】

1. ヘッド

- 1) 治療毎に、表面に付着する汚れをブラシ（金属製は不可）等で落とし、消毒用アルコールを含ませた綿等で拭き取る。
- 2) トルクセレクターにある注油口から注油する。
- 3) 下記の滅菌条件で滅菌を行う。

オートクレーブ 滅菌	温度	時間
	121℃	30 分
	132℃	15 分

2. コントラアングル、ハンドル

- 1) 治療毎に、表面に付着する汚れを取る。
- 2) 消毒用アルコールを含ませた綿等で表面を清拭する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SURGIDENT CO., LTD（サージデント社）

製造国：大韓民国