


機械器具（50）開創又は開孔用器具
一般医療機器 歯科用開口器 JMDN コード：70949000
（一般医療機器 再使用可能な歯科用吸引カニューレ JMDN コード：38759000）


セフティサクションキット

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

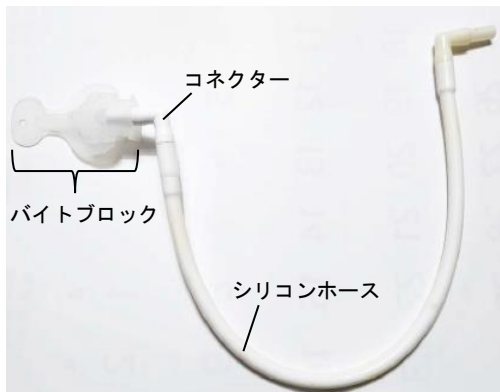

【バイトブロック】

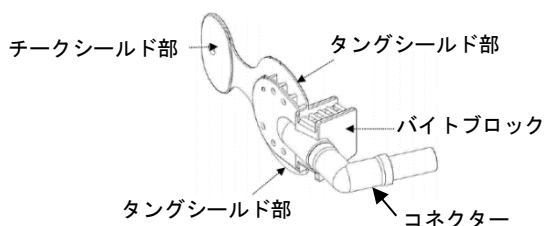

2. 原材料

バイトブロック：シリコン
コネクター：ポリカーボネート
シリコンホース：シリコン、
ポリアセタール樹脂、ポリエチレン（接続部）

3. 包装

1 セット / 箱

セット内容：バイトブロック（S サイズ、M サイズ）各 5 個、
コネクター 10 個、シリコンホース、
クリーニングブラシ

【使用目的又は効果】

歯科治療で患者の開口状態を保持する。また、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 使用前に、適切な洗浄・滅菌を行うこと。
（バイトブロックとコネクターはオートクレーブ滅菌可、135℃で 15 分。シリコンホースは薬液滅菌のみ。）
- 患者の開口状態に応じたバイトブロックを選択する。
- バイトブロックとコネクターが確実に接続されていることを確認する。
- コネクターとシリコンホースを接続してからシリコンホースを歯科用吸引装置に接続する。
- チークシールド部を折り畳みバイトブロックを歯列に沿って挿入し、臼歯部で噛ませ固定する。
- チークシールドを反対側の頬側に沿ってセットし、タングシールドにより舌が圧排されていることを確認する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 患者の喉に触れる場合は、必要に応じて、バイトブロックのタングシールド部の一部をハサミ等でカットして調整すること。

【使用上の注意】

- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 使用前は、必ず劣化や異常が無いか確認すること。これらが見られた場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- 使用後は、適切な洗浄を行い、機器に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- 洗浄には洗浄方法に適した洗剤を使用し、適正な濃度で使用する。
- 洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

- バイトブロックとコネクターは、オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 135℃で 15 分。】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
- シリコンホースは薬液滅菌を行うこと。

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800