

再使用禁止


トランスフォームエジェクター

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

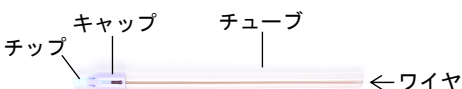

2. 原材料

|               |             |
|---------------|-------------|
| チップ、キャップ、チューブ | ポリ塩化ビニル     |
| ワイヤ           | 鋼線(銅コーティング) |

3. 包装

50 本 / 包

【使用目的又は効果】

口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 吸引する部位の広さに応じて、下図①・②の形状に調整する。  
②については、先端に歯科用洗浄針(一般的名称:洗浄針、JMDNコード: 7045900)を接続することにより、根管等の洗浄に用いることもできる。



- 使用目的に応じて、チューブを曲げる。
- チューブを歯科用吸引器具に接続し、吸引を行う。

【併用機器】

洗浄針: 刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる器具をいう。  
(一般的名称: 洗浄針 JMDN コード: 70459000)

【使用方法に関する使用上の注意等】

- 歯科用洗浄針を接続する際は、本品の寸法に適合するものを使用すること。
- キャップを上下させる際は過度な力をかけないこと。

【使用上の注意】

- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 廃棄の際は、感染防止に留意し関連法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Iges Inc. (アイゼス社)  
製造国: 大韓民国