

医療器具（71）視力補正用眼鏡

一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000

老眼鏡A27

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組とプラスチック眼鏡フレームからなる器具。
- 眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組と金属眼鏡フレームからなる器具。
- プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 +1.00から +0.50毎 +4.50まで8度数。


種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	プラスチック	BK	+1.00
	メタル	BR	+1.50
		WIN	+2.00
		DEMI	+2.50
		PUR	+3.00
		GUN	+3.50
		SIL	+4.00
		GOL	+4.50
	2種	8種	8種

【形状 構造】

プラスチック枠



メタル枠

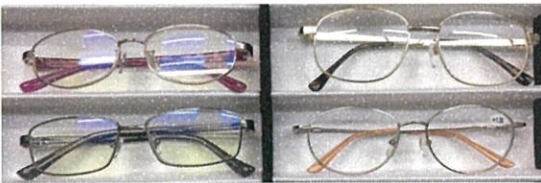

AN-001

プラスチック枠



AN-002

プラスチック枠



AN-003

プラスチック枠



【動作原理】

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、 度数の外観検査
(検眼器、社内基準書に基づく)

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

福井県 福井市 文京6-21-5

18BZ200051

販売元 株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷2-3-14

☎0776-21-4472

18B3X00004

外国製造業者 WenZhou JiaGuang Optical Co.,Ltd

外国製造業者登録番号 BG10501326

Wezhou Yijiang Optical Co.,Ltd

外国製造業者登録番号 BG10501327