

内視鏡用送水タンク NT-200

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


- ・フィルターNF-1を送水チューブに取付けて使用すること。
[フィルターを使用せずに使用すると、体内に異物が混入し生体が損傷する恐れがある。]
- ・滅菌水以外の貯水を行わないこと。
[生体損傷の原因となる恐れがある。]
- ・送水開始時は、内視鏡送水装置の送水量設定を最小にし、患者の状態や必要な洗浄に合う程度まで徐々に引き上げること。
[生体損傷の原因となるおそれがある。]

形状・構造及び原理等

1.構成ユニット

- ・内視鏡用送水タンク NT-200 1個
- ・フィルター NF-1 1個

2.各部の名称

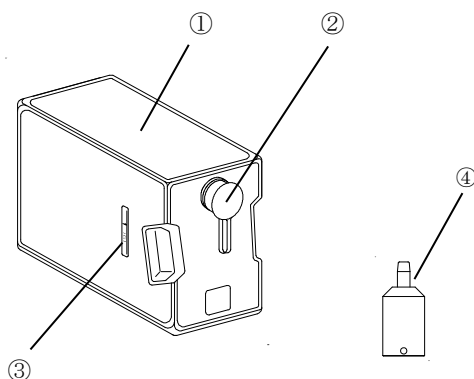

- ①送水タンク（材質：ポリプロピレン）
- ②キャップ（材質：シリコンゴム）
- ③水量ラベル
- ④フィルター NF-1（材質：SUS304）

3.仕様

寸法：83(W)×166(H)×229(D)mm
質量：240 g
タンク容量：約2ℓ
フィルター寸法：φ20mm×45mm

＜作動・動作原理＞

本品は、当社指定の内視鏡用送水装置に接続して、体腔内に送水するための貯水タンクである。

【使用目的又は効果】

本品は、当社指定の内視鏡用送水装置と組み合わせて、体腔内に送水するために貯水することを目的とする。

【使用方法等】

詳細な使用方法是、取扱説明書を参照すること。

＜使用方法＞

1.機材の準備

本品、内視鏡送水装置、送水タンク及び内視鏡、吸引器等内視鏡検査に必要な周辺機器を準備する。

2.使用前の点検

- ①本品が滅菌されていることを確認する。
- ②本品の外装に変形、破損がないことを確認する。
- ③フィルター NF-1に錆びや綿ごみ等が付着していないことを確認する。

3.内視鏡送水装置へのセット

- ①滅菌水を水量ラベルまで2ℓ入れる。
- ②内視鏡送水装置のタンクホルダへ本品をセットする。
- ③送水チューブにフィルターNF-1を取り付ける。
- ④送水チューブに取り付けられたフィルターNF-1を送水タンクの中へ入れる。

4.使用後

- ①本品を内視鏡用送水装置から取り外す。
- ②本品を洗浄する。
- ③本品を滅菌し保管する。

**＜組み合わせて使用する医療機器＞

- ・販売名：内視鏡送水装置 NP-125
認証番号：301AFBZX00028000
- ・販売名：送水チューブ NT-260
届出番号：19B2X10001000056
- ・販売名：送水チューブ NT-265
届出番号：19B2X10001000063

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・取扱説明書を参照し使用前点検を行い、点検の結果、異常があったものは使用しないこと。
- ・滅菌水は、水量ラベルを超えて入れ過ぎないこと。設置時にこぼれるおそれがある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・滅菌水のみを使用すること。滅菌水以外を使用すると、細菌が繁殖したり、管路が詰まったりするおそれがある。
- ・本品は、必ず内視鏡送水装置のタンクホルダへ設置すること。
- ・本品を廃棄する場合は、地域の法規制に従って廃棄すること。感染症廃棄物に該当するかについては、使用状態により判断すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品及びフィルターはあらかじめ滅菌されていません。使用前に、洗浄、滅菌を行うこと。

【不具合・有害事象】

＜不具合＞

- ・水漏れ ・破損

＜有害事象＞

- ・感染

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、常温、常湿で直射日光が当たらない清潔な場所に保管する。

〈有効期間〉

本品は、消耗品（修理不可能）である。滅菌20回後の使用の後もしくは、使用前点検の結果に異常がある場合は新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄・滅菌に関する注意〉

症例毎に洗浄、滅菌を行うこと。

- ・指定以外の洗浄・滅菌を行わないでください。機器が故障する恐れがあります。
- ・滅菌は、オートクレーブ滅菌にて適切に行ってください。他の方式での滅菌は、本品の故障の原因になるので行わないで下さい。
- ・本品の洗浄は必ず1回の使用終了後毎に直ちに実施すること。付着した粘液、血液等が凝固・固着すると洗浄・滅菌効果が低下するばかりか故障の原因となるので、十分洗浄を行い、水切りを完全にしてから滅菌してください。

〈洗浄方法〉

- 1)使用後、本品の外側に付着した汚れをガーゼまたはペーパータオルで拭き取る。
- 2)本品が入る容器を用意し、本品を洗剤に浸漬し、柔らかいスポンジ等で洗浄する。
- 3)清浄水で洗剤を十分に洗い流す。
- 4)付着した水分を柔らかい布等で十分に拭き取り乾燥させる。

〈滅菌方法及び滅菌条件〉

オートクレーブ滅菌

缶内温度：121℃

作用時間：20分

滅菌回数：20回（自社基準による）

〈使用者による保守点検事項〉

洗浄・滅菌

洗浄・滅菌は『取扱説明書』を参照して行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ニスコ株式会社

電話: 055-241-7534

販売業者（問い合わせ先）：

ニスコ株式会社

* 大阪営業所

〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津 4-14-26

電話：06-4301-8157

FAX ：06-4301-8133

取扱説明書を必ずご参照ください。