

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
* 管理医療機器 短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル 70232000
(一時的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル 70231000)

ニプロ胃管カテーテル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

○再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

本品は胃液検査、胃洗浄及び吸引、薬液の注入、術後の胃腸内容物の排除等の目的で用いる。

各部の名称

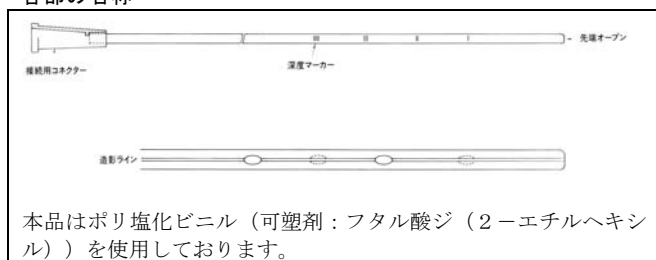

品種

外径	カテーテル長(mm)	マーカ位置(cm)	平行部径(mm)
10Fr	1000	30、40、50、60	2.2×3.3
12Fr	1200	45、55、65、75	2.7×4.0
14Fr	1200	45、55、65、75	3.2×4.7
16Fr	1200	45、55、65、75	3.7×5.3
18Fr	1200	45、55、65、75	4.2×6.0

【使用目的、効能又は効果】

滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

本品は1回限りの使い捨て、再使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- 患者がせきをするときは、カテーテルが気管に入った可能性があるため、このような場合はカテーテルを一旦抜いてから、患者が落ち着くのを待って、もう一度挿入し直すこと。
- カテーテル挿入に抵抗がある場合は、カテーテルを抜いて、原因を解消した後、もう一度挿入し直すこと。
- 気管内装置が装着されている場合は、カテーテルが気管内に入りやすくなるため、注意すること。
- 挿入中又は意識のない患者、咬咽反応のない患者、衰弱した患者など高リスクの患者の場合はX線下による確認により挿入すること。

*○脂溶性の栄養剤・医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する恐れがあるので注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管のこと。

2. 有効期間・使用の期限

使用期限は個包装に記載（自己認証による）。

【包装】

50本／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331(代表)

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED.]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社