

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000

ニプロディスポーザブルサイドポート針

再使用禁止

【禁忌・禁止】


○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、眼科手術の術中において、灌流水、薬液及び空気を前房/硝子体腔へ注入するノズルであり、あるいは前房/硝子体腔の液体及び気体を吸引する場合と虹彩フックとして使用する場合があります。術中以外では涙道の洗浄や造影剤の注入等に使用される。

本品の針管は、先端が閉塞しており、サイドにポートが設けられている。

《形状図》

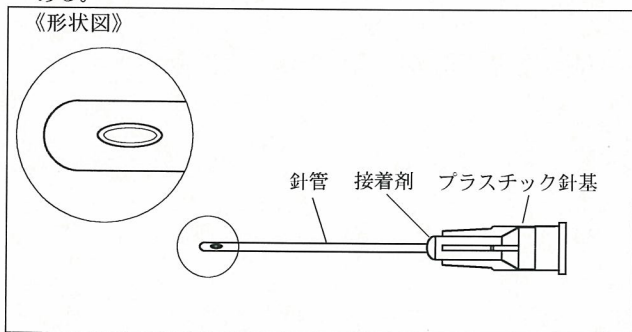

【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【品目仕様等】

- ・針管を8度曲げて1分間保った後放して目視したとき、針管はもとの位置に復する。
- ・針管を5mmの曲率半径で90度曲げたとき、折れない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を包装内から取り出します。
2. 本品をシリンジにしっかり付けます。
3. プロテクターをまっすぐ引いて外し、使用します。

＜注意＞

一般注射針と混同しないで刃先の確認を行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

10～300本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話：06-6372-2331（代表）

製造：

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）：

有限会社 イヌイ
埼玉県さいたま市佐知川228-103
電話：048-624-4168



ニプロ株式会社