

ニプロ酸素カニューラ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

○再使用禁止

* 【形状・構造及び原理等】

本品は固定方式の経鼻酸素呼吸用のカニューラであって、本体（2本の通気チューブとステーター）、鼻腔部及び酸素ボンベ又は他の接続管への接続用のコネクター等からなる。

各部の名称

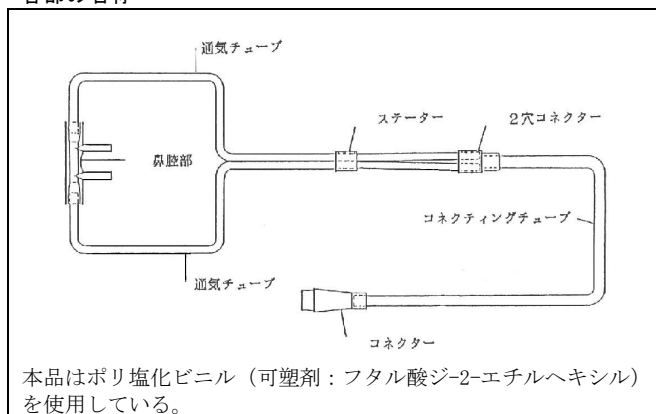

【操作方法又は使用方法等】

1. 湿潤器の酸素吹き出し口にカニューラを接続し指示量の酸素を流出させます。
2. カニューラの破損がなく、先端から確実に酸素が流出していることを確認したら、患者に装着します。
3. チューブを耳介に掛けて固定します。外れやすいので必要時には頬部にテープで固定して下さい。
4. 鼻腔部を鼻腔内に挿入して酸素吸入を行います。

* <使用方法に関連する使用上の注意>

1. 他の医療機器と併用する場合は、確実に接続又は取り付けられていることを確認し使用して下さい。
2. 接続部への薬液等の付着に注意して下さい。[接続部の緩み等が生じる可能性があります。]
3. 鼻腔部挿入時は鼻腔粘膜への損傷に十分注意して下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- * ○併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
- * ○本品は脂溶性溶剤存在下で塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する可能性がある。
 - 湿潤器内の水位が高すぎてカニューラ内に精製水が流入した場合や長時間同一カニューラを使用したためにカニューラ内腔に水滴が発生した場合には酸素吸入量が不確実になるため、カニューラを速やかに交換すること。
- * ○あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み及び詰まり等について、十分注意すること。

- * ○チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- * ○チューブを鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。
[破損が発生する可能性がある。]
- * ○チューブとコネクター等の接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷を加えないよう注意すること。
[チューブの抜け、破損、伸び等が生じる可能性がある。]
- * ○コネクターを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。
[コネクターが外れなくなる又は、コネクターが破損する可能性がある。]
- * ○体動でねじれると流路が閉塞する可能性があるので注意すること。
- * ○通気部を汚染させないこと。
- * ○使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
○包装を開封したら直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管のこと。

2. 有効期間・使用の期限

使用期限は外箱に記載（自己認証による）。

【包装】

50本／箱

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED.]

中華人民共和国

[People's Republic Of China]



ニプロ株式会社