

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000

ニプロディスポーザブル球後麻醉針

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリンジ又は医薬品容器等に接続して、麻醉薬を眼球後部又は眼球側部へ注入するために使用される針であり、針管及び針基から構成される。本品は滅菌済みであり、単回使用である。

本品の針管には真針又は曲針のものがある。

本品の針管はプロテクタ又はチューブにより保護されている。

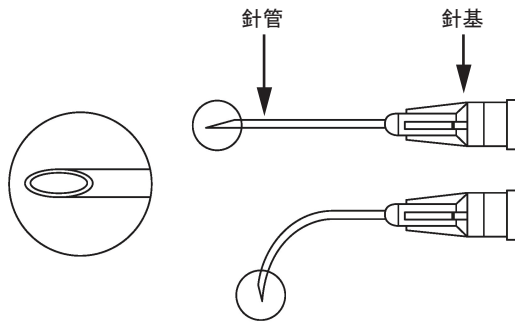

針管原材料：ステンレス鋼（SUS304）

針基原材料：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

眼球後部、眼球側部への麻醉薬注入に用いること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品をシリンジ又は医薬品容器等にしっかりと取り付けます。
3. プロテクタ（又はチューブ）を外します。真針の場合はまっすぐ引き、曲針の場合は曲型に沿うように引いて外します。
4. 本品を眼科領域に穿刺し、目的とする麻醉薬注入部位まで導入します。
5. 麻醉薬を注入し、本品を抜去します。
6. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 包装を開封する際には誤刺に注意してください。
2. 本品の針管には直接手を触れないよう注意してください。
3. 針管に過剰な負担をかけたり、包装を開封する際やプロテクタを外す際に針先が触れないよう注意してください。
[針先が変形し、注入がしづらくなるおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 針基は合成樹脂製品のため、低温時の取扱いには注意すること。[製品が破損するおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

- 1) 液漏れ
- 2) 誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装に記載の使用期限を参照のこと。（自己認証による。）

有効期間：滅菌後5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問合わせ先）

有限会社 イヌイ

電話番号：048-624-4168



ニプロ株式会社