

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
 高度管理医療機器 大動脈カニューレ 35565100  
 (冠状静脈洞カニューレ 36109100)

## 体外循環用カニューレ フレックスメイト

[レトロフレックス (セルフタイプ・ハードスタイルット) RUKN-H]

### 再使用禁止

#### 【警告】

- ・心筋保護液注入中は心室ペント及び大動脈ペントを必ず行うこと。[心室又は血管に過剰な陽圧がかかり、組織に損傷を及ぼす可能性があります。]
- ・冠状静脈洞内でバルーンを膨張させたまま本品の位置を変えないこと。[冠状静脈洞内を損傷させる恐れがあります。]
- ・本品の位置を直す場合は、必ず直視下で行うこと。
- ・冠状静脈洞の圧力は 40mmHg 以上にしなないこと。
- ・本品ワイヤー部にはクランプを施さないこと。[本品内部が損傷する恐れがあります。]
- ・バルーンを拡張操作の際には本品の使用は慎重に行うこと。また、接合部分には不要な力を加えることのないよう使用すること。[冠状静脈洞が損傷する可能性があります。]
- ・バルーンの破損がおきないようにバルーン内圧に注意して使用すること。[冠状静脈洞が損傷する可能性があります。]
- ・心筋保護液注入中は安全確認のため必ず圧モニタリングを行うこと。[回路内圧の上昇により本品が破損する可能性があります]

#### 【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・バルーン内圧は  $1.33 \times 10^{-2}$ MPa (100mmHg) 以上の加圧を絶対にしなないこと。
- ・接合部には 4.9N (0.5kgf) 以上の力を加えないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】


本品はポリウレタン、ポリカーボネート、SUS を使用している。

商品番号

RUKN-1418-S-H, RUKN-1418-S2-H

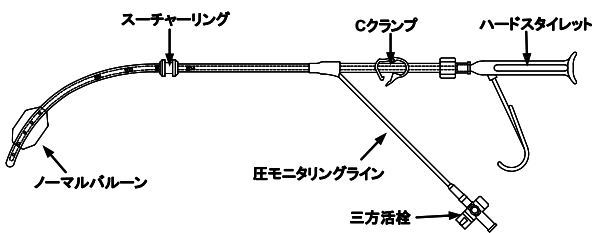

RUKN-1218-SG-H, RUKN-1418-SG-H, RUKN-1420-SG-H  
 RUKN-1418-SG2-H

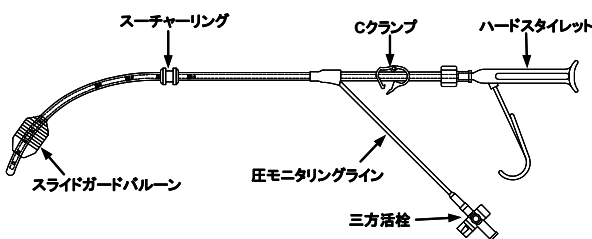

商品番号	カテーテル径 (Fr)	バルーン径 (mm)
RUKN-1418-S-H	14	18
RUKN-1418-S2-H	14	18
RUKN-1218-SG-H	12	18
RUKN-1418-SG-H	14	18
RUKN-1420-SG-H	14	20
RUKN-1418-SG2-H	14	18

本品は体外循環用カニューレであり、患者の冠状静脈洞へ挿入し心筋保護液注入用回路より送り出された心筋保護液を本品内径部より血管へ送り出し、心停止及び心筋保護を目的として使用する。

本品にはバルーンがついており、適切に挿入された後にバルーンを拡張させ冠状静脈洞右房側付近を閉塞させ心筋保護液を注入する。本品は心筋保護液注入用回路に接続して使用する。

#### 【使用目的又は効果】

本品は心臓手術の際に、一時的に使用する人工心肺ディスポーザブルセットに接続して使用する。具体的には脱血用カニューレは人工心肺回路の脱血用回路に、送血用カニューレは人工心肺回路の送血回路に、順行性冠灌流 (アンテプレジア) 用カニューレ、逆行性冠灌流 (レトロプレジア) 用カニューレ及び心筋保護用部品は心筋保護液注入用回路に、経皮挿入用カニューレは PCPS 用の血液回路に、その他のカニューレは吸引用や輸液用等の回路に、それぞれ接続して使用することを目的とする。

#### 【使用方法等】

使用方法の一例

##### 1. 挿入前の準備

- (1) 本品に損傷がないことを確認後、スタイルットを抜きシリリングを用いて、バルーン拡張口より生理食塩水でバルーンを膨張させ、バルーンの膨張と漏れがないことを確認後、バルーンを閉塞させ、再度スタイルットを取り付ける。
- (2) 圧モニタリングラインの空気を完全に除去し三方活栓を閉じ、充填を保持する。圧モニタリングラインと圧モニタリング装置の接続は本品挿入後に行う。
- (3) 一般的な外科手術に基づき、4-0 縫合糸を右心房の低い位置にタバコ縫合をかけ、ターニケットを通しておく。
- (4) 本品に付いているスーチャーリングは生理食塩水をつけることにより、スムーズに動かすことができます。スーチャーリングをカニューレ挿入時における適切な位置に動かす。

##### 2. 挿入 (本作業は体外循環開始前に行うこと。)

- (1) タバコ縫合中央部に挿入穴を開ける。
- (2) IVC と RA の接合部分を触診しながらバルーンが冠状静脈洞内に入る様に本品を挿入する。

注意：体外循環前に挿入できない場合には部分体外循環時に行うこと。この方法により心臓の血液動態への影響を最小限にし、冠状静脈洞への挿入が容易になります。

- (3) 挿入完了後スタイルットを抜き、C クランプを閉じる。
- (4) ターニケットにて本品を固定する。

- (5) バルーン拡張口よりシリンジを本品に取り付け、クランプを開き血液を引き抜きながらエア除去を十分に行う。完了後、再度Cクランプを閉じる。
- (6) 本品の圧モニタリングラインと圧モニタリング装置を延長チューブで接続し、ヘパリン加生理食塩水で適切などころまで満たす。

注意：心筋保護液注入前の圧力測定値が20mmHgを超えるような場合には先端が閉塞している可能性があります。その場合には本品を約1cm引き抜き、圧を確認すること。

- (7) 充填された心筋保護液供給ラインを本品に取り付ける。
- (8) 必要に応じてスーチャーリングを移動させ固定する。
- (9) 心筋保護液供給中は継続的に冠状静脈洞内圧をモニタリングすることによって本品の位置を確認する。圧力が20mmHgより低い場合には以下のようなことが考えられます。
  - 1) 本品が冠状静脈洞より抜けかけている場合
    - a) バルーン周囲の冠状静脈洞を圧縮するか、IVCとRAの接合部分を触診し、心房内への逆流を防止させた後、冠状静脈洞内圧を20mmHgに上昇させバルーンに穴が開いていないかどうか確認する。
    - b) 確認後、本品を1cm程度冠状静脈洞に進ませる。
  - 2) その他の場合
    - a) 行っても冠状静脈洞内圧が20mmHgを下回る場合、本品を一旦引き抜きバルーンの膨張を確認する。膨張しない場合は本品を交換する。再挿入の場合には挿入(2)からの作業を順番に行い、必要に応じて触診する。

### 3. 抜去

- (1) 心筋保護液の供給が完全に終了したことを確認した後、本品を抜去する。心筋保護液注入中に引き抜くと冠状静脈洞を損傷させる恐れがありますので必ず終了後に行う。

### 【使用上の注意】

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・本品は体外循環手術中における心筋保護液の冠状静脈洞への注入を目的としています。よって当該使用目的以外には使用しないこと。

#### 重要な基本的注意

- ・本品の使用は用法を熟知した外科、心臓血管外科、胸部外科及び救命救急部の医師に限ること。
- ・本品及び包装に破損、その他の異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・本品は滅菌医療機器であり、滅菌包装の開封は使用直前に行いかつ滅菌包装内の本品の取り出しは清潔域にて行うこと。
- ・本品使用後は血液による汚染を避けるため、十分な措置をとった後に一般廃棄物と区別して処理すること。
- ・本品の内容が目的とする仕様（例えば脱血用、送血用またはその他の使用目的）に合致していることを確認した後、使用すること。
- ・本品の仕様・外観等は改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・病院内での運搬・保管・操作の不注意によって本品に不具合が生じたと考えられる場合には補償はできません。
- ・不注意による不適切な取扱い、誤使用により発生するあらゆる人的被害については責任を負いかねます。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。

#### 有効期間

- ・本品滅菌袋に貼付されているラベルに記載。「自己認証による。」

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者  
泉工医科工業株式会社  
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

#### お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画  
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011