

コーケンネオプレス (複管タイプ)

再使用禁止

【警告】

【併用医療機器】

本品を他の呼吸管理器具と接続して使用する場合には、チューブとの接続が不完全かどうかを確認し、十分な観察、管理を行うこと。
[接続が不完全だと呼吸困難等がおこる可能性があるため。]

【使用方法】**

- カフは、気管毛細血管の内圧を超えないように、適正な圧に管理すること。または、臨床の状況により、気管をシールできる最小限の空気注入量により管理すること[カフへの過剰な空気注入はカフ破損や気管損傷・壊死の原因になるため]。
- 本品に別売のワンウェイバルブを取り付けないこと。[気道が閉塞されるため。]
- 人工呼吸器等との接続による厳密な呼吸管理が必要な場合には「コーケンネオプレス(単管タイプ)」を使用すること。[本品はその構造上、内筒とネオプレス本体の隙間からわずかに空気が漏れる恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

【併用医療機器】

本品をジャクソンリース小児用麻酔回路と併用しないこと。[本品との併用で閉塞しないが、さらなる安全性確保のため。]

【使用方法】

- 「再使用禁止」[滅菌によるカフの変形がおこる可能性があり、責任範囲を超える使用となるため。]
- アルコールを含む薬剤(例:キシロカインボンブスプレー、消毒用エタノール、ヒピテンアルコール等)と接触しないようにすること。[カフの破損(ピンホール発生)やマーキングが消失することがあるため]

【形状・構造等】**

本品は、ポリ塩化ビニル製(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))の気管切開チューブである。内筒が付属しており、内筒を取り外して洗浄できるため清潔を保ちやすく、また、吸引のルーメンがカニューレ本体に内蔵されているので気管切開孔や粘膜への刺激が軽微である。

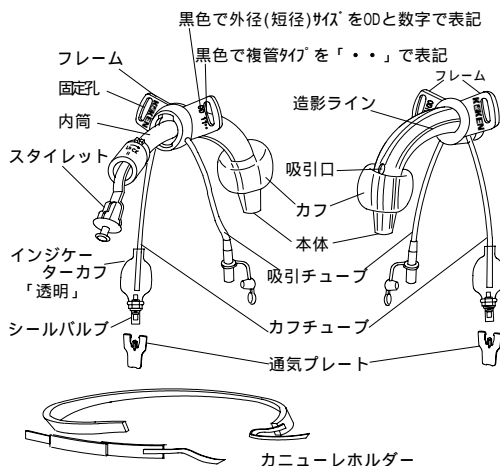


表 1: 製品番号と規格

製品番号	外筒(外径)	外筒(内径)	内筒(内径)
# 3251	8 mm	6.5 mm	5 mm
# 3252	9 mm	7 mm	5.5 mm
# 3253	10 mm	8 mm	6.5 mm
# 3254	11 mm	8.5 mm	7 mm
# 3255	12 mm	9.5 mm	7.5 mm
# 3256	13 mm	10 mm	8.5 mm



(別売品)

・コーケンネオプレス内筒

製品番号	規格	内径
# 3281	外筒(外径) 8 mm用	5 mm
# 3282	外筒(外径) 9 mm用	5.5 mm
# 3283	外筒(外径) 10 mm用	6.5 mm
# 3284	外筒(外径) 11 mm用	7 mm
# 3285	外筒(外径) 12 mm用	7.5 mm
# 3286	外筒(外径) 13 mm用	8.5 mm

・カニューレホルダー

製品番号	規格
# DAL240	成人用
# DAL242	小児用

【性能・使用目的】

低圧カフの気管切開カニューレであり、気管切開時、切開孔から気管に挿入し、気道を確保する。カフを膨らませることによって固定し、酸素を強制的に肺に送り込む。また、術後、血液や分泌物が肺に入り込むのを防ぐなどの呼吸管理に用いる。

【操作方法又は使用方法等】

【A.使用前】**

「表 1: 製品番号と規格」を参照し、適切なサイズ選定を行う。

<注意>

- 他社製品から本品への移行時には呼称及び表示の差異に注意すること。[本品は、外径呼称だが、他社製品は内径呼称が多いため。]
- 収縮時のカフの厚みも考慮に入れること。[気管切開孔に挿入しにくい時があるため。]
- カフ等を傷つけないよう注意してパッケージから本品を取り出す。

<注意>


- 本品の包装が破損していたり、濡れていたりした場合には、使用しないこと。[滅菌状態が保たれていない恐れがあるため。]
- 外観上異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないこと。
内筒を時計回りの方向に回し、カチリと手応えあるところまで回しロックする。

<注意>

- 内筒が確実にロックされていることを確認すること。[内筒は、出荷時にロックされていない。ロックが不十分だと内筒が抜ける恐れがあるため。]
- シールバルブにシリンジを接続し、空気で適切なサイズにカフを膨らませ、数分間膨らみ具合を観察するか、あるいは生理食塩液に浸して空気の漏れがないことを確認する。

<注意>

- 使用前に必ず通気プレートを取り外し、廃棄すること。[通気プレートは製造時にカフが変形するのを防止するための部品であり、取り付けた状態で使用すると空気漏れを起こすため。]
- 通気プレート取り外しの際は、下図のように通気プレートとシールバルブを持ち、折り曲げるようにして取り外すこと。[通気プレートを無理に引っ張ると、インジケータカフが破損するおそれがあるため。]

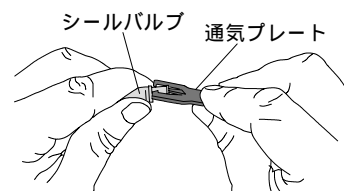

- ・鉗子や鋏のような鋭利な器具を周囲に置かないこと。[カフは、薄く出来ており接触により破損する恐れがあるため。]
本体先端側からフレーム側に空気を徐々に移動させながらカフ内の空気を完全に抜き取る。

<注意>

- ・カフは、収縮した際に可能な限り細く凸部がないようにすること。
[挿入の際、切開孔及び気道粘膜が損傷する恐れがあるため。]

(B.挿管するとき) **

潤滑剤（塩酸リドカインゼリーなど）をカフ及びスタイレットと本体の先端などの突出部に薄く塗布し、気管切開孔より気管内に挿管する。

<注意>

- ・挿管する際、カフが軟骨の鋭利な部位に接触しないように注意深く行うこと。[接触によりカフが損傷する恐れがあるため。]
- ・挿管する際、スタイレットは、装填されたままにしておくこと。
[挿管を容易にするため。]
- ・過剰に塗布した潤滑剤は、拭き取ること。[本体内腔に入り込み換気の妨げとなる恐れがあるため。]
- ・リドカイン噴霧剤（例：キシロカインポンプスプレー）は使用しないこと。[製剤の添加物により、カフの破損（ピンホールの発生）やマーキングが消失することがあるため。]
- ・予期せぬ再挿管に備えて本品の予備を近くに用意しておくこと。正しく挿管された後、速やかにスタイレットを抜去する。
フレームに取り付けた付属のカニューレホルダーあるいは市販の綿テープ等で頸のまわりに固定する。

<注意>

- ・カニューレホルダーをはずしてしまう恐れのある患者には、市販の綿テープ等を使用すること。[カニューレホルダーは脱着可能な構造のため。]
- ・綿テープと頸との隙間が 1 指あるいは 2 指程度となるように調整すること。[過剰な隙間は、本体が気管切開孔から浮き上がり気管内腔の適切な位置よりずれる恐れがあるため。]
シリンジを用いてカフを膨らませる。カフ内の圧力は市販のカフ圧計等で測定した場合 27～33hPa(20～25mmHg)程度が適切と言われているが、計測できない場合にはインジケータカフの膨らみ具合を参考にする。

<注意>

- ・空気の漏れや誤嚥を防ぐのに必要最低限の量の空気を入れて膨らませること。[膨らみすぎたカフは、気管粘膜の損傷や気管の変形を引き起こしたり、破損したりする恐れがあるため。]
- ・33hPa(25mmHg)以内のカフ圧で気管壁を密閉出来ない場合は、カフの空気を抜き、再度カフに空気を入れる。再度行っても出来ない場合は、より大きなサイズの本品を用意すること。[カフのサイズが不適切か、あるいはカフが十分に膨らんでいないため。]
- ・カフチューブのシールバルブに糸くずや異物が入り混まないようにすること。[異物などでシール機能を損ない空気漏れが起きる恐れがあるため。]
患者の換気状態を確認する。

<注意>

- ・患者の状態を十分に観察すること。[カフの膨らみ具合や本体位置により気道が閉塞する恐れがあるため。この際、フレームと皮膚の間にガーゼを挟むことである程度の調節が可能である。]
- ・人工呼吸器等と接続するときは、内筒が本体に確実にロックされていることを確認し、内筒に過度の回転力や直線力や振動するような力をかけないこと。（D.内筒交換のしかた）参照
[内筒が抜けたり、折れ曲がったりする恐れがあるため。]

(C.挿管しているあいだ) **

患者の十分な観察と管理を行う。

<注意>


- ・必要に応じて、カフの上に貯留した分泌物等の液体を吸引チューブから吸引すること。[貯留した液体が気管に流入するため。]
- ・カフはときどき空気を抜いてしばませること。[カフが気管粘

膜を圧迫し続け、気管粘膜が損傷する恐れがあるため。]


- ・カフの空気を抜く前には必ずカフの上に貯留した液体を吸引すること。[貯留した液体が気管に流入するため。]
- ・分泌物等による汚れを取り除くため、適宜内筒を抜き取り交換すること。併せて本体内側及びロック部も吸引をすること。
（D.内筒交換のしかた）参照
- ・内筒を再度挿入する際には、必ず、直前に本体内側の吸引を行うこと。[本体内側にたまった汚れを気管内に落としてしまう可能性があるため。]
- ・吸引チューブ及びカフチューブは、過度な折れ曲げや力をかけないこと。[チューブが破損する恐れがあるため。]
- ・人工呼吸器等と装着している間は、内筒と本体のロック状態を確認すること。[長期間負荷を掛けた状態で接続すると変形し、ロックが外れる恐れがあるため。]

(D.内筒交換のしかた)

カフの上に貯留した分泌物等の液体を吸引チューブから吸引する。フレームを持ち、内筒のコネクタを反時計回りの方向に約 90° 回しロックを解除し、内筒を抜き取る。

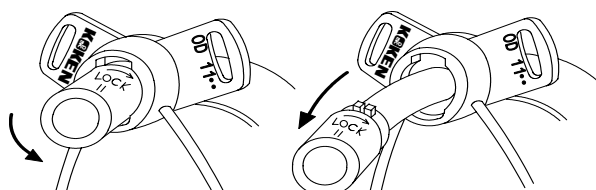

本体内側の分泌物等による汚れをカテーテル等で吸引する。別売品の内筒をネオプレス本体の溝に合わせて差し込み、時計回りの方向に約 90°、カチリと手応えのあるところまで回しロックする。

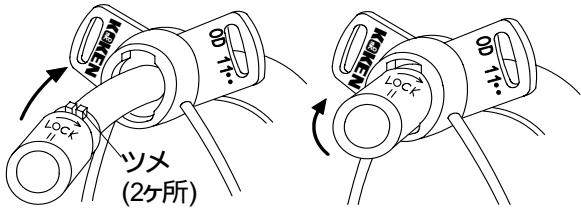

<注意>

- ・内筒を再挿入する際は、必ず直前にネオプレス本体内側の吸引を行うこと。[本体内側に付着した汚れを気管内に落としてしまう可能性があるため。]

(E.抜管するとき)

カフの上に貯留した分泌物等の液体を吸引チューブから吸引する。シリンジにてカフから空気を完全に抜き、本体をゆっくりと引き抜く。

<注意>

- ・カフの空気を完全に抜いてから抜管すること。[カフが膨らんだ状態で抜管すると、気道粘膜並びに気管切開孔の損傷などの危険があるため。]
- ・ゆっくりと注意して引き抜くこと。[カフに肉芽が引っかかり、本品が抜け難くなったり、出血したりする恐れがあるため。]

【使用上の注意】 **

【重要な基本的注意】

- ・カフ圧は、カフ圧計により定期的に適正な圧（一般的な目安範囲としては 27～34cmH₂O、20～25mmHg（文献値））を維持すること。
- ・適正な圧は患者の容態にあわせて設定すること。
- ・空気を注入・排出する際は、バルブにシリンジ等の先端をしっかり押し込むこと[シリンジ等の先端が浅い挿入では、空気を注入・排出できないことがあるため。]
- ・万が一、脱気できない事態が発生した場合には、カフチューブの切断またはカフの穿孔により脱気し、注意してチューブを取り除くこと。
- ・未熟児、新生児、乳児、幼児、小児および意思表示の難しい患

者に使用する場合には、気道閉塞が発生しても発見が遅れる可能性があるため、特に充分な観察、管理を行うこと。

- ・分泌物等の汚れは気道閉塞の原因になるため随時取り除き、清潔な状態を保つこと。
- ・「コーケンネオブレス」では、それぞれのタイプで適用が異なるので適正使用推進のため次表を参照すること。

	適用	内筒	側孔	箱と滅菌袋のラベル地の色	フレームの文字色	フレームの表記(外径 11mmの場合)	インジケーターカフの色
単管タイプ	レスピレーター等との接続による厳密な呼吸管理が必要な患者	なし	なし	緑色	緑色	OD 11・	緑色
複管タイプ	痰が多く、カニューレが閉塞しやすい患者	あり	なし	白色	黒色	OD 11・・	透明
スピーチタイプ	発声訓練を行う患者	あり	あり	水色	青色	OD 11S	青色

- ・吸引チューブからの持続的吸引は行わないこと。[気管内に唾液を引き込む原因となるため。]
- ・開封後、何らかの事情で直ちに使用しない場合には、再滅菌せずに廃棄すること。

【不具合・有害事象】

本品の使用中に感染や肉芽の発生、気管粘膜の損傷がおこることがある。また、分泌物等が付着することで本品の閉塞または狭窄が発生し、呼吸困難等がおこることがある。使用期間中は十分な観察を行い、このような場合には適切な処置を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

高温多湿や直射日光を避け、室温で清潔なところに保管すること。

【使用期間】

本品の交換の頻度は患者の状態に大きく左右されるため十分な観察を行い、一日に一度から週に一度程度を目安として交換すること。

【使用の期限】

箱に記載されている使用期限を参照のこと。[自己認証（当社データ）による。]

【取扱い上の注意】

- ・本品の改造、分解はしないこと。
- ・使用済みの本品の廃棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「感染性廃棄物マニュアル」に従い医療機関で焼却処分するか、あるいは専門処理業者に委託するなど適切に処理すること。

【包装】*

1本/箱

【主要文献及び文献請求先】

【主要文献】

- ・「気管カニューレの種類と使用上の留意点（1）」堀口利之、鈴木康司：訪問看護と介護 3 (2)135-140,1998
- ・「気管カニューレの種類と使用上の留意点（2）」堀口利之、鈴木康司：訪問看護と介護 3 (3)219-222,1998

【文献請求先】

株式会社 高研 営業管理部
〒171-0031 東京都豊島区目白 3-14-3
TEL 03-3950-6600

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

【製造販売元】

株式会社 高研
〒171-0031 東京都豊島区目白 3-14-3
TEL 03-3950-6600

【製造元】

株式会社 高研
〒171-0031 東京都豊島区目白 3-14-3

