

Vagi-パイプ

再使用禁止

【警告】

<使用方法>


- ・リングに過度な力を加えないこと。[リングが外れ、気腹ガスが漏れる可能性がある。]
- ・ハンドル操作は、慎重に行うこと。[拡張部位を損傷させる可能性がある。]
- ・電気メスを、パイプに接触させないこと。[パイプが溶融し、変形する可能性がある。]

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- <使用方法>
- ・本品に、超音波凝固装置を接触させないこと。[パイプが溶融し、変形する可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

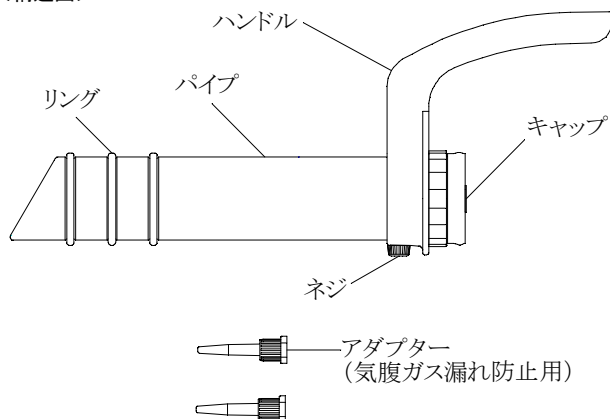

- * ・パイプ:メタクリル樹脂製
リング:シリコンゴム製

【使用目的、効能又は効果】

- ・本品は、人体の自然開口部向けの拡張器として使用する。

【品目仕様等】

- * ・リング接着強度:98Nの荷重を加えたとき、外れない。

【操作方法又は使用方法等】

本品は、手技に精通した医師の管理下で使用する。

- 1) 汚染に注意して包装内から取り出す。
- 2) 本品を自然開口部より挿入し、拡張させる。
- 3) 目的の手技を行う。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・本品は、腹腔鏡下子宮全摘術等において、膣に挿入し使用する器具の為、その他の部位には使用しないこと。
- ・併用器具の操作方法等については、その添付文書を確認後、使用すること。
- ・リングに過度な力を加えないこと。[リングが外れ、気腹ガスが漏れる可能性がある。]
- ・電気メスを、パイプに接触させないこと。[パイプが溶融し、変形する可能性がある。]
- ・使用する前に必ずネジの緩みがないことを確認すること。
- ・ハンドル操作は、慎重に行うこと。[拡張部位を損傷させる可能性がある。]
- ・操作中に異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用直前に開封して使用すること。

<その他の注意>

- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- ・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間・使用の期限>

- ・箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【包装】

1セット/1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売業者>

株式会社八光
長野県千曲市大字磯部 1490
TEL 026-275-0121

<製造業者>

株式会社八光

販売窓口: 東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500