

キャッチパース

再使用禁止

【警告】

<使用方法>

- ・パースを体外に取り出す際、異常な抵抗を感じた場合は、無理に取り出さないこと。
[パースが破損する恐れがある。]


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>

本品は、金属シース内にパースが収納されている。パースを腹腔内で開くことにより、内視鏡下外科手術における臓器摘出用器具として使用する。

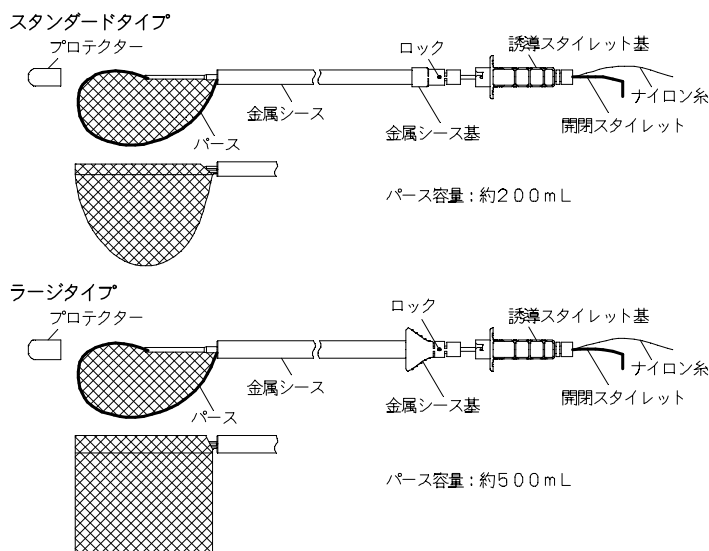

金属シースはステンレス製、パース(袋)はポリエチレン製。

【使用目的、効能又は効果】

臓器を体外に摘出するために用いる器具である。

【品目仕様等】

- ・引き抜き強度
金属シース: 29.4N の力で引き抜けない。
誘導スタイレット: 29.4N の力で引き抜けない。
- ・パース強度
パースを閉じた状態で、誘導スタイレットを引っ張る方向に 29.4N の荷重を加えたとき、パースの取り付け部(パースとナイロン糸の固定部分)及びパースは破損しない。

【操作方法又は使用方法等】

本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。
本品は、手技に精通した医師の管理下で使用する。

- 1) プロテクターを外す。
- 2) あらかじめ穿刺したトロッカーに挿入する。
- 3) 誘導スタイレット基をスライドさせ、パースを押出した後、時計回りに回転させ、スタイレット基とロックさせる。

- 4) 開閉スタイレットをゆっくりと挿入し、パースを開く。
- 5) 摘出臓器をパース内に収納する。
- 6) スタイレット基を把持しながら開閉スタイレットを完全に引き、パースを閉じる。
- 7) トロッカーと共に体外に取り出す。

◎一時的にパースを腹腔内に残す場合

- 1) 5)の操作終了後、ナイロン糸を完全に引く。
- 2) トロッカーを把持し、キャッチパースをゆっくりと抜去する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

※・開閉スタイレットの操作はゆっくり行うこと。また、パースが閉口している状態において、開閉スタイレットを更に引かないこと。
[誘導スタイレット先端部品が破損し、脱落する恐れがある。]

・使用前に必ずプロテクターを外すこと。
[プロテクターを装着した状態で挿入した場合、プロテクターが体腔内に脱落する恐れがある。]

・予め併用する器具に通ることを確認すること。また、併用器具の操作方法等については、その添付文書を確認後、使用すること。

・回収する摘出臓器の大きさに合わせてタイプを選択すること。
[パース容量を超えると、間口が閉まらない恐れがある。]

・誘導スタイレット基とスタイレット基をロックした後は、手技が終了するまでロックを解除しないこと。
[パースが開閉しづらくなる恐れがある。]

※・開閉スタイレットの操作は誘導スタイレット基のなるべく近くを持ってゆっくり行うこと。

[開閉スタイレットが折れ曲がって操作しにくくなる恐れがある。そのまま操作すると開閉スタイレットが破損する恐れがある。開閉スタイレットの挿入時に操作不能となった場合は、使用を中止し開閉スタイレットを引きパースを閉じてトロッカーからパースが破損しないように引き抜き、新しい製品と交換すること。パースを閉じる際に操作不能となった場合は、回収した摘出臓器をパースから取り出し、鉗子等で間口形状を整えながら開閉スタイレットを引きパースを閉じてトロッカーからパースが破損しないように引き抜くこと。]

・パース内で摘出臓器の切断を行うときは、器具を直接パースに接触させないこと。
[パースが破損する恐れがある。]

・鋭利な器具をパースに接触させないこと。
[パースが破損する恐れがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用前直前に開封して使用すること。

<その他の注意>

- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌済み。
- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間・使用の期限>

- ・箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【包 装】

2 セット／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＜製造販売業者＞

株式会社八光

長野県千曲市大字磯部 1490 番地

TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

株式会社八光

販売窓口： 東京都文京区本郷三丁目 42-6

TEL 03-5804-8500