

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸固定用具 33519000

スーチャータック(S)

再使用禁止


【警告】

- ・本品使用の際は、使用する鉗子等の外径への適合、固定を確認してください。
- ・本品はオートクレーブあるいは EOG 滅菌にて使用してください。

【禁忌・禁止】

- ・再使用、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】*,**

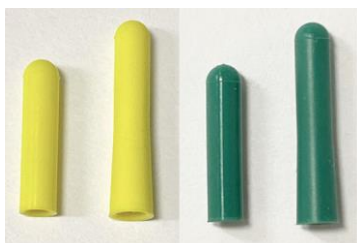

型番	色	全長(mm)
ST10	黄	13.0
ST12	黄	17.0
ST10-G	緑	13.0
ST12-G	緑	17.0

X 線不透過

＜原材料＞

- ・シリコーン
- ・硫酸バリウム

【使用目的又は効果】

縫合糸の張力をより広範囲に分散させることで、創傷の治癒を補助することを目的とする糸支えの器具である。縫合糸の張力の分布は、縫合糸で皮膚が切れるのを防止するのに役立つ。

【使用方法等】

- 1.本品をモスキート鉗子等の先端部分に回転させながら(目安として 1/3～1/2 回転位)被せるように装着する。
- 2.その部分で縫合糸をしっかりと把持する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・本品は未滅菌品です。使用する前には必ず各医療機関で確認の取れた方法で滅菌をしてください。
- ・使用する前に本品に傷などの損傷が無いことを確認してください。それらがある場合には使用しないでください。
- ・本品の使用は一回限りで、再滅菌・再使用はしないでください。
- ・鉗子等により固定されているか確認してください(確実に固定されていない場合、脱落の恐れがあります)。

- ・装着の際に、鉗子等の先端部分が飛び出していない事を確認してください。
- ・患者の体内への置き忘れを防ぐため、必ず手術前と手術終了時の縫合前に本品が鉗子等に装着されていることを確認し、数が一致することを確認してください。

＜その他の注意＞

- ・使用後は医療用廃棄物として適切な処理をしてください。
- ・本品には放射線不透過の材料が用いられていますが、放射線技術や解剖学的性状により検出できないことがありますので、注意してください。

【保管方法及び使用期限等】

＜保管方法＞

- ・高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- ・湿気や熱に直にさらされない場所に保管してください。

＜使用期限＞

- ・自己認証(当社データ)による有効期限は被包に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：株式会社メディソレーユ
連絡先 TEL:03-5842-5081