

機械器具 7 内臓機能代用器
高度管理医療機器 腹膜透析用カテーテル 34921000

CAPDカテーテル (CAPDチタニウムアダプタ B)

再使用禁止

【警告】


本品と腹膜透析用カテーテル等との接続は、無菌的に行うこと。[無菌的に操作しないと、腹膜炎を併発する危険性がある]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 本品は連続携帯式腹膜透析において、腹膜透析用カテーテルと接続チューブを接続するためのアダプタである。
2. 本品はエチレンオキシドガス滅菌済みである。

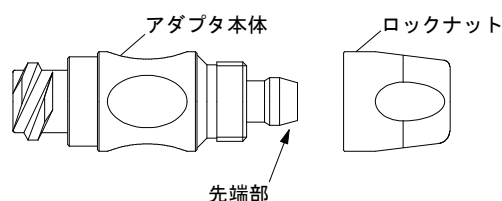

〈材質〉

各部の名称	原 材 料
アダプタ本体	チタン
ロックナット	

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

連続携帯式腹膜透析 (CAPD) に用いられる腹膜灌流用留置カテーテルとして使用する。
なお、本品は腹膜透析用カテーテルと透析ラインを接続する際に使用する。

【使用方法等】

1. ロックナットの向きに注意し、腹膜透析用カテーテルを通す。
2. アダプタ本体の先端部を腹膜透析用カテーテルに差し込む。
3. ロックナットをアダプタ本体に引き寄せ、ロックナットを右に回してアダプタ本体に接続し、アダプタ本体とロックナットとの隙間が無くなるまで締め付ける。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. アダプタ本体とロックナットを接続する際は、金属製鉗子を使用しないこと。[本品生じた傷により、カテーテルや併用する機器を傷付けるおそれがある]
2. アダプタ本体とロックナットの接続は確実に行うこと。[接続が不十分な場合、カテーテルとの接続が補強されず、本品からカテーテルが離脱するおそれがある]
3. 滅菌包装の開封後は直ちに使用し、何らかの事情で使用しない場合は廃棄すること。[開封後直ちに使用しないと、本品が汚染されるおそれがある]
4. 使用にあたり、以下の内容で患者に指導すること。
 - 1) 本品の使用中には常に異常のないことを確認し、本品及び本品の接続部から液漏れ、接続部からの抜けが発生した場合は、注排液をせず、速やかに医療機関に連絡し、医師の指示に従うこと。[透析液の接する部分が汚染されると腹膜炎になるおそれがある]

〈不具合・有害事象〉

1. 重大な有害事象
・ 腹膜炎

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れ、直射日光、高温多湿な場所を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間
使用期限は滅菌日から5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927

発 売 元 株式会社メディテック
東京都渋谷区代々木2-15-12 クランツ南新宿
TEL 03-6276-3751