

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください

認証番号：21100BZZ00408000

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材(クリーム型)
JMDNコード：16388010
販売名：タフグリップクリーム

タフグリップ®

クリーム 無添加*

※色素・香料を含みません

特 徴

1. クリームタイプなので、口の中で徐々にだ液を吸収しながら粘性を増し、粘りの力でしっかりくっつけ、入れ歯を安定させます 2. クリームタイプなので、入れ歯全体にまんべんなく広がり、使い方が簡単です 3. 食べ物に対する味覚を変えないように香料・着色料を使用していません 4. 入れ歯と歯ぐきの小さなすき間をしっかりとくっつけて、食べカスなどの侵入による歯ぐきの痛み、入れ歯と歯ぐきの部分接触による痛みをやわらげます 5. 金属床の入れ歯にも使用できます
●上あご用、下あご用入れ歯どちらでも使えます

禁忌・禁止

次の人は使用しないこと 1. 本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人 2. 入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人 3. 食べ物等の飲み込みが困難な人(喉に詰まる恐れがある)

形状・構造及び原理等

[成分] ナトリウム／カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、軽質流動パラフィン、パラオキシ安息香酸プロピル※成分は食品添加物や口腔用医薬品として広く用いられています [形状] 淡黄褐色のペースト状クリーム [原理] 入れ歯と口腔粘膜とを粘着力で維持させる
[品目仕様] 粘着強さ：5kPa以上、pH値：4～10

使用目的

義歯の安定

使用方法

1. 操作方法又は使用方法 ①入れ歯をよく洗い、水分をきれいにふき取る ●本剤は接着剤ではありません ②適量を入れ歯の歯ぐきがあたる部分に数カ所塗布する ●1カ所に塗る量は1～2cmが目安ですが、入れ歯と歯ぐきのすき間によって異なりますので、最初は少なめに塗り、経験に応じてご自身の適量を決めてください ③そのまま入れ歯を口にはめ込み、入れ歯を歯ぐきに軽く押し当て固定する ●1～2分軽く押さえてください ●はみ出る場合、塗る量を少なくしてください

2. 使用可能な入れ歯の材質、種類

○：使用可能 ×：使用不可

入れ歯の材質		入れ歯の種類		
プラスチック床	金属床	総入れ歯	部分入れ歯	ブリッジ、さし歯
○	○	○	○	×

3. 洗浄法

入れ歯を口中より取り出した後、水又はぬるま湯につけて手指で拭き取る

[使用方法に関する注意]

1. 本品をつけ替えなしに1日以上は使用しないこと

2. 使用中又は使用後に注意すること

①本品をつけた入れ歯は必ず就寝時にはずすこと

②本品をつけたまま入れ歯を乾燥させないこと。入れ歯をはずしたら、必ず水又はぬるま湯に浸しておくこと(固まってはがれにくくなったり、はがれなくなることがある)

使用上の注意

1. 長期連用しないこと。連用する場合には歯科医師に相談すること(歯ぐきがやせる、噛み合わせが悪くなる可能性がある)
2. 本品の使用中止又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること 3. 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整を相談すること

保管方法

1. 小児の手の届かない所に保管すること

2. 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりとめて保管すること

●まれにクリームタイプの特性上、高温となる場所に放置されますと、透明な液体(クリームの油分)が見られることがあります。その時はガーゼやティッシュペーパー等で取り除いてご使用ください(製品機能上の問題はありません)



製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元 仙台小林製薬株式会社

発売元 小林製薬株式会社

製品のお問合せ先(お客様相談室)

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

☎ 0120-5884-05

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>


受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

・歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とすること
・定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行うこと

(裏面につづく)



使用方法

1

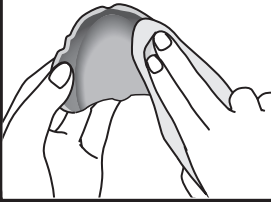


入れ歯をよく洗い、
水分をきれいにふき取る

2

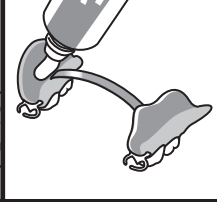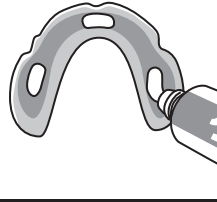


適量を塗って、装着する
※大量に塗ると溶け出すため、少量からお試ください

3

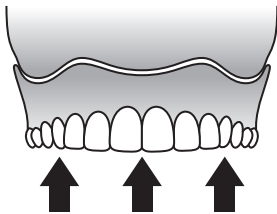

そのまま入れ歯を口にはめ込み入れ歯を歯ぐきに
軽く押し当てて固定する ※入れ歯を装着する前に、
口内を水で軽くゆすぐことで、しっかり接着できます

4

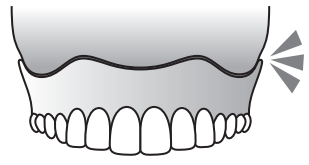

粘着力で、
入れ歯をくっつけます

使用後は、キャップをしっかりしめてください。

よくあるご質問

質問：入れ歯につけた安定剤を飲み込んでしまっているようですが、危険はないでしょうか。

答え：本製品の成分は食品添加物や口腔用医薬品として広く用いられているものなので、安全です。

質問：入れ歯をはずしにくいのですが、どうすればよいでしょうか。

答え：水・ぬるま湯などをお口に含んでいただくと、はずれやすくなります。上あごに強くくっついて
いる場合、床の奥を上を押すとはずれます。下あごは奥歯の後ろを下を押すとはずれます。

質問：入れ歯を装着中に安定剤が溶け出し、安定しなくなりました。

答え：入れ歯をよく洗い、水分をきれいにふき取り、再び使用方法のとおり安定剤を塗布してください。

質問：安定剤が、入れ歯からうまく取り除けません。

答え：入れ歯を水またはぬるま湯に浸け、安定剤が溶けてきたら、ガーゼやティッシュなどで拭い、
流水下、歯ブラシなどでブラッシングして洗い流してください。
なお、安定剤をつけ過ぎてしまうと、使用後に取り除きにくくなりますので、少量からご自身
に適した量を調整してください。

質問：安定剤が、使用後に口の中に残ってしまい、うまく取り除けません。

答え：乾いたガーゼやティッシュなどで、お口の中をよく拭ってください。
なお、安定剤をつけ過ぎてしまうと、使用後に取り除きにくくなりますので、適量の使用を
お願いします。