

## デルマパンチ®

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### ○再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】


本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みの穿孔器(皮膚トレパン)であり、刃部(材質:ステンレスSUS304)、柄部及びキャップから構成されている。

組織標本用、電子顕微鏡サンプル、組織内菌要素の培養などの目的により、患者の皮膚に穿刺し、組織を採取することに限定して使用される。

規格:刃部の内径別に柄部を色分けしており3サイズある。

3mmグリーン、4mmピンク、5mmホワイト

3サイズとも全長93mm、刃部の長さ8mm、柄部の長さ85mmである。

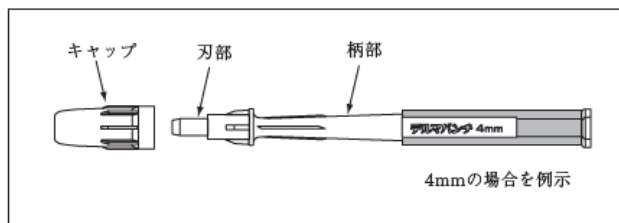

デルマパンチの形状・構造

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 開封後、本品を内袋より取り出し、キャップを外して直ちに使用して下さい。
2. 本品は、使用1回限りとし、再使用しないで下さい。
3. 使用後は、安全な方法で廃棄して下さい。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- \*\* (1) 穿刺時は、皮膚組織の厚さや他の直下の組織に十分注意して操作すること。[他の組織を損傷させる恐れがある。]  
(2) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

##### \*\*2. 有害事象

深部組織(腱等)損傷

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- (1) 本品は清潔な場所に保管すること。
- (2) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 使用期限

包装箱、内袋の使用期限の欄を参照(自己認証による)

#### 【包装】

各サイズとも1箱10本入り

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

##### 製造販売

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3-9-3

電話番号: 06-6375-6709(医療推進部)

##### 製造

ニプロ医工株式会社

##### 販売

マルホ株式会社(窓口: \*製品情報センター)

大阪市北区中津1-5-22

電話番号: 0120-12-2834