

デルマパンチ®

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止


*【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキシドガス滅菌済みの穿孔器(皮膚トレパン)であり、刃部(材質：ステンレス SUS 304)、柄部及びキャップから構成されている。

規格：刃部の内径別に柄部を色分けしており3サイズある。

3mm グリーン、4mm ピンク、5mm ホワイト

3サイズとも全長93mm、刃部の長さ8mm、柄部の長さ85mmである。

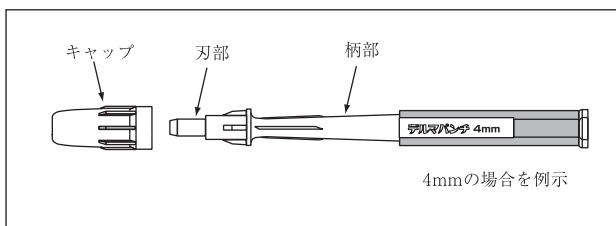

デルマパンチの形状・構造

*【使用目的、効能又は効果】

1. 生検標本を採取するために用いる円筒状、中空の専用器具である。各種の直径サイズで製造されており、本品は単回使用である。
2. 本品は組織標本用、電子顕微鏡サンプル、組織内菌要素の培養などの目的により、患者の皮膚に穿刺し、組織を採取することに限定して使用される。

**【品目仕様等】

刃部と柄部の引き抜き強度

引き抜き強度：22N

【操作方法又は使用方法等】

1. 開封後、本品を内袋より取り出し、キャップを外して直ちに使用してください。
2. 本品は、使用1回限りとし、再使用しないでください。
3. 使用後は、安全な方法で廃棄してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 穿刺時は、皮膚組織の厚さや他の直下の組織に十分注意して操作すること。[他の組織を損傷させるおそれがある。]
- 2) 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

2. 有害事象

深部組織(腱等)損傷

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 本品は清潔な場所に保管すること。
- 2) 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 使用期限

包装箱、内袋の使用期限の欄を参照（自己認証による）

【包装】

各サイズとも1箱10本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

お問い合わせ窓口

マルホ株式会社 製品情報センター
〒531-0071 大阪市北区中津1-11-1
電話番号：0120-12-2834

製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
**電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社

販売

マルホ株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津1-5-22