



* U R - 0 9 3 A C *

文書管理番号 UR-093AC

**2011 年 3 月 11 日改訂(第 4 版)

医療機器承認番号:21200BZY00588000

*2010 年 2 月 16 日改訂(第 3 版)

機械器具 51 医療用尿管及び体液誘導管
高度管理医療機器 長期使用尿管用チューブステント 34926003
*(非血管用ガイドワイヤ 35094022)
*(尿管向け泌尿器用カテーテル 34926012)
*(カテーテルポジショナ 70330000)

MVU フレキシマ・ステント

(ストレッチVLステント/ガイドワイヤーセット)

再使用禁止

【警告】

- (1) ストレッチ VL ステントガイドワイヤーセット(以下、本品という)の使用の際は、使用前に患者の尿管長を測定し、過剰なステント端のコイル部分が形成されないことを確認して、リスクに応じ他の先端形状のステント使用も考慮すること。[留置中又は抜去時に、腎盂側のステント先端に結び目が形成される危険性があるため。]
- (2) 抜去の際、抵抗を感じた場合は、X 線等により抵抗の原因を確認した上で適切な処置を行うこと。[無理に抜去した場合、腎盂や尿管を傷つける可能性があるため。]
- (3) 骨盤内手術及び放射線治療の既往歴があり、尿管ステントを長期間留置している場合には、尿管と大動脈又は腸骨動脈の間に尿管動脈瘻が形成されることがあり、尿管ステント交換時に大量出血をきたす恐れがあるため、注意深い経過観察を行うとともに、尿道からの出血を認めた場合には、逆行性腎盂造影や血管造影等の診断を行い、適切な処置を行なうこと。

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

本品は、以下の手技及び症状に対しての使用は禁忌となる。

- (1) 外科処置による危険度が大きい患者
- (2) 原因不明の血尿
- (3) 未修復の尿管剥離


2. 再使用禁止

- (1) 本品は、1回限りの使用とし、再使用、再処理又は再滅菌は行わないこと。[医療機器の構造上、支障が生じる可能性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病あるいは死亡が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病あるいは死亡につながる可能性がある。]
- (2) 本品は、エチレンオキサイドガスによる滅菌済みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】


本品は経皮的又は経内視鏡的に尿管、膀胱、腎等の泌尿器系に挿入して排膿、排液、灌流、洗浄又は薬液の注入に用いられるチューブステントである。

ストレッチ VL ステントガイドワイヤーセット スーチャ付ステント及びピッグテイル・ストレイトナ

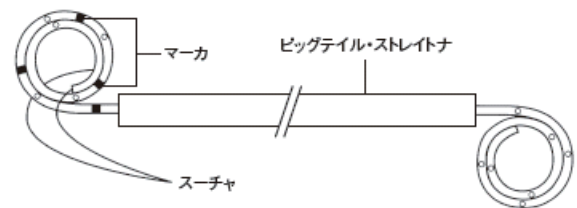

ピッグテイル・ストレイトナは、尿管ステント上で(最初に膀胱側方向に、次に先端方向に)容易にスライドさせることができ、これによって、ピッグテイル部をまっすぐに伸ばしてガイドワイヤーの挿入を容易にする。挿入後にはピッグテイル・ストレイトナを抜去する。

メタルチップポジショナ

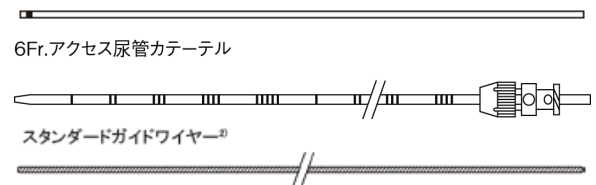

- * 1) 販売名(認証番号):
・アクセス尿管カテーテル(220ABBZX00119000)
- * 2) 販売名(認証番号):
・スタンダードガイドワイヤー(220ABBZX00118000)
- * <原材料>
 - (1) 尿管用チューブステント
ポリウレタン、X線不透過剤、カーボンブラック、ポリアミド、ハイドロプラスコーティング
 - (2) メタルチップポジショナ
ポリエチレン、タンタル
 - (3) 6Fr. アクセス尿管カテーテル
販売名:アクセス尿管カテーテル(220ABBZX00119000)に記載のとおり
 - (4) ガイドワイヤー
販売名:スタンダードガイドワイヤー(220ABBZX00118000)に記載のとおり

＜規格＞

製品名	ステント外径 (Fr./mm)	コイル間 長さ (cm)	適合又は 付属 ガイドワイヤ
ストレッチVLステント ／ ガイドワイヤーセット	4.8/1.6	22～30	0.035inch (0.89mm) ガイドワイヤ
	6/2.0		0.038inch (0.97mm) ガイドワイヤ
	7/2.3		

【使用目的、効能又は効果】

経皮的または経内視鏡的に、尿管、膀胱、腎等の泌尿器系に挿入して、排膿、排液、灌流、洗浄又は薬液の注入に用いられる。

* 【品目仕様等】

＜尿管用チューブステント＞

引張強度試験

本品の一端を固定し、他端を29.4Nの力で引っ張るとき、これに耐えること。

＜6Fr. アクセス尿管カテーテル＞

販売名：アクセス尿管カテーテル(220ABBZX00119000)に記載のとおり

＜ガイドワイヤ＞

販売名：スタンダードガイドワイヤー(220ABBZX00118000)に記載のとおり

【操作方法又は使用方法等】

●使用前の準備

- (1) 使用前には、滅菌包装とデバイスのどちらも損傷を受けていないかどうかを点検すること。万一、製品の包装が破れていたり、製品が破損している場合は使用せずに直ちに交換すること。
- (2) 使用前に滅菌水もしくは生理食塩液に最低30秒間浸して、コーティングを活性化させること。留置中はステントを濡れた状態に保ち、必要に応じて濡らしたガーゼ・パッドを使用すること。

●使用方法

本品は、内視鏡又はX線撮影下で使用し、以下に示すどちらかの方法で留置することができる。

- (1) 逆行性留置 — 膀胱鏡による手技
 - ① 膀胱鏡下、尿管口の中にガイドワイヤのフレキシブル端を挿入し、尿管から腎盂まで進める。
 - ② ステントを濡らしてコーティングを活性化させる。(前記「●使用前の準備」の項参照)
 - ③ ガイドワイヤの位置を維持しながら、ステントのテーパ側の先端をガイドワイヤの上を通して膀胱鏡に入れる。
 - ④ ステントを尿管に通し、メタルチップポジションと共に膀胱端部のマーカが尿管口の位置にくるまで送り込む。
注意:ステントを前に進め過ぎた場合には、添付のスーチャで適正な位置までゆっくり引き戻す。
 - ⑤ ここでガイドワイヤの一部を引き抜くことができ、腎コイルが腎盂内で形成されるようになる。X線透視又はX線撮影を使ってステントの位置を確認し、メタルチップポジションを所定の位置に保持しながらガイドワイヤを引き抜く。
 - ⑥ メタルチップポジションを引き抜き、ステントの位置をX線透視、X線撮影又は膀胱鏡検査で確認する。
 - ⑦ スーチャが最終的な抜去に必要なとされない場合には、

スーチャの1本を切断する。メタルチップポジション、及びガイドワイヤでステントの位置を保持しながら、糸をゆっくり引っ張って抜去する。ステントの位置を確認し、ガイドワイヤを抜去して、最後にメタルチップポジションを抜去する。

- ⑧ 抜去にスーチャを使用し、2回目の膀胱鏡処置を必要としない場合には、メタルチップポジションでステントの位置を保持しながら、ガイドワイヤを抜去する。次に、メタルチップポジションを注意しながら抜去する。この時点で、膀胱鏡ニップル内にスーチャを押し込み、膀胱鏡を抜去する際にメタルチップポジションで押して通過させるか、又は膀胱鏡を抜去した後結び目を切り離して糸を結び直しておくようにする。

② 順行性留置 — 経皮的方法

- ① 経皮的アクセス用の器具(本品には含まれない)を使用し、関連する腎盂内に瘻孔を造設する。
- ② ガイドワイヤのフレキシブル端を尿管から膀胱まで送り込む。
- ③ 適切な尿管カテーテルをガイドワイヤの上に送り込み、膀胱内に入ることを確かめ、ステント留置の可能性を確認する。適切なサイズで硬めのシースを瘻孔に留置すると、この時点で有効な補助手段となる。
- ④ ステントを濡らして、コーティングを活性化させる。(前記「●使用前の準備」の項参照)
- ⑤ ステントのテーパ側の先端をガイドワイヤ上に通し、メタルチップポジションと一緒に尿管を通して送り込む。最終的なステント位置が良好でなかった場合でも、ステントに付属するスーチャを利用して位置調整することが出来る。(【主要文献及び文献請求先】1.主要文献の項参照)
- ⑥ 下方コイルが膀胱にあり、上方コイルが腎盂内にあることをX線透視によって確認する。最初にスーチャを、次にガイドワイヤを取り除き、ステントをメタルチップポジションで安定させる。(一時的な経皮的ネフロストミー・ドレナージが必要な場合は、この時点で適切なガイドワイヤをメタルチップポジション内腔から挿入する。)

●スーチャの使用方法

- (1) ステントの位置決め:スーチャを引いて正確にステントを留置した後、スーチャの一端を切断し、メタルチップポジションとガイドワイヤでステントの位置を維持しながら、ゆっくりスーチャを抜去する。
- (2) ステント抜去:最終的なステントの回収時に使用できる。(但し、2週間を越える長期のステント留置の場合は、推奨できない。)
- (3) 切断可能:スーチャは切断可能で、ステント留置の前に取り除くことができる。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 静脈性、逆行性又は順行性の腎盂尿管造影法により尿路系の観察を行うこと。
- (2) ステントの留置を更に正確にするためX線透視を推奨するが、標準的なX線撮影を行ってもよい。
- (3) 尿管が22cm以上ある場合は、鉗子を使用することで膀胱及び腎盂内にコイルを均一に形成することが出来る。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 乾いたガーゼもしくは溶剤でステントを拭わないこと。コーティングを損傷するおそれがある。
- (2) 留置前又は留置中に屈曲又はよじれが生じると、ステントが十分に機能しないことがある。

- (3) スtentの挿入又は抜去時に抵抗を感じ継続困難な場合は、その時点で手技を中止すること。まずその原因を突き止め、是正処置を講じるまでは続行しないこと。
- (4) Stentの効能評価及び合併症の有無を確認するため、定期的にX線撮影、アイソトープ又は膀胱鏡検査を実施することを推奨する。長期使用が必要とされる場合には、体内留置期間が90日を越えないようにし、ならびに留置後90日以内に評価を実施すること。
- (5) 本Stentは、永久留置用デバイスとしての使用は意図されていない。
- (6) スーチャの留置期間はスーチャへの結石付着の危険を避けるため、14日間を越えないこと。Stentの留置期間が長引くことが予想される場合は、留置前又は留置後14日以内にスーチャを取り除くこと。
- (7) 上記(1)～(6)は、本Stentを使用する上で基本的なガイドとなることを意図している。尿管Stentの挿入は、適応、手技、及び処置に関わるリスクについての十分な知識がない場合は実施されるべきではない。記載の参考文献は、あらかじめ設置したガイドワイヤ上から尿管Stentを挿入する手技について、広範にわたって概説されている。
- (8) Stentのコーティング素材は、人により若干の刺激を起こす可能性がある。
- ** (9) ラベルの表示が不完全であったり、判読できない場合、本品を使用しないこと。
- ** (10) 包装が破損又は開封されている場合、本品を使用しないこと。

2. 不具合・有害事象

有害事象

本品の使用によって、以下の有害事象が起こり得るが、これらに限定されるものではない。また、患者によっては、Stent素材によって軽い炎症が起きる場合がある。

- (1) 尿管外遊出
- (2) Stent閉塞
- (3) Stent移動
- (4) 出血
- (5) 敗血症
- (6) 尿管逆流
- (7) 腎、腎盂、尿管、及び膀胱の穿孔
- (8) 腹膜炎
- (9) 疼痛
- * (10) Stentへの結石付着
- (11) 尿路感染
- * (12) 腎機能の低下
- (13) 浮腫

* 3. その他の注意

使用後は、医療機関、行政、及び地方自治体の定める規制に従って製品と包装を廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- * 1. 貯蔵・保管方法
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。有機溶媒、電離放射線、又は紫外線に曝さないこと。
- * 2. 使用期間
(1) 長期間使用する場合は、体内留置期間が90日を越えないようにし、留置後90日以内に評価を実施すること。
(2) スーチャの留置期間は14日を越えないこと。
3. 使用期限
本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用すること。

【包装】

1本／箱、1本／袋

【主要文献及び文献請求先】

** 1. 主要文献

Mardis, H.K., et al.: P.E. Double Pigtail Ureteral Stents. Urol. Clin. North Am, 9-95 (Feb.) 1982

Stables, D.P.: Percutaneous Nephrostomy Techniques, Indications and Results. Urol. Clin. North Am, 9:15 (Feb.) 1982.

2. 文献請求先

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
ウロロジー事業部
東京都新宿区西新宿1-14-11 日廣ビル
電話番号:03-3343-9360

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿1-14-11 日廣ビル
電話番号:03-5322-3711

* 外国製造所:

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション
[BOSTON SCIENTIFIC CORP.]

コスタリカ ボストン・サイエンティフィック デ コスタ リカ エセ
エレ エレ プランタ コヨール
[BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA, S.R.L
PLANTA COYOL]