

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 薬液注入用針 70205000
(汎用注射筒 13929001)

ナミック® シリンジ アンド ニードル

再使用禁止

【警告】


- アンギオグラフィックコントロールシリンジ、ラジオロジーシリンジ、ポリプロピレンシリンジ(以下、本品という)は、使用前に器具の準備と気泡の除去を行うこと。
- 吸引して、システム内に気泡が閉じ込められていないか点検し、漏れがないことを確認すること。
- 本品に気泡が閉じ込められていないか慎重に検査し、注射前に完全に気泡を除去すること。
- 本品内には液体を保管せず、注射器を満たしたら直ちに注入を開始すること。
- 本品には圧力計が付いていないので、バルーンカテーテルの拡張用には意図されていない。本品を用いてバルーンを拡張すると、過度の拡張によりバルーンが破裂することがある。
- 器具の使用時は、コネクタ部分の接続が完全であることを確認し、気泡が入らないようにすること。接続部分はすべて手で締めること。締め過ぎるとひび割れや漏れの原因となることがある。

【禁忌・禁止】


- 本品は一回限りの使用とし、再使用、再処理、又は再滅菌は行わないこと。〔医療機器の構造上、支障が生じるおそれがあるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病、あるいは死亡が引き起こされるおそれがある。また、医療機器が汚染されるおそれとともに、ある患者から別の患者への感染を含め、患者の感染や交差感染が引き起こされるおそれがある。また、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病あるいは死亡につながるおそれがある。〕
- 本品は、エチレンオキサイドガスによる滅菌済みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品(延長チューブ、先端アダプタ)は、ポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

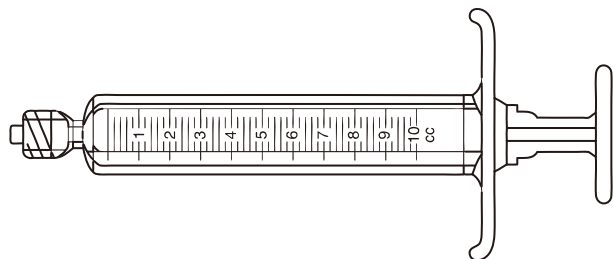

(代表例：モースラジオロジーコントロールシリンジ)

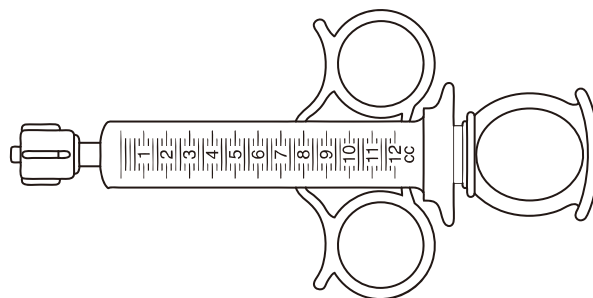

(代表例：12cc(12mL)シリンジ親指リング型)

【使用目的、効能又は効果】

本品は薬液、造影剤、生理食塩液等の注入及び血液の採取を行う目的で使用される。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。
- 本品を使用する前によく点検し、輸送中に損傷が生じていないことを確認すること。

*○ラテックス関連情報については、包装の表示を参照のこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、涼しいところに保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

本品は、パッケージラベル上に表示されている「使用期限」前に使用すること。(自己認証による。)

【包装】

10本、25本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331(代表)

製造（輸入先）

ナビリスト メディカル、インコーポレイテッド

[Navilyst Medical, Inc.]

アメリカ合衆国

[United States of America]



ニプロ株式会社