


機械器具 51 医療用嚙管及び体液誘導管
管理医療機器 頸動脈用シャント 17797000
CEA シャントチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

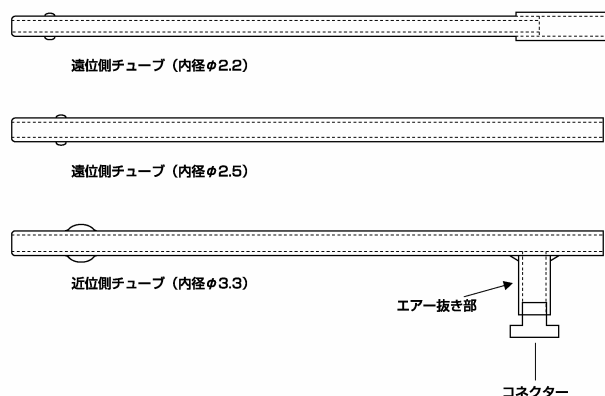

材質

シャントチューブ：シリコーンゴム
コネクタ：ポリカーボネート

【使用目的、効能又は効果】

内頸動脈閉塞例に対して、頸動脈内膜剥離術（CEA）を施行する時に、血液のバイパス回路として使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 頸動脈を露出し、病変部の血流を一時的に遮断する。
2. 予め手術症例の血管写から計測した径を基に、2 本ある遠位側チューブより 1 本を選択する。
3. 動脈切開後、血管内に近位側チューブおよび遠位側チューブを挿入し、タニケット等で固定する。
4. チューブと電磁血流計を接続する。
5. 近位側チューブの空気抜き部に三方活栓を接続し、生理食塩液を満たし空気抜き操作を行う。
6. 血流をシャントチューブ内に再開させた状態で内膜を剥離する。
7. 頸動脈内膜剥離術が終了した後に近位側チューブおよび遠位側チューブを抜き、チューブの挿入部を縫合する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 電磁血流計の接続部と正しく接続して使用すること。
2. チューブとコネクタの接続を確実にすること。
3. 使用前に、近位側チューブの空気抜き部よりチューブ内の空気を抜くこと。

4. 併用する医療機器については、その医療機器の添付文書に従うこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 脳神経外科手術に熟練した医師のみが使用すること。
2. チューブが血管に確実に固定され、かつキンクしていないことを確認した上で血流を再開すること。
3. 本品にメス、はさみ等で傷を付けないこと。〔切断の恐れがある。〕

〔その他の注意〕

1. 本品または包装に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 滅菌包装開封後は直ちに使用し、使用後は医療廃棄物として処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 水漏れと直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
 2. 外箱に使用期限を記載。使用期限切れのものを使用しないこと。
- 〔自己認証（当社データ）による〕

【包装】

1 本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売元〕

名 称：株式会社カネカ

*住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島 2-3-18

電話番号：06-6226-5256

〔製造元〕

名 称：株式会社カネカメディックス

*住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島 2-3-18

【販売元の氏名又は名称及び住所等】

名 称：株式会社カネカメディックス

*住 所：〒530-8288 大阪市北区中之島 2-3-18