

機械器具21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 パルスオキシ・カプノメータ 17148020

「カプノチェックⅡ」の付属品 モイスチャ・フィルタ（ガスマニフォールドフィルタ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈使用方法〉

- 1) 引火性物質のある環境で使用しないこと〔引火又は爆発の誘因となる恐れがあるため〕。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

8208 モイスチャ・フィルタ（ガスマニフォールドフィルタ）

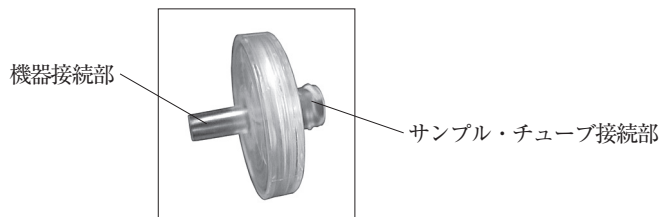

本品は、カプノチェックⅡに装着する患者アタッチメントの一部であり、サンプリングする患者の呼吸ガスの水分を除去するためのフィルタである。

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

患者の動脈血の経皮的酸素飽和度、呼気終末二酸化炭素ガス濃度及び呼気二酸化炭素ガス濃度を測定し、呼吸管理に関する情報を提供する。

【使用方法等】

1. 本品の機器接続部を機器本体の接続口に装着してください。確実に装着するには、ねじりながら押し入れてください。
2. 本品のサンプル・チューブ接続部に、サンプル・チューブを接続してください。
3. 機器本体の取扱説明書に従って、リークテストを実施してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 水分が溜まったり、汚れた場合は廃棄し、新品に交換すること。
- 2) 閉塞やリーク等、正常に機能していない疑いがある場合は、直ちに廃棄し、新品と交換すること。
- 3) 各接続部分は、リークが起こらないよう確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※※〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

〈国名〉

アメリカ合衆国