

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 換気用気管支閉塞カテーテル（JMDNコード：70258000）

クーデック[®]気管支ブロッカーチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・カフへの空気以外の注入禁止。
- ・本品とコネクタ内側に内筒がある機器（ジャクソンリース回路など）とは接続しないこと〔回路を閉塞させる危険性がある〕。

【形状・構造及び原理等】


本品は肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤等の開胸を必要とする手術の際に、分離肺換気を目的として用いられ、気道確保のために経口、経鼻又は気管切開にて挿管される各種チューブに接続、組み合わせて使用され、「気管内チューブ」内を通して挿入されるブロッカーチューブと、ブロッカーチューブを「気管内チューブ」に接続、固定するためのジョイントコネクタから構成される。ブロッカーチューブの先端近くにリザーバカフが設けられており、リザーバカフを膨張させることにより、目的の気管支を閉鎖し、分離肺換気を行うことができる。

リザーバカフを膨らませる構造には2種類あり（図1参照）、それぞれをタイプAとタイプBと呼ぶ。

リザーバカフの形状には2種類ある。

また、ブロッカーチューブには先端部からの距離を示すマークが付されており、全長に亘るX線不透過ラインが有るものと無いものがある。

尚、本品はポリ塩化ビニルの可塑剤としてフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）を使用している。

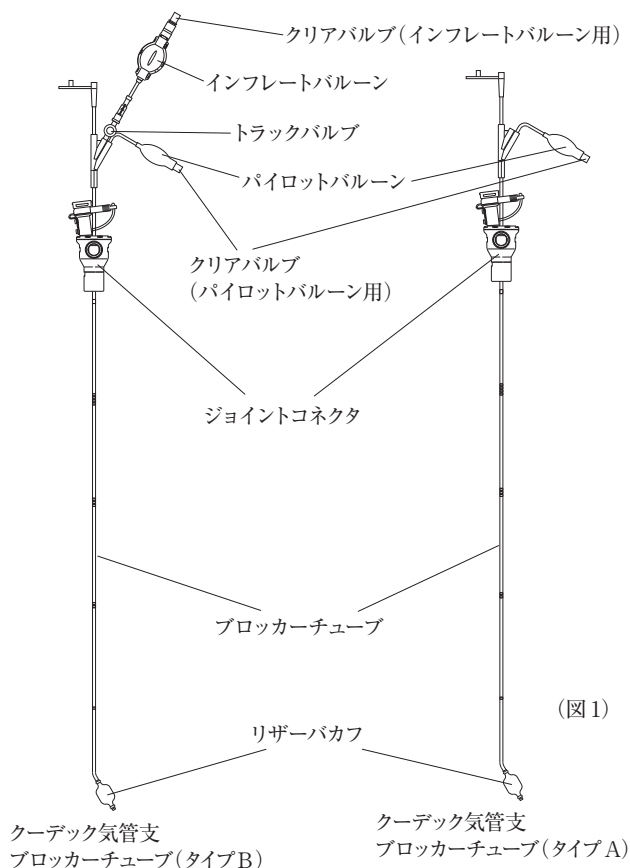

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプA）＞

本品は、目的とする気管支ヘリザーバカフを到達させた後、シリンジで直接クリアバルブ（パイロットバルーン用）に空気を注入してリザーバカフを膨張させ、分離肺換気を行う気管支ブロッカーチューブである。

内部は2腔になっており、主腔は虚脱肺への酸素補給や分泌物の吸引に使用され、副腔はリザーバカフを膨張収縮する通路に使用される。

また、クリアバルブ（パイロットバルーン用）直近にパイロットバルーンが設けられ、リザーバカフの膨らみ具合をモニターできる形状、構造になっている。

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプB）＞


本品は、シリンジによりクリアバルブ（インフレートバルーン用）から空気を注入するとインフレートバルーンが膨らんで空気が貯えられ、リザーバカフが目的部に到達したことを確認した後トラックバルブを開放すると、インフレートバルーンの復元力（収縮力）でリザーバカフに空気が移動、膨張する気管支ブロッカーチューブである。また、クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプA）と同様の方法でリザーバカフを膨らますこともできる。

内部は2腔になっており、主腔は虚脱肺への酸素補給や分泌物の吸引に使用され、副腔はリザーバカフを膨張収縮する通路に使用される。

また、クリアバルブ（パイロットバルーン用）直近にパイロットバルーンが設けられ、リザーバカフの膨らみ具合をモニターできる形状、構造になっている。

＜ジョイントコネクタ＞

ジョイントコネクタには、麻酔回路又は呼吸器回路を接続する部位（雄嵌合部）が1箇所と、各種気管内チューブや気管切開チューブに接続する部位（雌嵌合部）が1箇所設けられており、それぞれの15mm 円錐コネクタは日本工業規格（T7201-2-1）に準拠した形状寸法になっている。また、内視鏡を挿入できる孔を有する蓋つきのパッキンファイバー用と、ブロッカーチューブをシールし、装着したまま操作できるパッキンカテーテル用が取り付けられている。（図2参照）

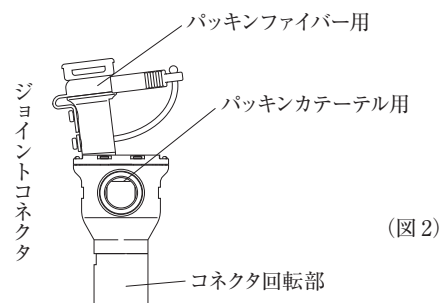

取扱説明書を必ずご参照ください。


作動・動作原理

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプA）＞

リザーバカフの膨張はクリアバルブ（パイロットバルーン用）からブロッカーチューブ副腔を通じて空気を注入することで行う。
リザーバカフの収縮はクリアバルブ（パイロットバルーン用）からブロッカーチューブ副腔を通じて空気を抜くことで行う。
気管支閉塞後の肺の吸気、換気、脱気等は吸引ポートからチューブ保護用の先端まで連通したブロッカーチューブ主腔を通じて行う。

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプB）＞

リザーバカフの膨張はインフレーションバルーンからブロッカーチューブ副腔を通じて空気を注入することで行う。
インフレーションバルーンの膨張はクリアバルブを通じて空気を注入することで行い、トラックバルブの開放によりインフレーションバルーンの空気はリザーバカフに注入される。
リザーバカフの収縮はクリアバルブ（パイロットバルーン用）からブロッカーチューブ副腔を通じて空気を抜くことで行う。
気管支閉塞後の肺の吸気、換気、脱気等は吸引ポートからチューブ保護用の先端まで連通したブロッカーチューブ主腔を通じて行う。（図3参照）

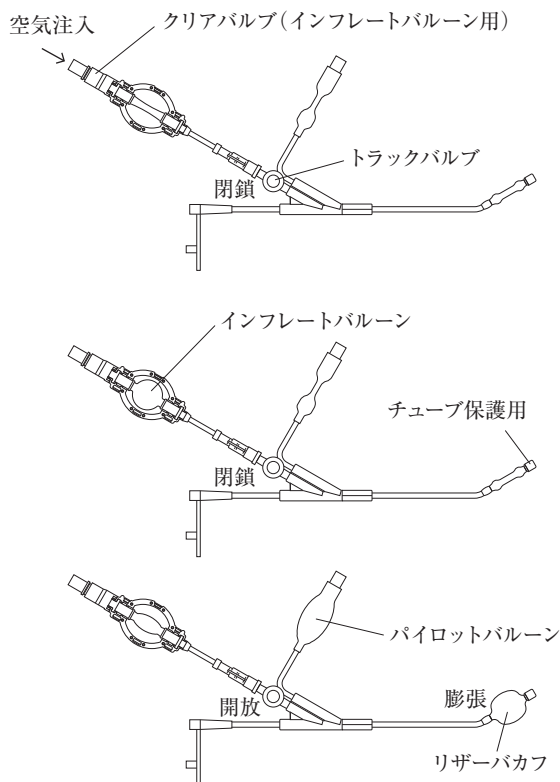

（図3）クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプB）
作動・動作原理図

【使用目的、効能又は効果】

本品は、医家向けの呼吸器用チューブで、滅菌済みディスプレイ製品である。
肺癌、縦隔腫瘍、食道癌、胸部大動脈瘤等の開胸を必要とする手術の際に、気管内に経口、経鼻、又は気管切開挿管される「気管内チューブ」又は「気管切開チューブ」と接続し、分離肺換気を行う。

【品目仕様等】

リザーバカフは、10mLの空気を注入したとき破断しない。

【操作方法又は使用方法等】

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプA）を使用する場合＞

操作準備

1. 本品のサイズを決定する。
2. シリンジを用いてクリアバルブ（パイロットバルーン用）からリザーバカフに空気を注入し、リザーバカフの空気漏れ、片膨れ等の異常が無いことを確認する。
3. リザーバカフ内の空気を完全に（パイロットバルーンが収縮状態になるまで）抜く。
4. リザーバカフ全体に潤滑剤（リドカインゼリー又は医療用水溶性ゼリー）を塗布する。
5. ブロッカーチューブを引き上げ、ジョイントコネクタ内にリザーバカフを収容させる。

操作方法

1. 「気管内チューブ」を通常の操作で経口挿管し、「気管内チューブ」の「パイロットバルーン」からシリンジで空気を注入し「気管内カフ」を膨張させる。
2. 「気管内チューブ」を布テープ等で患者の口に固定する。
3. 「気管内チューブ」にジョイントコネクタ（気管内チューブコネクタ）を接続する。
4. ジョイントコネクタのパッキンファイバー用から「気管支ファイバー」を挿入し、直視下にリザーバカフを押し出す。
5. 目的とする主気管支内にリザーバカフが入るよう、「気管支ファイバー」直視下にブロッカーチューブを回転させながら送り出す。
6. 「気管支ファイバー」直視下でリザーバカフの位置を確認した後、パッキンファイバー用にブロッカーチューブを固定する。
7. クリアバルブ（パイロットバルーン用）からリザーバカフに空気を注入し、主気管支をブロックする。
※リザーバカフの推奨空気容量は3～9mLである。

＜クーデック気管支ブロッカーチューブ（タイプB）を使用する場合＞

操作準備

1. 本品のサイズを決定する。
2. トラックバルブが閉鎖していることを確認し、シリンジを用いてクリアバルブ（インフレーションバルーン用）からインフレーションバルーンに空気を注入し、インフレーションバルーンの空気漏れや膨張状態に異常が無いことを確認する。
3. トラックバルブを開放し、リザーバカフの空気漏れ、片膨れ等の異常が無いことを確認する。
4. リザーバカフ内の空気を完全に（パイロットバルーンが収縮状態になるまで）抜く。
5. リザーバカフ全体に潤滑剤（リドカインゼリー又は医療用水溶性ゼリー）を塗布する。
6. ブロッカーチューブを引き上げ、ジョイントコネクタ内にリザーバカフを収容させる。

操作方法

1. 「気管内チューブ」を通常の操作で経口挿管し、「気管内チューブ」の「パイロットバルーン」からシリンジで空気を注入し「気管内カフ」を膨張させる。
2. 「気管内チューブ」を布テープ等で患者の口に固定する。
3. トラックバルブが閉鎖していることを確認し、シリンジを用いてクリアバルブ（インフレーションバルーン用）からインフレーションバルーンに空気を注入する。
4. 「気管内チューブ」にジョイントコネクタ（気管内チューブコネクタ）を接続する。
5. ジョイントコネクタのパッキンファイバー用から「気管支ファイバー」を挿入し、直視下にリザーバカフを押し出す。
6. 目的とする主気管支内にリザーバカフが入るよう、「気管支ファイバー」直視下にブロッカーチューブを回転させながら送り出す。
7. 「気管支ファイバー」直視下でリザーバカフの位置を確認した後、パッキンファイバー用にブロッカーチューブを固定する。
8. トラックバルブを開放しリザーバカフに空気を注入して、主気管支をブロックする。
※リザーバカフの推奨空気容量は3～9mLである。

【使用上の注意】

1. 本品を使用する前には、必ず表示事項及び取扱説明書を熟読し、その内容を熟知すること。
2. 本品を使用目的以外の用途には使用しないこと。
3. リザーバカフは、使用前にシリンジを用いて空気を注入し、空気漏れ、片膨れ等の膨張状態に異常が認められる場合は使用しないこと。
4. 本品の先端部やマークには潤滑剤を塗布しないこと〔チューブの内腔を塞いだり、マークが消失する恐れがある〕。
5. リザーバカフに傷が生じる恐れがあるため、鉗子等で挟まないこと。
6. リザーバカフの空気注入量は、医師の臨床上の判断により決定すること。ただし、規定以上の量を入れるとリザーバカフが破損する恐れがあるので注意すること。
7. リザーバカフの膨張後は、クリアバルブ（インフレートバルーン用）よりシリンジを取り外すこと。
8. リザーバカフの膨張状態を常に確認すること〔リザーバカフ壁を通じた亜酸化窒素混合ガス、酸素、及び空気の拡散によりリザーバカフ容積とリザーバカフ圧が上下することがある〕。
9. 抜管前および挿管位置を調整する場合は、リザーバカフから空気を完全に（パイロットバルーンが収縮状態になるまで）抜くこと〔リザーバカフが損傷する恐れがある〕。
10. ブロッカーチューブのマークは、挿管深度の単なる目安であるので、実際の挿管深度は医師の臨床上の判断により決定すること。
11. ジョイントコネクタの気管内チューブコネクタは気管内チューブと、ベンチレーションポートは麻酔回路等と、確実に接続されていることを確認すること。
12. ブロッカーチューブの挿管位置は、聴診、気管支ファイバー、X線透視等により定期的に確認すること。
13. 患者の体位を変えた（体位が変化した）場合は、本品の挿管位置を必ず確認すること。
14. 本品は無理に引張ったり、穴を開ける等の追加工はしないこと。
15. 包装が破損しているもの、その他汚染されている疑いのあるものは使用しないこと。
16. 破損した製品は使用しないこと〔粘膜を損傷する恐れがある〕。
17. 手技に精通した術者が使用すること。
18. ブロッカーチューブを挿管する時は、気管及び気管支損傷等に十分注意し、必ず気管支ファイバースコープ観察下に行うこと。
19. 抵抗を感じた場合は、ブロッカーチューブを進めないこと。
20. 本品の近くでは、レーザー機器や電気手術器を使用しないこと。
21. 気管支をブロックしている時、換気が急に困難になった場合はリザーバカフを直ちに収縮させ、患者の状態を確認し適切に処置を行うこと。
22. 使用中は患者に異常のないことを常に監視し、本品のものと判断される患者の異常を認めた場合には、直ちに患者の安全を図る処置を講じ、患者の安全を確認すること。
23. パラフィン油、オリーブ油、グリセリン等の油系潤滑剤を使用しないこと〔リザーバカフが劣化する恐れがある〕。
24. リドカイン局所エアゾールを使用しないこと〔マークが消失する恐れがある〕。
25. 本品の使用中はパルスオキシメータによる持続的酸素飽和度の測定、気道内圧変化測定、呼気炭酸ガス測定等を用い常に患者の状態をモニターすること。
26. 右主気管支をブロックする場合、右上葉を閉塞することがあるので注意すること。
27. リザーバカフを収縮状態にしても、気管内チューブ内に留置すると気道抵抗の原因となるので注意すること。
28. ジョイントコネクタからブロッカーチューブのみを引き抜かないこと〔リザーバカフ周辺部が破損し脱落する恐れがある〕。
29. 先端保護チューブやリザーバカフが破損、脱落する恐れがあるので、無理な力を加えないこと。
30. 閉塞側肺の換気を行う際には、リザーバカフの脱気を十分に行うこと。
31. オゾンが発生する雰囲気中で本品を使用しないこと。
32. 気管内チューブ内に気管支鏡等を挿入することにより、チューブの内腔が狭くなることがあるので注意すること。
33. 使用後は院内の「廃棄物処理規定」に従って処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、紫外線、ほこり、塩分やイオウ等を含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれの無い場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃等、製品の安定状態に注意すること。
4. 化学薬品のそばやガスの発生するような場所に保管しないこと。
5. 高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間・使用の期限＞

使用期限は外箱及び滅菌包装に記載。（自己認証(当社データ)による）

【包装】

1箱1セット入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

＜製造販売業者＞

大研医器株式会社

大阪府和泉市あゆみ野 2-6-2 TEL 0725-51-2138

＜製造業者＞

大研医器株式会社