

機械器具 62 歯科用切削器
管理医療機器 歯科用エアスケーラ JMDN: 70704000
特定保守管理医療機器 **サリー**

【警告】

1. 本製品の使用中には絶対にジョイントのジョイントリングを後方に引かないこと。また、使用中には絶対にロックボタンを押さないこと。[本体や外ケースの外れによる怪我をまねく恐れがある]



- ** 2. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。[感染予防のため]

【禁忌・禁止】


- * 1. 刃部のあるスケーリングチップ (TU02, TTL1D, TZ01 など) を歯肉縁下など軟組織に接触する部位で使用しないこと。[軟組織を損傷する恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・ステンレス鋼
本体
スケーリングチップ
サリー用ホルダー
- ・シリコーンゴム
Oリング (スケーリングチップ、サリー用ホルダー)

* 形状

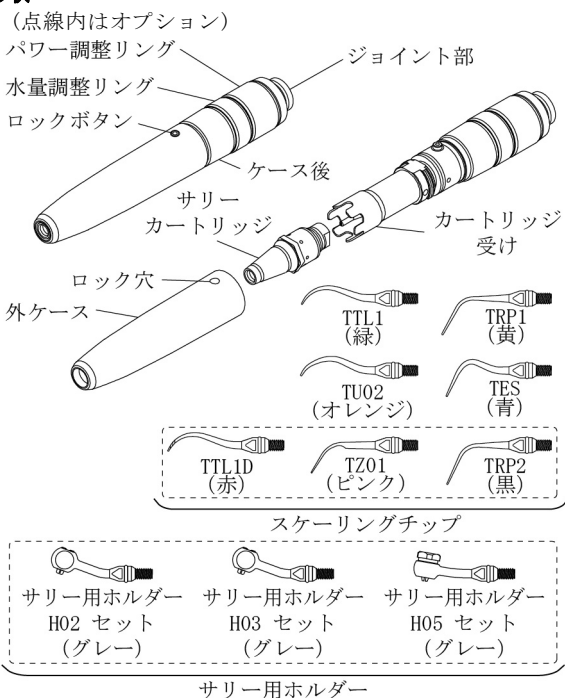

※スケーリングチップ、サリー用ホルダーの括弧内の色はOリングの色

作動・動作原理

圧縮空気によってスケーリングチップなど本体先端に接続するものに機械的な振動を発生させ、その振動を利用して歯面から歯石および歯垢の除去、根管の拡大形成を行う。

仕様

手元圧力: 0.3MPa (3.0kgf/cm²)
振動数: 14,000~18,000Hz

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去、根管の拡大形成を行うために使用する。

【使用方法等】

使用方法

1. 歯石・歯垢除去

1. 本体前部へスケーリングチップを接続する。(治療部位に合せスケーリングチップの中から選択する。)
2. 本体後部へ歯科用ユニットより延伸するホースを接続する。当該ホースは歯科用ユニットよりエアタービンあるいはエアモータなどの切削器械に圧縮空気および水を供給するホースである。
3. フットスイッチを操作し圧縮空気を本体へ供給し振動を発生させ、歯石および歯垢を除去する。
4. フットスイッチを操作し水を送水し冷却および洗浄を行う。
5. 水量は水量調整リングの回転操作により調節する。
6. 使用空気量はパワー調整リングの回転操作により調節する。

2. オプション品の使用 (根管拡大形成など)

詳細については、オプション品 (別売) 付属の医療機器添付文書または取扱説明書を参照し、その内容に従うこと。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 本製品にジョイントを接続する時、ロック音がして確実に固定されたことを確認すること。また、外ケースがしっかりと固定されていることを確認すること。
2. 本製品の使用中には絶対にジョイントのジョイントリングを後方に引かないこと。また、使用中には絶対にロックボタンを押さないこと。
3. 本製品の設定圧力はパワー調整リングをパワー最大にした状態で、手元圧が 0.3MPa (約 3.0kgf/cm²) [ノーバックシステム装着時は 0.38MPa (約 3.8kgf/cm²)] を超えないように設定すること。
4. スケーリングチップは必ず専用品を使用すること。
5. 本製品にはエミール、ルーティール用のスケーリングチップ、根管拡大用ホルダー、レンチなどは使用しないこと。
6. スケーリングチップの装着は、付属の専用レンチによって確実に本体に取り付けること。
7. スケーリングチップ装着時に本製品を使用しない時は、必ずチップカバーを装着すること。
8. パワー調整リングは弱から強へ少しずつ切り替えること。
9. パワー調整リングを調節する時は抜歯などにて強さの感覚をつかんでから行うこと。
10. 水量調整リングを調節する際は、歯面および歯肉への冷却水の供給が十分であることを確認すること。
11. インストルメントの脱落・破損による誤嚥などを防止するために、ラバーダム防湿法や治療中は患者に鼻呼吸をさせるといった対策を行うこと。
12. スケーリングを行う際には必ず十分な水を併用し、スケーリング部位とスケーリングチップを冷却すること。
13. スケーリングチップは下記の場合破損し易い状態になり、怪我などをまねく恐れがあるので速やかに新しいスケーリングチップと交換すること。
 - ・刃先部がスケーリングによって消耗したスケーリングチップ
 - ・腐食したり、錆が発生したスケーリングチップ
 - ・落下などの衝撃を受けて変形したスケーリングチップ
 - ・刃先部をシャープニング、改造、変形させたスケーリングチップ
14. 使用するスケーリングチップの種類や消耗の程度、パワー調整など使用環境によっては作動音の発生や、スケーリングチップの振幅が通常より大きくなる場合がある。

15. 大きな作動音が発生している状態での長時間使用は避けること。
16. 光源がある場合は、ユニットのオブチカスイッチを切ること。
17. 同じ箇所には長時間、スケーリングチップを当てないこと。
18. スケーリングチップを必要以上に挿入し、ポケット底を傷つけないためにポケットの長さを治療前に把握すること。
19. イリゲーション効果を発揮させるためと、根面を損傷しないために十分に注水を行うこと。
20. ポケット内で振動を開始するときはスケーリングチップをポケットに挿入し、ポケットの長さを確認してから行うこと。
21. スケーリングチップを根面に当てる角度はなるべく歯軸に平行になるようにすること。

【使用上の注意】

その他の注意

- * 1. 使用前にアルコール清拭およびオートクレーブ滅菌を行うこと。
- 2. スケーリングチップはあまり強く締めすぎないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 本体、スケーリングチップ、専用レンチは十分に乾燥させて保管すること。

耐用期間・使用期間

製造出荷日から、正規の保守点検を行った場合に限り 5 年とする。ただし、消耗品については使用頻度によって 5 年以内の交換が必要となる。

〔記載の耐用期間は、自己認証（当社データ）による〕

消耗品

1	発振部（サリーカートリッジ）
2	スケーリングチップ
3	サリ用ホルダー

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ** 1. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
- 2. サリーカートリッジを交換する際には、本体からジョイント、インスツルメントを取り外すこと。
- 3. サリーカートリッジを交換した後、外ケースがロックボタンによって確実に固定されていることを確認すること。
- 4. サリーカートリッジを分解しないこと。
- 5. 本体の洗浄には超音波洗浄器を使用しないこと。
- * 6. 本体を流水洗浄する場合は、ジョイント部に水が入らないように注意すること。
- 7. 滅菌前、診療終了後には本体の水抜きをすること。
- 8. 水抜きを行った後は付属の取扱説明書に従って、必ず注油すること。
- 9. 本製品は必ず付属の取扱説明書に記載されている注油方法に従って注油を行うこと。
- 10. 注油スプレー容器は上向きで使用する。
- 11. 注油スプレーによる注油を行う場合、付属の取扱説明書に従って、製品に合ったスプレーノズルで注油を行うこと。
- 12. スケーリングチップは必ず使用後取り外し、スリウエイシリングなどのエアによって乾燥させること。
- * 13. チップカバーはアルコール清拭を行い、オートクレーブ滅菌などの滅菌を行わないこと。
- * 14. 最高滅菌温度は摂氏 135 度のため、オートクレーブ滅菌器の設定は摂氏 121 度で 20 分、または摂氏 132 度で 15 分とすること。
- 15. 薬品が付着している器具とは一緒に滅菌器にかけないこと。
- * 16. 消毒液の中に本体、スケーリングチップをそのままにつけないこと。
- 17. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水（強酸性水、超酸性水）を使用しないこと。
- 18. 乾熱滅菌など、指定の最高滅菌温度を超える滅菌は高温のため、避けること。
- 19. 滅菌トレーは滅菌器の缶体に直接触れないように入れること。
- 20. 滅菌器の状態や滅菌方法によっては、本体および滅菌トレーが変色する場合がある。

21. 滅菌終了後、本体、スケーリングチップ、専用レンチを十分乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** * 発売元

株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0120-178-148（コンタクトセンター）

FAX 03-6880-3920

製造販売元

株式会社ミクロン

〒146-0082 東京都大田区池上 2-17-7

TEL 03-3755-0396（代） FAX 03-5747-5396

製造元

株式会社ミクロン