

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用透析用針 12741002

JMS AVフィスチュラ

(ウィングイーター®)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

針管、キャップ、翼、ウィングイーター、連結管、コネクタ、コネクタキャップ及びクランプからなる。刃面付近にはホールが付く。使用後に針管部分をウィングイーターに収納することにより誤刺を防止する。

なお、仕様によってはクランプが付いていない規格がある。

＜構成（代表例）＞

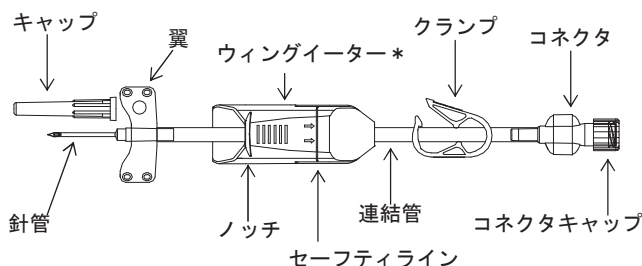

- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。
- ・針管にはステンレス鋼を使用している。*
- ・上記構成と当該製品の構成が異なる場合がある。

＜針管の寸法＞

針管公称外径 (mm)	ゲージ表示 (G)	針管の長さ (mm)
1.8	15	20 25
1.6	16	
1.4	17	
1.2	18	

＜連結管の長さ＞

60 mm～500 mm

【使用目的、効能又は効果】

血液透析中の血液の導出入のために用いる細長い鋭利な針を持つ器具である。

*【品目仕様等】

1. 破断強度

各接合部（針管と針基の接続部は除く）及び連結管は 15N の力で引っ張ったとき破断しない。*

2. 気密性

＜加圧時の漏れ＞

22±2℃の水で満たし、150kPa の圧力を 15 分間加えたとき、水漏れがない。

＜吸引時の漏れ＞

公称容量の 25%まで水を充填した注射筒を接続し、注射筒の押子を最大目盛容量まで引き、陰圧を 15 秒間加えたとき、空気が混入しない。

3. 針基及び針管の接続強度

針管に 20N の引張力及び圧迫力を加えたとき針管は針基の中で緩まない。


【操作方法又は使用方法等】

1. 穿刺

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) 連結管をクランプ又は鉗子等で閉塞します。
- (3) 針管に手を触れないようキャップを取り外します。
- (4) 翼をしっかり持ち、針管の刃面を上にして血管に穿刺します。
- (5) クランプ又は鉗子等を開放し、コネクタキャップを徐々に緩めます。
- (6) 血液の逆流を確認した後、連結管をクランプ又は鉗子等で閉塞します。
- (7) コネクタキャップを取り外し、クランプ又は鉗子等の開閉を調節しながら連結管内のエアを完全に除き、無菌的にコネクタを血液回路等に接続します。
- (8) 血液回路等と接続後、クランプ又は鉗子等を開放し、十分に血液量が確保されることを確認します。
- (9) 両翼及び連結管をテープ等で確実に固定します。

2. 透析終了後、針管の収納

- (1) 穿刺した状態でウィングイーターを翼の位置に移動します。
- (2) 固定用のテープを剥がし、穿刺部をガーゼ等で押さえて人差し指をウィングイーターのノッチにかかるように置きます。（図 1）
- (3) もう一方の手で連結管を持ち、翼がセーフティラインを超えるまで確実に引き込みます。（図 2）
- (4) 連結管を持ち、血液垂れに注意して廃棄します。

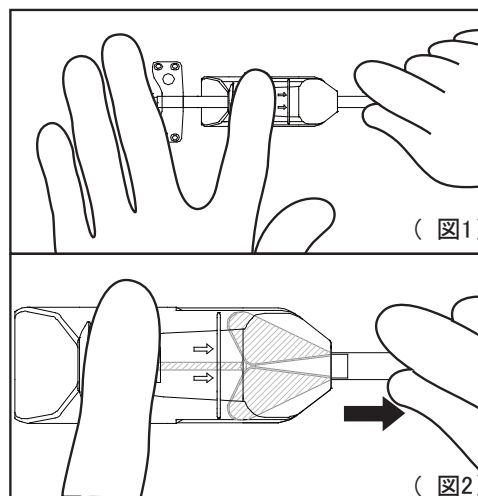

使用方法に関連する使用上の注意

- 使用前に、キャップ及びコネクタキャップの外れ及び緩みがないことを確認すること。
- キャップを取り外す際は、まっすぐ引き抜いて取り出すこと。[針先を傷める可能性がある。]
- コネクタを接続する際は、連結管のねじれ、引っ張りに注意すること。[連結管とコネクタの接続面が剥離し、連結管の外れ、液漏れ等を生じる可能性がある。]
- 接続部に血液又は薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
- クランプ使用時は、クランプ内での連結管のねじれやズレに注意し、確実に閉塞されていることを確認すること。
- 本品のコネクタとコネクタキャップのかん合部には気密性がないため、必要の場合はクランプ、鉗子等を用いて連結管を閉塞する

- こと。また、クランプや鉗子等で連結管を閉塞する場合は、連結管を傷つけないよう注意すること。[液漏れが生じる可能性がある。]
- 透析中はウィングイーターを動かしたり、針管を収納したりしないこと。
 - 針管の抜針及びウィングイーターへの収納時には穿刺部等を強く押さえないこと。[患者の血管及びシャント等を損傷する可能性がある。]
 - 針管をウィングイーターに収納する際は、翼がセーフティラインを超えるまで引き込むこと。[針先がウィングイーターからはみだし誤刺等が発生する可能性がある。]
 - 針管をウィングイーターに収納後、連結管を強く引っ張ったり、押ししたりしないこと。[針管のウィングイーター突き抜け、ウィングイーターの破損、誤刺が発生する可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）が溶出する可能性があるので注意すること。
- 血液透析中に接続部から血液が漏れたり、エアの吸い込みが認められた場合は、再度確実に接続しなおすこと。
- 血液透析中に連結管を折り曲げないように注意すること。[連結管が閉塞する可能性がある。]
- 本品が体の下等に挟まれないよう注意すること。[連結管の折れ、閉塞、部品の破損が生じる可能性がある。]
- 連結管の接続部を曲げたり、連結管を過度に引っ張ったり、押し込むような負荷がかからないようにすること。[接続部の外れ、漏れ、針管の血管からの抜け等が生じる可能性がある。]
- 使用中は以下の事項を絶えず確認すること。
 - (1) 固定不良、詰まり、刃面の血管内壁当り、血管狭窄等による針管及び回路内の血流不足。
 - (2) 返血回路内凝固又は閉塞による静脈圧上昇。
 - (3) 気泡混入。
- 使用中はコネクタのひび割れ、本品と血液回路等との接続部の緩み、外れ、血液漏れ等に注意し、定期的に確認すること。接続部は常に目視で監視できるように、寝具等で覆わないこと。
- コネクタには、アルコール成分を含む消毒剤、局所麻酔剤等を接触させないこと。[コネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、エア混入等の可能性がある。なお、過度な締めつけ等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 漏れが停止しない場合や、製品自体のひび割れ、接続部からの血液漏れ、エア吸い込みが認められた場合は、ただちに新しい製品と交換すること。
- 針管をウィングイーターに収納した後は、ウィングイーター内部を手で触ったり、針先を下に向けたりしないこと。[誤刺、又は血液垂れの可能性がある。]

2. 有害事象

本品の操作中又は使用中に以下の有害事象が認められた場合は、ただちに適切な処理を行うこと。

- 重大な有害事象
血管穿孔、誤動脈穿刺、神経損傷、血腫形成、血管閉塞、空気塞栓症、菌血症、敗血症

3. その他の注意

- 誤刺に注意すること。
- 針部及びコネクタの先端部には直接手を触れないこと。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法でただちに処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限
- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

50 本／箱

40 セット（80 本）／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町 12 番 17 号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806