

ニプロA I Hキャス


再使用禁止

【禁忌・禁止】
○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**本品は、経子宮頸管的に子宮腔内に精子を注入するために使用される滅菌済みのカテーテルセットであり、カテーテル・スタイレット・シリンジから構成されている。

スタイレットなしタイプ

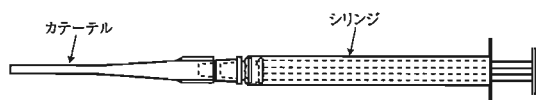

スタイレット付きタイプ

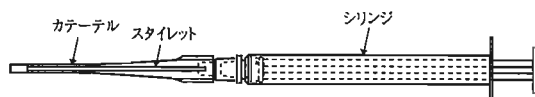


**表 使用材料

カテーテル(チューブ)	スチレン系熱可塑性エラストマー
カテーテル(コネクター)	ポリプロピレン
スタイレット(芯棒)	ステンレス鋼
スタイレット(コネクター)	ポリプロピレン
シリンジ(外筒)	ポリプロピレン
シリンジ(ガスケット)	スチレン系熱可塑性エラストマー

**【使用目的、効能又は効果】

本品は、経子宮頸管的に子宮腔内に精子を注入する目的で使用するものである。

**【品目仕様等】

本品の標準的な仕様は以下の通りである。
カテーテルを4.9Nで引っ張ったとき、シャフトは破断及びき裂を生じない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品を開封後、各構成部品(カテーテル、スタイレット、シリンジ)が正しく接続されていることを確認して下さい。
[注意]構成部品が単体で包装されている場合には、手技に必要な周辺関連機器としっかりと接続すること。
[注意]接続の際には、無菌的管理を徹底すること。
- **2. 洗浄・濃縮した精子をゆっくりと吸引して下さい。又、スタイレット付きタイプの場合は、必要に応じ挿入部位の形状に合わせ、スタイレットの形を整えて下さい。
3. 子宮頸管を傷つけないようにゆっくりとカテーテル先端が子宮口を越える位置まで挿入して下さい。
- **4. 精子を子宮腔内にゆっくりと注入して下さい。この時、スタイレットを抜く必要はありません(スタイレット付きタイプの場合)。
5. 本品を患者より抜去した後は感染防止に十分留意し、安全な方法で廃棄して下さい。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 開封は使用直前に行うこと。
- 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用期限
内箱の使用期限欄を参照のこと(自己認証による)。

*【包装】

1箱 20本入り(個包装)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売(お問い合わせ先)
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話番号: 06-6372-2331(代表)

製造
ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社