

機械器具 7 内臓機能代用器

高度管理医療機器

連続ポータブル腹膜灌流用運搬セット 35986000
(腹膜灌流用チューブセット 35000000)
(腹膜灌流液注排用チューブ及び関連用具セット 70591000)
(腹膜灌流用回路及び関連用具セット 70592000)

JMS CAPD 接続チューブ

再使用禁止

*(コネクタタイプ用)

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

〈構成〉


腹膜透析液接続部、クランプ、カテーテルアダプタ接続部からなり、付属品としてロックスパナを添付する。

1. 接続チューブ

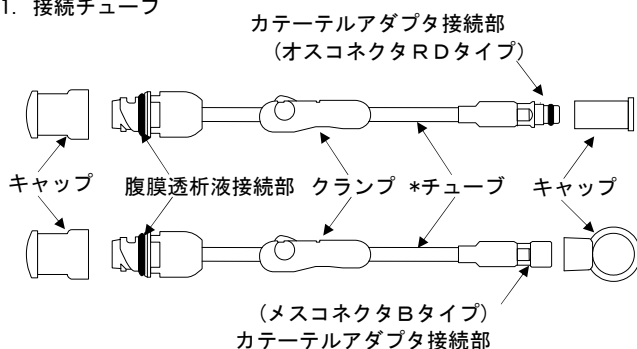

2. 付属品

(1) ロックスパナ

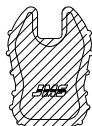

*・本品には以下の原材料を使用している。

構成部品	原材料
腹膜透析液接続部	ポリカーボネート、シリコーンゴム
チューブ	シリコーンゴム
オスコネクタ RD タイプ	ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム
メスコネクタ B タイプ	ポリブチレンテレフタレート、シリコーンゴム

〈仕様〉

項目	性能
気密性	49.0kPa

【使用目的又は効果】

本品は、連続携帯式腹膜灌流 (CAPD) に用いられる。

接続チューブは、透析液の交換時に使用され、透析液を腹腔から排液し、新しい透析液を腹腔へ注液するための腹膜灌流注排用チューブである。ロックスパナは接続チューブを交換する際に、必要に応じて使用する補助具である。

**【使用方法等】

〈組み合わせて使用する医療機器及び医薬品〉

*1. 腹膜透析液接続部には、以下のいずれかを接続します。

*(1) 腹膜透析液

販売名	承認番号
ペリセート 360N 腹膜透析液	22100AMX00523000
ペリセート 400N 腹膜透析液	22100AMX00524000
ペリセート 360NL 腹膜透析液	22100AMX00521000
ペリセート 400NL 腹膜透析液	22100AMX00522000

*(2) 腹膜灌流回路等

販売名	承認番号
APD 回路 PD-Mini	21000BZZ00218000
CAPD バッグフリー交換セット	20100BZZ00880000
JMS PD キャップキット S	21600BZZ00477000

2. カテーテルアダプタ接続部には、以下のカテーテルアダプタを接続します。

タイプ	販売名	承認番号
オスコネクタ RD タイプ	JMS CAPD システム	16100BZZ00696000
メスコネクタ B タイプ	CAPD カテーテル	20900BZZ00647000

3. 接続チューブ交換時には、以下の交換キットを使用します。

販売名	承認番号
JMS CAPD エキステンションチューブ	16300BZZ01080000

〈使用方法〉

1. 準備

* (1) 本品と交換キットを用意します。

* (2) 交換キットの包装を開封し、手洗いを行い、マスクを着用します。

(3) シーツを患者の下腹部の上に敷きます。その際、シーツのカット部がカテーテルの出口部に合うように敷きます。

(4) 十分に手洗いを行い、手袋を着用します。

(5) ガーゼに 10% ポビドンヨード水溶液を含ませます。(以下、消毒用ガーゼという。)

2. 接続チューブの取り外し

* (1) 患者の腹腔内に留置された腹膜透析用カテーテル (以下、カテーテルという。) と接続チューブの接続部を中心に、カテーテル側、接続チューブ側それぞれ 10 cm 程度、消毒用ガーゼで 1 分間よくこすり消毒します。

(2) 消毒用ガーゼで、カテーテルアダプタ接続部を消毒します。

(3) カテーテルをクランプし、カテーテルアダプタから接続チューブを取り外します。

(4) カテーテルアダプタを消毒します。

(5) 手袋を外します。


3. 新しい接続チューブの接続

* (1) 新しい接続チューブの包装を開封します。

(2) 再度、十分に手洗いを行い、新しい手袋を着用します。

(3) 新しい接続チューブのクランプを閉じます。

- (4) 消毒済みのカテーテルアダプタと新しい接続チューブをしっかりと接続し、ロックスパナで更にしっかりと締めます。(図 1)

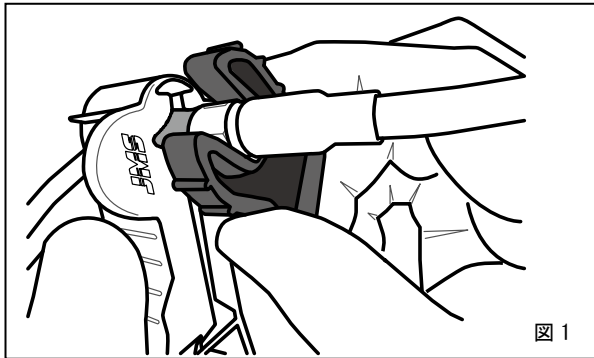

- (5) カテーテルのクランプを取り外します。

** (6) 新しい接続チューブのクランプを開きます。


** (7) 生理食塩水等を充てんしたシリンジを腹膜透析液接続部に挿入し、透析液流路の確実な開通とカテーテル内の洗浄をします。

4. 腹膜透析液の排液及び注液

- (1) 接続チューブと腹膜透析液等を接続後、クランプを開放して排液を開始します。
- (2) 排液及びプライミング終了後、注液を開始します。
- (3) 注液終了後、接続チューブ及び腹膜透析液のクランプを閉じます。
- (4) 接続チューブから腹膜透析液等を取り外し、JMS PD キャップキットSの保護キャップを装着します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. アダプタホルダで接続チューブを保持する場合は、カテーテルアダプタ接続部のナット部を挟むこと。(図 2) [収縮チューブを挟むと収縮チューブに亀裂が生じ、カテーテルアダプタ接続部が外れるおそれがある。]

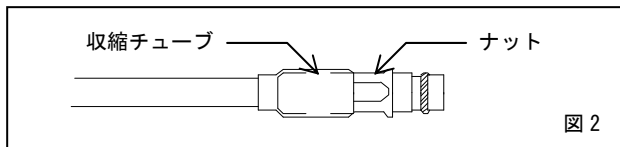

- *2. カテーテルアダプタ接続部にカテーテルアダプタを接続する場合は、傾いた状態でねじ込まないこと。[カテーテルアダプタのネジ山と干渉し、ネジ山が破損し接続できなくなるおそれがある。]
3. カテーテルをクランプする際は、カテーテルアダプタから 3~4cm 離れた位置にクランプを装着し、閉塞すること。[カテーテルアダプタに近い位置でクランプすると、カテーテルが破損するおそれがある。]
4. 腹膜透析液と接続する際は、接続チューブの腹膜透析液接続部を下方に向け接続すること。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- *1. 接続チューブのカテーテルアダプタ接続部及び通液部を不潔にした場合は使用しないこと。不潔にした場合は速やかに医療機関に連絡するよう患者に指導を行うこと。[腹膜炎を併発するおそれがある。]
2. 腹膜透析液の交換を行わない間は、保護キャップを接続チューブから外さないこと。
3. 腹膜透析液を交換終了後、接続チューブの腹膜透析液接続部に保護キャップを必ず装着し、交換ごとに新しい保護キャップを使用すること。
4. 接続チューブの交換は、腹腔内に腹膜透析液が入っているときに行うこと。
5. チューブの接合部を曲げたり、チューブを過度に引っ張ったり、押し込むような負荷がかからないようにすること。[接合部の外

れ及び液漏れ、チューブの破損等が生じるおそれがある。]

6. 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
7. 本品を交換する際は、カテーテルを引っ張らないよう注意すること。
- *8. 消毒には、10%ポビドンヨード水溶液を使用すること。[アルコール等の有機溶剤を使用するとひび割れが生じるおそれがある。]

*〈不具合・有害事象〉

*1. その他の不具合

漏れ、外れ、亀裂、緩み、破損

*2. その他の有害事象

腹膜炎

【保管方法及び有効期間等】

〈使用期間〉

6 ヶ月 [自己認証(当社データ)による]

〈有効期間〉

3 年 [自己認証(当社データ)による]

包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

**電話番号：03-6404-0602(血液浄化営業部)