

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用プレート 35241003
(体内固定用ネジ 16101003)

再使用禁止

NCBプレーティングシステム

**【禁忌・禁止】

(1) 適用対象（患者）

次の患者には使用しないこと。

- ・インプラントの安定した固定が不可能となるような骨質の欠損または骨質不良の患者 「インプラントを適切に固定できないおそれがある」
- ・急性または慢性、局所または全身性感染症の患者 「術部に病巣が移り良好な手術結果が得られないおそれがある」
- ・インプラントの機能を損ね、手術の成功を妨げる可能性がある合併症が認められる患者 「良好な手術結果が得られないおそれがある」
- ・インプラント材料に対するアレルギーを有する患者 「アレルギー症状の発生するおそれがある」
- ・重度の筋肉、神経、血管疾患の患者 「インプラントを適切に固定できず、良好な手術結果が得られないおそれがある」

(2) 併用医療機器 [相互作用の項参照]

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと 「適切に機能せずに緩み、摩耗、破損等が生じるおそれがある」
- ・チタン合金又はコバルトクロム合金をステンレス鋼と併用しないこと 「ガルバニック腐食が発現するおそれがある」

(3) 使用方法

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、骨片を固定することを目的に使用するプレート及びビスクリューである。プレートは、長管骨骨端部、距骨又は踵骨の骨折の固定に使用し、一端が使用部位の骨の形態に合致した形状である。
- ・包装ラベルに記載されている表示、サイズと一時的内固定材料上の表示とが一致していることを確認すること。

製品名	製品外観
大腿骨用プレート	
上腕骨用プレート	
脛骨用プレート	
スクリュー	
ロッキングナット	

スクリューインサート
(色付きのもの含む)



材質：チタン-6アルミニウム-4バナジウム合金


【使用目的又は効果】

本品は、骨片を固定することを目的に使用するプレート及びビスクリューである。


【使用方法等】

(1) 基本的な使用方法


1. 術前にレントゲン、CT、MRI等により骨折の位置、距離、角度を確認し、適切なプレート及びビスクリューを選択する。
2. 患部の位置まで皮切し、展開・整復する。
3. プレートを患部に当てがう。

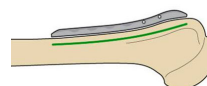

※スクリューホールへの生体組織進入防止やプレートと骨の整復位置を密着させないでスクリュー固定することが適切な場合等、必要に応じてスクリューを使用しないスクリューホールにスクリューインサートを補助的に設置する。

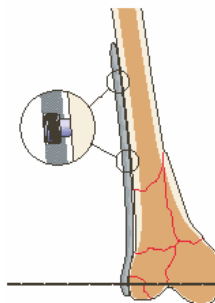


4. 専用の手術用器械を使用して骨に下穴をあけ、スクリューホールを通して各スクリューを適切な角度で骨へねじ込む。

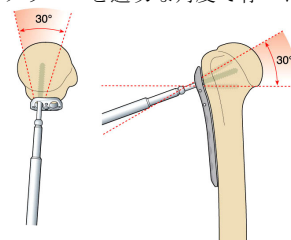


3. 5MMロッキングスクリューを使用する場合

スクリューホールを通してあらかじめ決められた角度にスクリューを専用の手術用器械を使用してねじ込み、ロッキングを行う。ロッキングナットは使用しない。

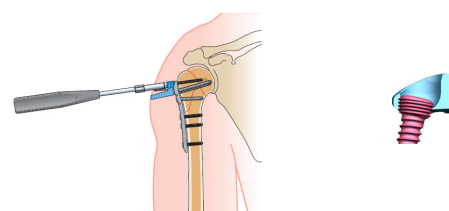

手術手技書を必ずご参照ください

5. ロッキングナットでプレートにスクリューを固定し、整備を完了する。

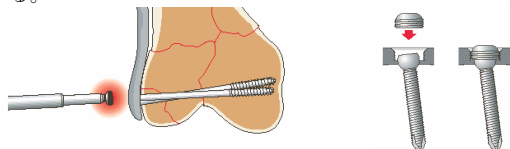

6. 術部を閉じる。

(2) 併用医療機器

販売名	承認番号	構成品名
Tiユニバーサル ロッキングシステム (滅菌)	22600BZX 00443000	・3.5MM ロッキングスクリー セルフタッピング
NCB Periprosthetic Femur プレート	22500BZX 00506000	・NCB スクリュー φ5.0 ・NCB ユニコーティカル スクリュー ・NCB ディープスレッド スクリュー ・NCB ケーブルボタン ・ヘックスボタン
NCB 用 MotionLoc スクリュー (滅菌済)	22400BZX 00365000	・5.0mm NCB 用 MotionLoc スクリュー (滅菌済み) ・4.0mm NCB 用 MotionLoc スクリュー (滅菌済み)
NCB ストレート ナローシャフト プレート	22700BZX 00098000	・NCB ストレートナロー プレート

【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- ・包装ラベルに記載されている表示、サイズと一時的内固定材
上の表示とが一致していることを確認すること。
- ・以下の要因は術後成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
 - 局所限局性骨腫瘍の患者
 - 妊娠している患者
 - インプラント材料に対するアレルギー反応の疑いがある患者
 - 体重が重い患者、肥満
 - 骨粗鬆症または骨軟化症の患者
 - 全身性疾患または代謝障害がある患者
 - 抵抗力が低下している患者 (HIV、腫瘍、感染症)
 - 偏食、薬物乱用、喫煙、飲酒、麻薬を使用している患者
 - 強い振動と急激な動きを伴う身体活動によりインプラントが衝
撃や過剰な負荷を受けるとと思われる患者
 - 医師の指示を理解し従うことができない患者
 - 重度の変形のある患者
- ・適切な術前計画及び手術手順 (手術手技に関する知識、一時的
内固定材料の正しい選択及び位置決めを含む) は本材料の使用
を成功に導くための重要事項であるので慎重に実施すること。
- ・術前計画にはX線画像を用いること。
- ・術前に患者の一時的内固定材料に対するアレルギーや他の反応
について考慮し除外すること。
- ・可動性を保ち、転位や血栓塞栓症を予防するために患者の状態
に応じて術後管理は慎重に計画すること。
- ・患者に対してインプラントの限界 (インプラントが受ける荷重
量限界)、可動域、許容される活動量について必ず指導すること。
- ・早期の重量負荷は慎重に管理すること。
- ・インプラントの位置変化と構成品のルースニングや破損の徴候を
検出するため、術後に定期的にX線検査を行うことを推奨する。
- ・術肢に異常な変化が認められた場合は、適切な処置を施すこと。
- ・本品を埋植している限り、新規又は再発性の感染源を継続的に
調査すること。
- ・医師は次の注意事項について理解し、患者に対しインフォーム
ド・コンセントを十分行うこと [重篤な不具合、有害事象が発
現するおそれがある]。
- ・すべてのインプラントは、摩耗や老朽化が不可避である。

- ・時間の経過とともに当初安定した状態で埋植されたインプラ
ントが緩んだり、機能性が損なわれたりしていく可能性がある。
- ・インプラントの摩耗、老朽化、破損やルースニングにより再手
術が必要となる可能性がある。
- ・埋植部位の感染は、しばしば再手術が必要となるため、患者に
悪影響を及ぼす場合がある。
- ・防護用キャップやその他の防護用具は、使用直前まで取り外さ
ないこと。
- ・インプラントは一時使用目的に設計されており、骨が正常機能
を回復した時点で通常抜去される。抜去の判断は担当医師が責
任を持って行うこと [二次感染、アレルギー、素材疲労 (破損)、
インプラントの不具合や血液循環不全などの有害事象が発現す
る危険性は、埋植時間、融合不全、患者の体重や活動性の増加
とともに高くなる]。
- ・スクリー/プレートの構造を確実に維持するためには、負荷の
かかっている骨折部位それぞれを2つ以上のスクリーで留める
必要がある。遠位もしくは近位の海綿骨状の部位が骨折した場合、
その部位は全てのスクリーを使用することを推奨する。
- ・非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示さ
れている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件
下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である。
(自己認証による):
 - ・静磁場強度: 1.5 T、3.0 T
 - ・静磁場強度の勾配: 2500 Gauss/cm 以下
 - ・MR 装置が示す全身最大 SAR: 2 W/kg (通常操作モード)
 - ・最大 60 分間の連続 RF スキャンが可能である。
 - ・高周波 (RF) による火傷から守るために、患者とガントリ内
壁の間に非導電性パッドを挟むこと。
 - ・患者の脚と脚が接触しないよう、膝の間に非導電性パッド
を挟むこと。
 - ・患者の腕や手、皮膚同士が接触しないようにすること。
 - ・このインプラントの存在によりアーチファクトが生じる可
能性がある。

T: Tesla、磁束密度の単位、1 T = 10,000 Gauss
SAR: 単位組織質量あたりの吸収熱量、単位は W/kg

- ** (2) 相互作用 (他の医療機器等との併用に関すること)
併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状・ 措置方法	機序・ 危険因子
弊社が指定した 製品以外	併用不可	設計・開発方針が異なる ため、適切に機能せず、 緩み、摩耗、破損等が生 じるおそれがある。
チタン合金又は コバルトクロム 合金	ステンレス鋼と 併用不可	ガルバニック腐食が発現 するおそれがある。

- ** (3) 不具合・有害事象

- ・重大な不具合
 - インプラントの破損、折損、変形、ルースニング、摩耗
 - 不適切な設置位置
 - 金属インプラントの腐食
 - コンポーネントの分解
- ・重大な有害事象
 - 感染症
 - 不適切な可動範囲や手術した肢の望ましくない短縮又は延長
 - 骨折、骨穿孔
 - 圧迫又は血腫による一過性又は永続性神経損傷
 - 周囲の神経障害
 - 創部血腫及び創傷治癒の遅延
 - 静脈血栓症、肺塞栓症、心停止を含む心血管疾患および循環器
の合併症
 - 自由な運動の制約
 - 製品の腐食や摩耗に対する組織球性肉芽腫等の組織反応
 - 金属アレルギー、炎症反応
 - 偽関節症の発症

手術手技書を必ずご参照ください

- 疼痛
- 脱臼及び亜脱臼
- 術中及び術後の骨折
- 疲労破損
- 骨溶解、骨吸収、骨壊死
- 虚血壊死
- 修正手術又は再手術
- 周辺の軟部組織の損傷
- 死亡
- 金属イオン濃度の上昇
- 可動域の変化
- 関節の不安定性
- 整復の喪失
- 変形癒合、癒合遅延、癒合不全
- 末梢神経障害
- 変形性関節炎

【保管方法及び有効期間等】

- ・貯蔵・保管方法
高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所にて保管すること。
- ・有効期間・使用の期限
外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

【主要文献及び文献請求先】

文献請求先
ジンマー・バイオメット合同会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号：03-6402-6600（代）
主たる設計を行う製造業者：
Zimmer Inc.、米国、
Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH、スイス

手術手技書を必ずご参照ください