

CHSシステム

再使用禁止


- * **【禁忌・禁止】**
- 1. 適用対象**
以下の患者に使用しないこと。
・精神疾患のある患者。〔医師の指示に従えず、術後管理が不十分になる可能性〕
・骨粗しょう症、骨吸収や関節症、軟部組織の欠損・脆弱、他インプラントの設置が困難な患者。〔骨折・骨癒合不全を生じる可能性〕
・金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者。
・アルコール依存若しくは薬物の濫用がある患者〔医師の指示に従えず、術後管理が不十分になる可能性〕
 - 2. 併用医療機器**
使用の禁止 〔【使用上の注意】〈相互作用〉併用禁忌の項参照〕
 - 3. 使用方法**
再使用の禁止 〔折損の原因・感染の危険〕

* **【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

本システムを構成する各製品の形状は下記の通り。
なお、本添付文書に該当する製品の承認番号、製品名、サイズ等については、包装表示ラベルに記載されております。
表面の色調: 青

1) プレート

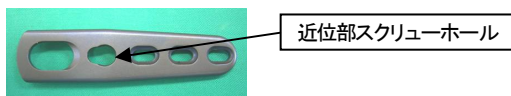

商品コード	商品名
11-795-02	CHSシステムプレート3穴
11-795-03	CHSシステムプレート4穴
11-795-04	CHSシステムプレート5穴

2) バレル



商品コード	商品名
11-796-01	CHSシステムバレルつばなし前捻0°
11-796-02	CHSシステムバレルつばなし左用前捻10°
11-796-03	CHSシステムバレルつばなし右用前捻10°
11-796-11	CHSシステムバレルつば付きショートタイプ 前捻0°
11-796-12	CHSシステムバレルつば付きショートタイプ 左用前捻10°
11-796-13	CHSシステムバレルつば付きショートタイプ 右用前捻10°
11-796-21	CHSシステムバレルつば付きロングタイプ 左用前捻0°
11-796-22	CHSシステムバレルつば付きロングタイプ 左用前捻10°
11-796-23	CHSシステムバレルつば付きロングタイプ 右用前捻0°
11-796-24	CHSシステムバレルつば付きロングタイプ 右用前捻10°

3) ラグスクリュー



キータイプ

商品コード	商品名
11-797-02	CHSシステムラグスクリュー65
11-797-03	CHSシステムラグスクリュー70
11-797-04	CHSシステムラグスクリュー75
11-797-05	CHSシステムラグスクリュー80
11-797-06	CHSシステムラグスクリュー85
11-797-07	CHSシステムラグスクリュー90
11-797-08	CHSシステムラグスクリュー95
11-797-09	CHSシステムラグスクリュー100
11-797-10	CHSシステムラグスクリュー110
11-797-11	CHSシステムラグスクリュー120
11-797-12	CHSシステムラグスクリュー130

キーレスタイプ

商品コード	商品名
11-797-52	CHSシステムラグスクリューキーレス65
11-797-53	CHSシステムラグスクリューキーレス70
11-797-54	CHSシステムラグスクリューキーレス75
11-797-55	CHSシステムラグスクリューキーレス80
11-797-56	CHSシステムラグスクリューキーレス85
11-797-57	CHSシステムラグスクリューキーレス90
11-797-58	CHSシステムラグスクリューキーレス95
11-797-59	CHSシステムラグスクリューキーレス100
11-797-60	CHSシステムラグスクリューキーレス110
11-797-61	CHSシステムラグスクリューキーレス120
11-797-62	CHSシステムラグスクリューキーレス130

4) 固定ネジ



商品コード: 11-795-51

2. 材質

チタン合金 (Ti-6Al-4V ELI)

3. 原理

骨折部をチューブプレートとラグスクリューとの組合せによって適切な整復及び圧迫ができ、骨癒合までの補助として機能します。

* **【使用目的又は効果】**

大腿骨近位で骨折した骨頭を固定するために用いる。

* **【使用方法等】**

1. 使用前

- 術者は術前に関節インプラントの選択及びその寸法のほか、骨内での位置決め観点から手術計画を立てる必要があります。
- 本品は滅菌済みであり、開封後直ちに使用できます。
- 手術手順、詳細は、手術手技書をご覧ください。

2. 使用方法

1) 展開

大転子部を鉤又はレトラクターにて展開します。

2) ガイドピン の 刺入

専用ガイドを大腿骨外側面にあて、大腿骨頭中心にガイドピンが向かうようにします。

- 3) 計測
専用ゲージを用いて骨内に刺入されているガイドピンの長さを計測します。
- 4) リーミング
専用リーマーの目盛りを、測定したガイドピンの長さより 5mm 引いた長さに設定し、リーミングを行います。
- 5) ラグスクリューの挿入
専用挿入抜き器にラグスクリューを装着し、骨内に挿入します。挿入後ガイドピンを抜き取ります。
- 6) プレートの組立て
プレートにバレルを装着します。
- 7) プレートの挿入
ラグスクリューに組込みます。
- 8) スクリューの挿入
専用ドリルガイドと専用ドリルにてドリリングをし、専用タップでタッピングをした後、プレートを皮質骨ネジで固定します。
- 9) 縫合
創傷用ドレーンを入れて切開層を縫合します。
3. 使用後
原則として患者の症状に合わせ、術後骨癒合がおこった後に抜去してください。
4. 使用方法に関する使用上の注意
- ・使用する際は当社推奨の手術器具を使用してください。また、インプラントはキズが付かないように取り扱いってください。
 - ・患者に埋め込んだ製品のトレーサビリティが確認できるように、カルテに「使用した製品名、製品番号、ロット番号」が転記されているラベルを貼付してください。
 - ・スクリュー設置の際は、必ず専用のドリルガイドを使用してドリリングを行ってください。
使用されない場合、スクリューの折損、変形、ずれが生じる恐れがあります。
 - ・ラグスクリューの刺入位置を正面像で骨頭中心かそれよりも遠方に、側面像で骨頭幅の中 1/3 にし、深さは軟骨下骨近傍まで十分に刺入してください。

*** 【使用上の注意】**

1. 使用注意（次の患者には慎重に使用すること）
- ・感染症の患者〔感染巣の転移や敗血症併発の恐れがある。〕
 - ・骨形成、骨量・骨質が充分でない患者〔充分な固定が得られず、再骨折やインプラント材料の折損等により不具合発現の可能性がある場合。〕
 - ・糖尿病などの生活習慣病、慢性リュウマチの患者〔骨形成が阻害され骨癒合が遅れることにより不具合発現の可能性があること〕
 - ・変性疾患の患者〔インプラント材料との形状不適合等により不具合発現の可能性がある〕
 - ・てんかんの患者〔医師の指導に従えず、術後管理が充分に行えないことにより不具合発現の可能性がある場合〕
 - ・肥満体〔患者の体重が原因で骨との固定に失敗したり、インプラント材料の変形や折損したりすることにより不具合発現の可能性がある場合〕
 - ・高齢者〔5. 高齢者への適用の項参照〕

2. 重要な基本的注意

インプラントを変形させたり曲げたりすると、疲労強度が低下して負荷がかかった時に壊れる可能性があります。

3. 相互作用

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序 危険因子
他社製インプラント	摩耗、緩み、摩耗粉等が発生する。	開発コンセプトが一致しないため、適正な組合せが得られない。
他社製インプラント 材質の異なるインプラント	腐食による不具合の危険性が高まる恐れがあります。	異種の金属が相互に触れ合うと、電気化学的腐食が起きる。

4. 不具合・有害事象

〔本品の使用により、予想される不具合・有害事象（これに限らない）を以下に記します。この様な異常が見られた時は適切な処置を行ってください〕

- 1) 重大な有害事象
- ・インプラントの破損及び破損に伴う再骨折
 - ・インプラントの弛緩、脱転
 - ・骨短縮
 - ・骨壊死
 - ・金属・異物アレルギー反応
 - ・術後侵襲に起因する血栓を含む血管障害及び周囲の神経損傷
 - ・肺動脈塞栓等の塞栓症及び心停止
 - ・二次感染
- 2) その他の有害事象
- ・偽関節、遷延癒合、変形癒合
 - ・骨密度低下
 - ・不快感、違和感またはインプラントの存在による精神的不安定状態の発生
 - ・疼痛
 - ・抜去困難
 - ・血行再生阻害
 - ・金属製インプラントに起因する X 線や CT、MRI への影響

5. 高齢者への適用

高齢者に使用する場合は、骨粗鬆症などにより、術中の操作で生じた負荷やモーメントによる骨折や術後の固定力の低下によるルーズニングが生じることがあるので、慎重に使用し治療の経過にも十分注意してください。

*** 【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法
本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。
2. 有効期限・使用の期限
有効期間は外箱に記載してあります。（自己認証による）

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者
ミズホ株式会社
TEL 03-3815-3096

製造業者
ミズホ株式会社 五泉工場