

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 * 吸収性骨再生用材料 JMDN コード：70437204
骨補填材 オスフェリオン 60

再使用禁止

【警告】



本品を補填する際、補填材が軟部組織や関節内など骨組織以外の部分に入ってしまった場合は、これを可及的に除去すること。【局所熱感、発熱、疼痛、腫脹、膿等が発現する場合がある】

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・整形外科領域以外の骨補填の目的には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

本品は、β-リン酸三カルシウムからなる白色を呈した多孔質顆粒、ブロック状多孔体及び円筒状多孔体である。

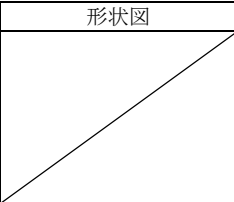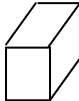形状図	タイプ	サイズ(mm)
	60G2-2	1.0～3.0
	60G2-5	1.0～3.0
	60G3-2	2.8～5.0
	60G3-5	2.8～5.0
	60G4-2	4.7～8.0
	60G4-5	4.7～8.0
	60A1	10×10×10
	60A2	20×10×10
	60A3	30×20×10
	60A4	50×30×10
	60B0820	φ8×20

【使用目的、効能又は効果】

整形外科用骨補填材として使用するものであり、外傷や疾患で骨欠損部または空隙部があり骨移植を必要とする症例に対して、骨の代替物として使用する。脛骨高原骨折や臼蓋再建時などの例で周辺の皮質骨や固定材と共に充填部の支持性を補強するための圧入補填が必要な場合に使用する。

*【品目仕様等】

性能
骨補填材 オスフェリオン 60


性能	化学式	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
	Ca/P 原子数比	1.5
	気孔率	53～67%
	圧縮強度	圧縮試験の定義：ある一方向から垂直な荷重を掛けること 圧縮強度：10MPa 測定条件：一辺 1cm の本品立方体を 0.5mm/分のスピードにて圧縮し、完全に破壊されるまでの最大荷重を測定する。この荷重を受けている面積で除して最大圧力を算出し、この圧力値を最大圧縮破壊強度とする。

(圧縮強度：出荷規格)

*【操作方法又は使用方法等】

1. 術前確認 1-1. 局所の諸検査（血液検査、X 線検査等）により、本品の適用の可否を検討する。
2. 開 梱 2-1. 外箱を開梱して、製品の入った滅菌パックを取り出す。
2-2. 使用の前に、外箱及び滅菌パックの記載内容、滅菌パックの破損の有無、本品の形状を確認する。

3. 滅菌パック開封

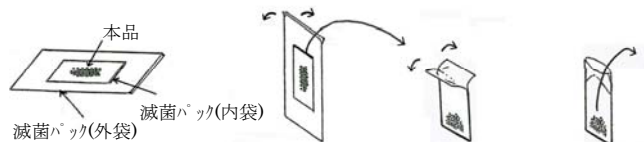


- ①外袋のビールパックを矢印の方向に開く。清潔な手指にて、内袋を取り出す。
- ②内袋のビールパックを矢印の方向に開く。
- ③中の製品を無菌的に取り出す。

3-1. 滅菌パック外袋を、開封部より開封する。

3-2. 手術用手袋をした清潔な手指にて、滅菌パック内袋を取り出す。

4. 補 填

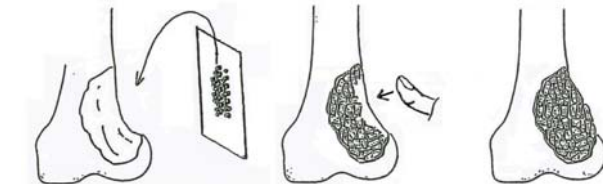

- ①骨の空隙部に直接本品を入れ込む。必要に応じて自家骨と混合してから、補填する。
- ②本品を指圧又は、器具を用いて、補填する。
- ③補填不良部を残さないように補填する。

4-1. 患者の骨欠損部又は、空隙部に製品を指圧又は、器具を用いて補填する。

*4-2. 補填部に応じて本品を原型のまま、またはブロック体/円筒体に対して、必要な大きさに切削あるいは破砕し、本品を単独で、または必要に応じて自家骨と混合して骨欠損部に補填する。

4-3. 自家骨との混合は、骨欠損の大きさ、骨欠損による支持性の低下、補填部にかかる荷重の程度など、骨欠損、空隙部の性状を考慮し、その必要性を判断する。

4-4. 圧入補填が不要な場合、非荷重部の軽微な骨欠損や良性骨腫瘍の掻爬後などの骨補填には販売名：骨補填材 オスフェリオンを選択する。

4-5. 本品を補填する際は、空隙部又は骨欠損部に対して、気孔性状を損なわれないように（気孔が潰れないように）丁寧に状況を確認しながら補填する。

4-6. 本品が母床骨と直接接触し、血流を確保するように補填する。

5. 術後確認

5-1. 術後、定期的に本品の補填状況を X 線写真等で観察する。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
次の患者に対しては本品を使用する利点とその危険性を十分に考慮し、それぞれの専門の立場から適用の可否を判断すること。
 - ・ステロイド剤投与中の患者
 - ・人工透析中の患者
 - ・悪性腫瘍の患者
 - ・医師の管理下でない糖尿病患者
 - ・腎臓や消化器などカルシウム代謝系器官の異常や膠原病などの疑いのある患者
 - ・血液疾患、骨標的ホルモン代謝異常の患者
 - ・免疫不全症の患者
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある患者
 - ・アレルギー体質の患者
 - ・その他の適用が不適当であると考えられる患者

2. 重要な基本的注意

- (1)本品の使用に際しては、患者の全身症状、局所症状を十分に考慮して、決定すること。また、初期の骨形成量が販売名：骨補填材 オスフェリオンに比べて少ない点を十分に考慮すること。
- (2)本品は販売名：骨補填材 オスフェリオンに比べ強さを改善しているが、本品単独で大きな荷重を受けることはできない。本品を、関節面直下など荷重が大きくかかる部位、骨皮質の欠損や菲薄化などにより支持性が低下している症例に用いる際は、自家骨とともに用いたり、内固定材あるいは外固定材と併用したり、免荷期間の延長などを行うこと。
- (3)本品は販売名：骨補填材 オスフェリオンに比べ吸収・骨置換が遅いので、本品を使用した患者の使用状況及び回復の程度に応じて、術後観察期間の長さを取ること。
- (4)骨折等、支持性がないあるいは低下している症例に使用する場合、内固定材、外固定材などを用いて確実に固定が得られる症例にのみ本品を使用すること。
- (5)補填時に圧をかける場合インパクトにて補填すること。
- * (6)本品は強い衝撃や無理な力がかかるとヒビが入ったり、欠けたりする恐れがある。本品を切削あるいは破碎等加工して使用する場合は、十分に注意すること。
- ** (7)本品と同一の成分である販売名：骨補填材 オスフェリオンにおいて因果関係は不明だが当該品が消失した症例を確認している。骨腫瘍症例については病変組織を完全に搔爬・除去すること、炎症を伴う症例については炎症を鎮静化させる等、患者の症状に応じて、適切な処置を行い、【操作方法又は使用方法等】の4-6に記載のとおり、本品が母床骨と直接接触し、血流を確保するように補填すること。
- (8)保管の際は【貯蔵・保管方法及び使用期間等】に従い保管すること。
- (9)表示された使用期間が過ぎている場合は、使用しないこと。
- (10)本品は高圧蒸気滅菌済みである。開封後は無菌的に取り扱い、滞りなく使用すること。
- (11)滅菌パックが破れているなど何らかの異常が見つかった場合は使用しないこと。
- (12)使い残した場合は使用しないこと。本品はディスプレイ製品であり、再滅菌して使用することはできない。

3. 相互作用

〔併用注意〕（併用に注意すること）

骨セメントや形状賦形型人工骨（例：ペーストタイプ人工骨など）との併用の際、本品の気孔連通性が損なわれると、自家骨置換の機能が低下する恐れがある。

4. 不具合・有害事象

本品と同一の成分である販売名：骨補填材 オスフェリオンは、以下のような不具合・有害事象の報告を受けている。本品においても同様な不具合・有害事象の発現の可能性がある。これらの症状が発現した場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

- (1)軟部組織など骨組織以外に飛散による局所熱感、発熱、疼痛、腫脹、膿
- (2)荷重部位への補填において術後、補填部の骨折
- (3)病巣搔爬後の補填において発熱、発赤、膨張
- (4)欠損部の補填において炎症（滑膜炎）
- (5)以上のような熱感、発熱、疼痛、腫脹、発赤、膨張、膿、痛み等

** (6) 消失

5. その他の注意

パッケージを開封した後、使用しなかった製品は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、常温、常湿かつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。
- * 2. 有効期間・使用の期限
外箱に表示された使用期限を確認すること。
〔自己認証（当社データ）〕

* 【包装】

1. 顆粒： 2 g または 5 g 入（滅菌パック）/箱
ブロック体： 1 個（滅菌パック）/箱
円筒体： 1 個（滅菌パック）/箱
2. 添付文書：1 部（本書）
3. シール：1 枚

【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献

- (1) 鶴狩善一 他：関東整形災害外科学会誌 22(5)、549-552 (1991)
- (2) 小澤正宏 他：Orthopaedic Ceramic Implants, vol.11、137-141(1991)
- (3) 成田哲也 他：東京膝関節学会誌 14、44-48(1993)
- (4) 小澤正宏 他：東日本整形災害外科学会誌 12、409-413(2000)
- (5) 森川茂 他：関東整形災害外科学会誌 32(6)、403-407(2001)
- (6) Akira Ogose 他：J Biomed Mater Res (Appl Biomater) 63、601-604(2002)

** 2. 文献請求先

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
電話番号：03-6901-4458

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** 製造販売元：

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
〒163-0914
東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
電話番号：03-6901-4458

製造元：

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社