

ベリプラストシングルスプレーセット

再使用禁止

*【警告】

○本品を使用する際には、スプレーヘッドを組織に近づけ過ぎず、ガス圧は117.6kPa（1.2kgf/cm²）以上に圧力を上げないよう留意すること。[空気塞栓、ガス塞栓が発生するおそれがある。]


【禁忌・禁止】

○再使用禁止

○本品はベリプラスト専用なので、他用途への転用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品はスプレーヘッド（2個）、滅菌フィルター付エアークラインチューブ（1個）、先端クリップ（1個）よりなるセット品である。
先端クリップを入れない製品もある。

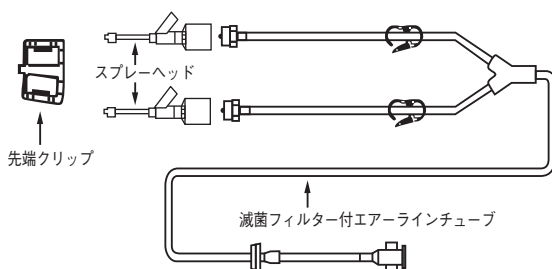

ベリプラストシングルスプレーセットの形状・構造

【使用目的、効能又は効果】

止血剤注入キットの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【操作方法又は使用方法等】

[先端クリップを使用しない場合]

1. 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入ったシリンジをシリンジ目盛と同色のスプレーヘッドに装着します。なお、装着の際にはシリンジのチップをアダプターの奥まで挿入し、スプレーヘッドと接続が確実に行われるようにしてください。
2. 各スプレーヘッドにエアークラインチューブの先端（無色透明）を回転させながら差し込み固定します。
3. ガス圧力調整器のコネクターにエアークラインチューブの先端（赤色）を回転させながら差し込み固定します。
4. ガス圧を73.6～117.6kPa（0.75～1.2kgf/cm²）に調整します。ガス圧調整器添付の取扱説明書をご参照ください。
5. エアークラインチューブに装着されておりますクランプにて、エアークラインの[ON][OFF]調整ができます。
6. プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
7. 薬剤の噴霧箇所に応じて、スプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げることが可能です。

[先端クリップを使用する場合]

1. 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入ったシリンジをパレルホルダーに固定します。
2. プランジャーをプランジャーホルダーで固定します。
3. 各々のスプレーヘッドを同色の（シリンジ目盛）シリンジに装着します。
4. スプレーヘッドの先端に先端クリップを装着します。
5. 各スプレーヘッドにエアークラインチューブの先端（無色透明）を回転させながら差し込み固定します。
6. ガス圧力調整器のコネクターにエアークラインチューブの先端（赤色）を回転させながら差し込み固定します。
7. ガス圧を73.6～117.6kPa（0.75～1.2kgf/cm²）に調整します。ガス圧力調整器添付の取扱説明書をご参照下さい。
8. エアークラインチューブに装着されておりますクランプにて、エアークラインの[ON][OFF]調整ができます。
9. プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
10. 薬剤の噴霧箇所に応じて、スプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げることが可能です。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1包 1セット入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

製 造：ニプロ医工株式会社

お問い合わせ先：ニプロ株式会社（東京営業部）

東京都文京区本郷4丁目3番4号

電話番号：03-5684-5611

*供給：CSLベアリング株式会社

札幌支店

電話番号：0120-448-175

北関東信越支店

電話番号：0120-187-016

神奈川支店

電話番号：0120-168-036

京都支店

電話番号：0120-318-266

中四国支店

電話番号：0120-233-850

東北支店

電話番号：0120-518-127

東京支店・南関東支店

電話番号：0120-665-831

東海支店

電話番号：0120-862-199

大阪支店

電話番号：0120-044-807

九州支店

電話番号：0120-448-691

使用方法説明書を必ず参照のこと。



ニプロ株式会社