

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 ** 薬液注入用ノズル 70388000

ベリプラストシングルスプレーセット

再使用禁止

*【警告】


本品を使用する際には、シングルスプレーヘッドを組織に近づけ過ぎず、ガス圧は117.6kPa（1.2kgf/cm²）以上に圧力を上げないよう留意すること。[空気塞栓、ガス塞栓が発生するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品はベリプラスト専用なので、他用途への転用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品はシングルスプレーヘッド（2個）、エアーフィルターライン（1個）、先端クリップ（1個）よりなるセット品である。

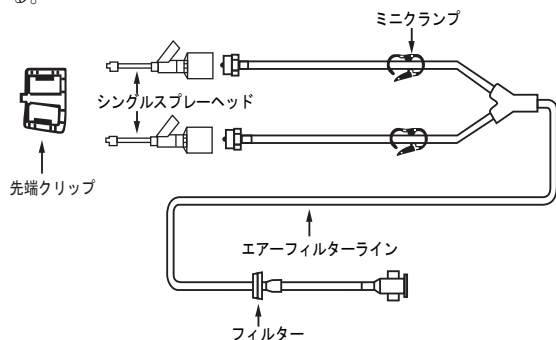

本品は、ポリプロピレン、ステンレス鋼を使用している。

**【使用目的又は効果】

本品は生体組織接着剤を患部に噴霧するための医薬品注入器である。

【使用方法等】

[先端クリップを使用しない場合]

1. 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入ったシリンジをシリンジ目盛と同色のシングルスプレーヘッドに装着します。
なお、装着の際にはシリンジのチップをアダプターの奥まで挿入し、シングルスプレーヘッドと接続が確実に行われるようにしてください。
2. 各シングルスプレーヘッドにエアーフィルターラインの先端（無色透明）を回転させながら挿入し、固定します。
3. ガス圧力調整器のコネクタにエアーフィルターラインの先端（赤色）を回転させながら挿入し、固定します。
4. ガス圧を73.6～117.6kPa（0.75～1.2kgf/cm²）に調整します。ガス圧力調整器添付の取扱説明書をご参照ください。
5. エアーフィルターラインに装着されておりますミニクランプにて、エアーの[ON][OFF]調整ができます。
6. プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
7. 薬剤の噴霧箇所に応じて、シングルスプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げることが可能です。

[先端クリップを使用する場合]

1. 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入ったシリンジをパレルホルダーに固定します。
2. プランジャーをプランジャーホルダーで固定します。

3. 各シングルスプレーヘッドを同色の（シリンジ目盛）シリンジに装着します。
4. シングルスプレーヘッドの先端に先端クリップを装着します。
5. 各シングルスプレーヘッドにエアーフィルターラインの先端（無色透明）を回転させながら挿入し、固定します。
6. ガス圧力調整器のコネクタにエアーフィルターラインの先端（赤色）を回転させながら挿入し、固定します。
7. ガス圧を73.6～117.6kPa（0.75～1.2kgf/cm²）に調整します。ガス圧力調整器添付の取扱説明書をご参照ください。
8. エアーフィルターラインに装着されておりますミニクランプにて、エアーの[ON][OFF]調整ができます。
9. プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
10. 薬剤の噴霧箇所に応じて、シングルスプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げることが可能です。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
包装の使用期限を参照のこと（自己認証による）。
有効期間：滅菌後4年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社

お問い合わせ先

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611（医療システム営業部）

*供給：CSLベ어링株式会社

札幌支店

電話番号：0120-448-175

北関東信越支店

電話番号：0120-187-016

南関東支店

電話番号：0120-961-310

東海支店

電話番号：0120-862-199

大阪支店

電話番号：0120-044-807

九州支店

電話番号：0120-448-691

東北支店

電話番号：0120-518-127

東京支店

電話番号：0120-665-831

神奈川支店

電話番号：0120-168-036

京都支店

電話番号：0120-044-807

中四国支店

電話番号：0120-044-807

使用方法説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社