

** 機械器具 (30) 結紮器及び縫合器
 ** 単回使用ステープルリムーバ **JMDN コード：16787002
 ** 管理医療機器

再使用禁止

プロキシメイト* エクストラクター

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。[予期せぬ損傷を招く恐れがあるため。]
3. ステープル縫合する皮膚からその下にある骨、血管、内臓まで少なくとも 5mm 離れていない場合、ステープルによる皮膚縫合をしてはならない。

**【形状、構造及び原理等】

本品はステンレススチール製で、様々な外科手術における通常の皮膚切開創の縫合に使用したステープルの抜去器具である。

1. 各部の名称

- (1) セーフティキャップ
- (2) ジョー
- (3) 上側ハンドル
- (4) 下側ハンドル

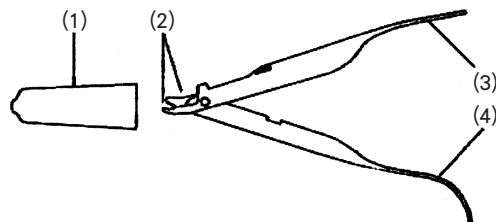

**2. 原理

皮膚縫合したステープルを本品のジョーのスロットにあてがい、本品のハンドルを閉じることでステープルを開いて、抜去する。

**【使用目的、効能又は効果】


鉗子

**【操作方法又は使用方法等】


ご使用前に必ず本添付文書をお読み下さい。

1. 操作方法


- (1) 無菌的な方法で本品を取出す。破損防止のため、本品を清潔区域に投げ出さないこと。
- (2) セーフティキャップを外す。
- (3) 下側のジョーをレギュラーあるいはワイドサイズのステープルの下に滑り込ませ、ジョーのスロットにはめる。

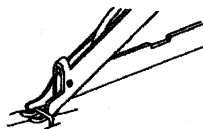

- (4) 上下のハンドルがしっかり閉じるまで親指で握り込み、ステープルを開く。

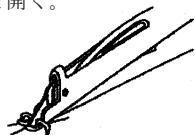

- (5) ステイプラーが完全に開いたことを必ず確認の上、皮膚から本品を持ち上げる。本品のハンドルが完全に閉じる前に絶対に持ち上げないこと。

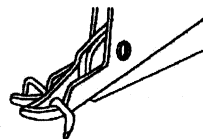

【使用上の注意】

- (1) 本書はプロキシメイト* エクストラクターの添付文書であり、外科的縫合手術手技の参考書ではない。
- (2) 本品の使用前に、すべての器具および付属品の適合性を必ず確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。
- (2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取扱うこと。
- (3) 製品の先入れ先出しを励行すること。
- (4) 製品に記載してある使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄し使用しないこと。

*2. 使用の期限

- (1) 使用期限は製品の包装に表示されている。[自己認証 (当社データ) による]

【包装】

1 箱 12 個入り、1 個入り

*【主要文献及び文献請求先】

文献請求先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

製造業者：米国 Ethicon Endo-Surgery, Inc.
 Ethicon Endo-Surgery, LLC