

機械器具 46 医療用絞断器
管理医療機器 単回使用デルマトーム用刃 35134000
スペアブレード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。

<併用医療機器>

他社の製品を併用しないこと。

***【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

有効期間等：外箱の滅菌期限に従い使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社


問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG

【形状・構造及び原理等】

1)形状・構造

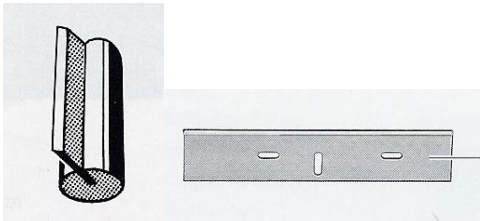

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号等については、製品の包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

2)原理

タービン又はモーターの回転運動がハンドピースを介してブレードに伝達され皮膚または粘膜を採取すること。

【使用目的又は効果】

各種サイズの切り刃で、デルマトームに取り付けて皮膚移植組織の採取に用いる刃をいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・使用前に必ずブレードの先端に変色やダメージの無い事を確認すること。
- ・ブレードがハンドピースにスムーズに挿入でき、確実にロックできる事を確認すること。
- ・試運転でブレードが極端にぶれたり、振動を感じたりしない事を確認すること。

上記の作業で異常があれば、その製品を使用しないこと。

****【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ・ブレードを交換する際には、モーター又はタービンが動かない状態になっている事を確認して行うこと。ブレード交換時に本体が作動した場合は非常に危険である。
- ・ブレードを汚染しないよう注意して容器から取り出すこと。
- ・使用前に必ずブレードのダメージのチェックをすること。ダメージが見つかった場合は、使用しないこと。
- ・ブレードがしっかりとハンドピース内でロックされているかどうか確認すること。
- ・ブレード使用時に先端を他の器具やインプラントに干渉させないこと。
- ・ブレードを使用する際は極端に強い負荷を先端にかけないこと。
- ・ブレード使用中にガーゼ、ドレープを巻き込まないこと。
- ・ブレード交換時、刃先で怪我をしないように注意すること。

2. 不具合・有害事象

その他の不具合

- ・破損