

ニプロカテラン針GA


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、液の注入又は排出を目的に注射筒などと共に用いる単回使用の滅菌済み注射針であり、針管、針基から構成されている。

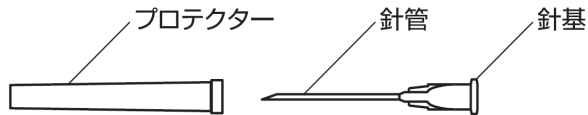

【使用目的、効能又は効果】

注射筒等を用いて注射用医薬品を注入する。

【品目仕様等】

JIS T 3209:2005の引き抜き強さ、漏れ(第2法)、弾性、曲げ強さに適合する。

【操作方法又は使用方法等】

本品は1回限りの使い捨て、再使用しないで下さい。

1. 包装を開封し、注射針を包装内から取り出します。
2. 注射針をシリンジにしっかり付けます。
3. プロテクターをまっすぐ引いて外し、使用します。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品の針管部には直接手を触れないよう注意すること。
2. 針基に過剰な負荷をかけないこと。また、接続時はプロテクターで針基に過剰な回転負荷をかけないこと。〔針管又は針基が破損する可能性がある。〕
3. プロテクターを外すとき、針先がプロテクターに触れないよう注意すること。〔プロテクターが針に触れると刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合がある。〕
4. 注射針をバイアルや輸液容器等のゴム栓に穿刺する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に穿刺されることがないように注意すること。
5. アンブル等の薬液容器壁面に注射針が当たらないよう注意すること。〔刃先が変形し、穿刺しづらくなる場合がある。〕
6. 接続部に薬液又は血液を付着させないこと。〔接続部の緩み等が生じる可能性がある。〕
7. プロテクターをかぶせる際には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
3. あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中は本品の破損、接続部の緩み、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
4. プラスチック製品なので、低温時の取扱いには注意すること。〔針管又は針基が破損する可能性がある。〕
5. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間・使用の期限

外箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【包装】

100本／箱

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪府北区本庄西3丁目9番3号

電話：06-6372-2331(代表)

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社